

AiLink

dětská váha
ETA730690000



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI AILINK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCII AILINK

USER'S MANUAL FOR AILINK APPLICATION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ AILINK ALKALMAZÁSHOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI AILINK

BEDIENUNGSANLEITUNG ZUR APPLIKATION AILINK

CZ

SK

EN

HU

PL

DE



Vážení zákazníci,
děkujeme za nákup a zájem o naši váhu. Spolu s tímto návodem používejte i návod k použití k samotné váze, který je jeho nedílnou součástí. Tento návod se zaměřuje primárně pouze na samotnou aplikaci a její možnosti, nikoliv na používání váhy.

Uvedené ilustrace a překlady textů či aktivačních prvků v aplikaci se mohou ve skutečnosti mírně odlišovat od zobrazení a popisu v tomto návodu. Proto se nelekněte, pokud vaše aplikace 100% neodpovídá ilustracím v návodu. Uvedené ilustrace se také mohou týkat různých měření, proto se nelekněte, když uvidíte nesoulad mezi vyjádřením výsledků.

| | |
|--|-----------|
| OBSAH | |
| ZÁKLADNÍ STRUKTURA HLAVNÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY APLIKACE | 4 |
| ZÁKLADNÍ STRUKTURA DOMOVSKÉ OBRAZOVKY VÁHY | 5 |
| UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K APLIKACI AILINK | 6 |
| 1. INSTALACE APLIKACE | 6 |
| 2. REGISTRACE ÚČTU A PŘIHLÁŠENÍ | 6 |
| 3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | 6 |
| 4. ZÁKLADNÍ RADY A TIPY K POUŽITÍ | 8 |
| 5. VÁŽENÍ | 8 |
| 6. ZOBRAZENÍ VÝSLEDKŮ | 9 |
| 7. SDÍLENÍ VÝSLEDKŮ | 9 |
| 8. KAMARÁD - SDÍLENÍ MĚŘENÍ | 10 |
| 9A. NASTAVENÍ - OBECNÁ část | 10 |
| 9B. NASTAVENÍ - APLIKAČNÍ část | 10 |

Vážení zákazníci,
ďakujeme za nákup a záujem o našu váhu. Spolu s týmto návodom používajte aj návod na použitie k samotnej váhe, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Tento návod sa zameriava primárne iba na samotnú aplikáciu a jej možnosti, nie na používanie váhy.

Uvedené ilustrácie a preklady textov či aktivačných prvkov v aplikácii sa môžu v skutočnosti mierne odlišovať od zobrazenia a popisu v tomto návodu. Preto sa neobávajte, ak vaša aplikácia 100% neodpovedá ilustráciám v návode. Uvedené ilustrácie sa tiež môžu týkať rôznych meraní, preto sa nezľaknite, keď uvidíte nesúlad medzi vyjadrením výsledkov.

| | |
|---|-----------|
| OBSAH | |
| ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA HLAVNEJ DOMOVSKEJ OBRAZOVKY APLIKÁCIE | 12 |
| ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA DOMOVSKEJ OBRAZOVKY VÁHY | 13 |
| UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K APLIKÁCII AILINK | 14 |
| 1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE | 14 |
| 2. REGISTRÁCIA ÚČTU A PRIHLÁSENIE | 14 |
| 3. PÁROVANIE ZARIADENÍ | 14 |
| 4. ZÁKLADNÉ RADY A TIPY NA POUŽITIE | 16 |
| 5. VÁŽENIE | 16 |
| 6. ZOBRAZENIE VÝSLEDKOV | 17 |
| 7. ZDIEĽANIE VÝSLEDKOV | 17 |
| 8. KAMARÁT - ZDIEĽANIE MERANÍ | 18 |
| 9A. NASTAVENIA - OBECNÁ časť | 18 |
| 9B. NASTAVENIA - APLIKAČNÁ časť | 18 |

Dear customers,
Thank you for your purchase and interest into our scale. Use this manual together with the maual for the scale.This manual is focused only on the application and its options. It is not focused on the usage of the scale.

Illustrations and translations of texts or of activating elements applied in the application may slightly differ from the illustrations and descriptions specified in this manual. Therefore, don't get scared if there are differences in your application compared with the illustrations in the manual. The illustrations provided may also cover different measurements, so don't be afraid if you see a discrepancy between the results.

| | |
|---|-----------|
| CONTENT | |
| BASIC STRUCTURE OF APP'S MAIN MENU | 20 |
| BASIC STRUCTURE OF HOME SCREEN | 21 |
| USER MANUAL FOR THE AILINK APP | 22 |
| 1. APPLICATION INSTALLATION | 22 |
| 2. ACCOUNT REGISTRATION AND LOGIN | 22 |
| 3. CONNECTING THE DEVICE | 22 |
| 4. BASIC ADVICE AND TIPS FOR USE | 24 |
| 5. MEASUREMENT | 24 |
| 6. RESULT VIEW | 25 |
| 7. SHARING RESULTS | 25 |
| 8. FRIEND – RESULT SHARING | 26 |
| 9A. SETTINGS - GENERAL | 26 |
| 9B. SETTINGS - APPLICATION | 26 |

Tisztelt Vásárlóink!
köszönjük a vásárlását és a mérlegünk iránti érdeklődését. Kérjük, hogy a jelen kézikönyvvel együtt használja a mérleg használati utasítását is, amely a kézikönyv szerves részét képezi. Ez a kézikönyv elsősorban magára az alkalmazásra és annak képességeire összpontosít, nem pedig a mérleg használatára.

Az alkalmazásban található szövegek vagy aktiváló elemek illusztrációi és fordításai némileg eltérhetnek a jelen kézikönyvben található illusztrációktól és leírásoktól. Ne ijedjen meg tehát, ha az Ön alkalmazása nem 100%-ban egyezik a kézikönyvben található ábrákkal.

| | |
|---|-----------|
| TARTALOM | |
| APLIKÁCIÓ KÉPERNYŐJÉNEK ALAP STRUKTÚRÁJA | 28 |
| APLIKÁCIÓ KÉPERNYŐJÉNEK ALAP STRUKTÚRÁJA | 29 |
| APLIKÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA | 30 |
| 1. AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE | 30 |
| 2. FIÓK REGISZTRÁCIÓJA ÉS BEJELENTKEZÉS | 30 |
| 3. ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA | 30 |
| 4. ALAP HASZNÁLATI TANÁCSOK ÉS TIPPEK | 32 |
| 5. MÉRÉS | 32 |
| 6. EREDMÉNYEK MEGJELENÉSE | 33 |
| 7. EREDMÉNYEK MEGOSZTÁSA | 33 |
| 8. BARÁT – MÉRÉSEK MEGOSZTÁSA | 34 |
| 9A. BEÁLLÍTÁS - ÁLTALÁNOS rész | 34 |
| 9B. BEÁLLÍTÁS – APLIKÁCIÓ rész | 34 |

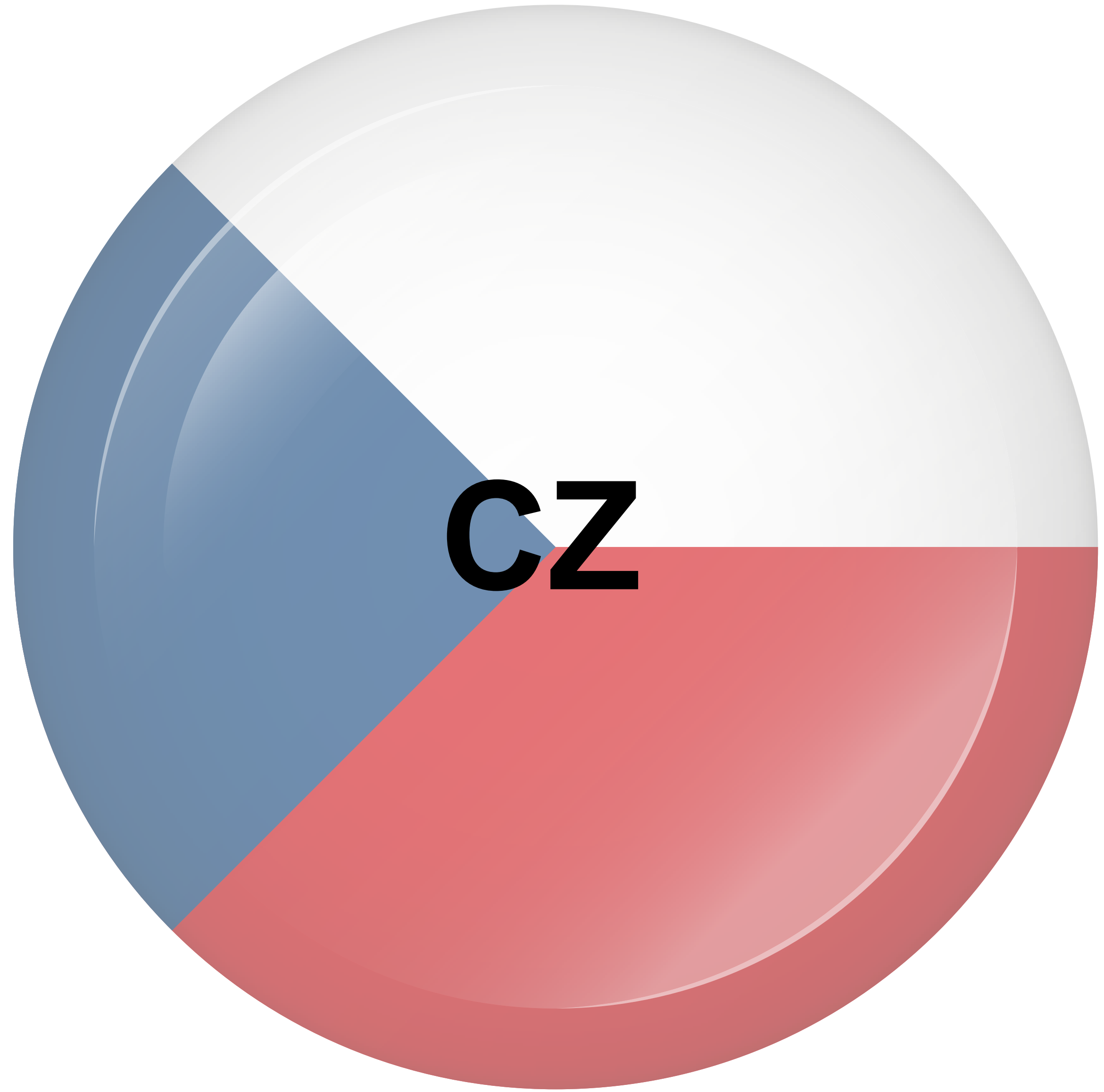
Szanowny Klienci,
dziękujemy za zakupienie i zainteresowanie naszą wagą. Wraz z niniejszą instrukcją korzystajcie też z instrukcji obsługi samej wagi, która jest jej integralną częścią. Niniejsza instrukcja dotyczy przede wszystkim samej aplikacji i jej możliwości, nie używania wagi.

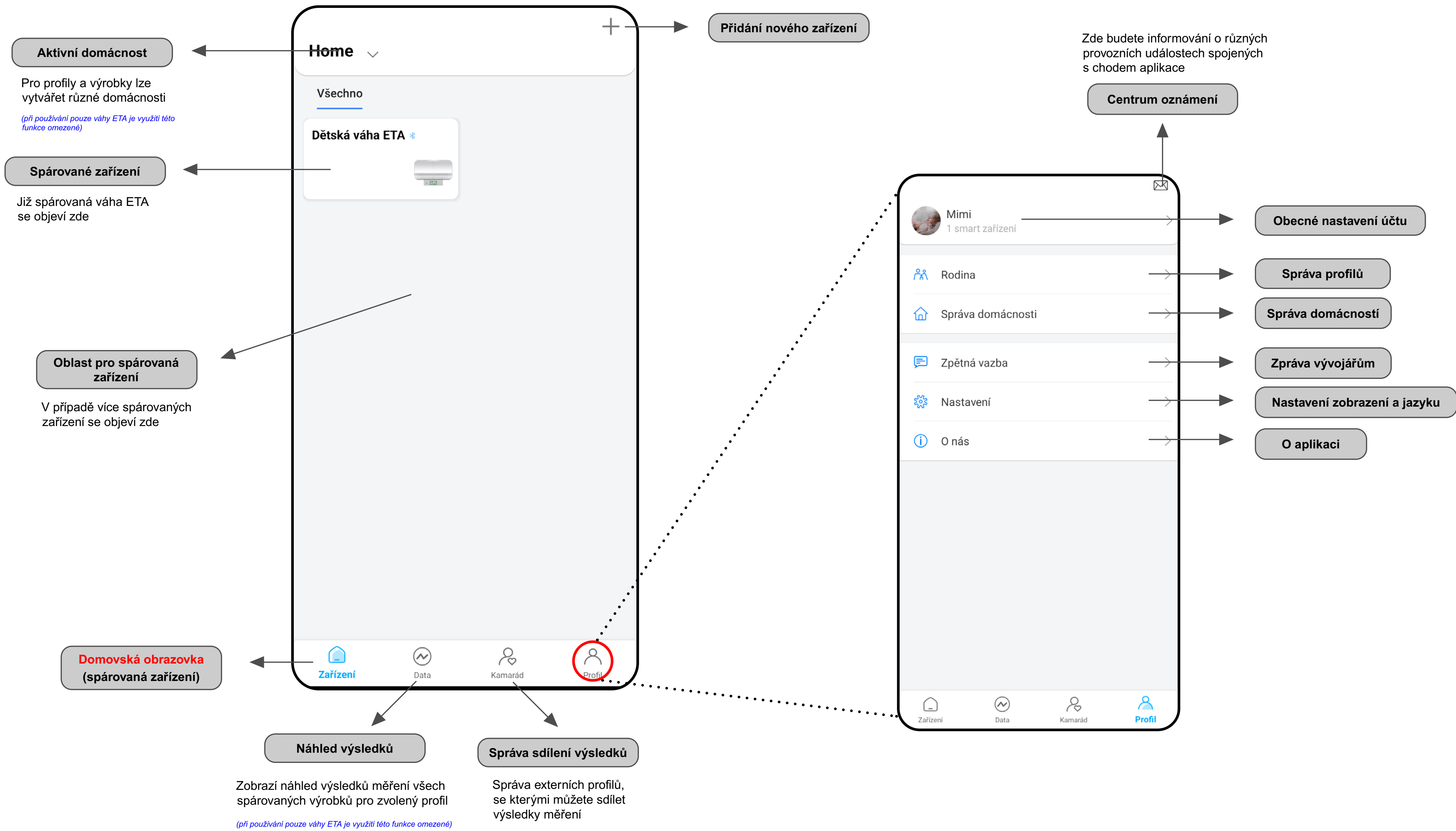
Podane ilustracje i tłumaczenia tekstów w aplikacji mogą się nieznacznie różnić od wyobrażeń i opisu w niniejszej instrukcji. Dlatego nie należy niepokoić się, jeżeli aplikacja w 100% nie odpowiada ilustracjom w instrukcji.

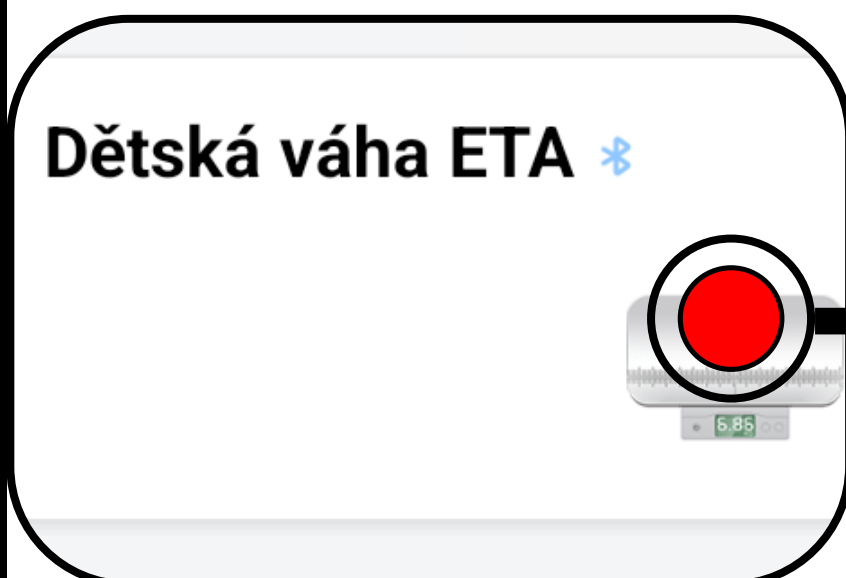
| | |
|---|-----------|
| SPIS TREŚCI | |
| PODSTAWOWA STRUKTURA GŁÓWNEGO EKRANU APLIKACJI | 36 |
| PODSTAWOWA STRUKTURA EKRANU GŁÓWNEGO WAGI | 37 |
| PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA APLIKACJI AILINK | 38 |
| 1. INSTALACJA APLIKACJI | 38 |
| 2. REJESTRACJA KONTA I ZALOGOWANIE | 38 |
| 3. PAROWANIE URZĄDZEŃ | 38 |
| 4. PODSTAWOWE RADY DOTYCZŁCE UŻYWANIA | 40 |
| 5. WAŻENIE | 40 |
| 6. WYŚWIETLANIE WYNIKÓW | 41 |
| 7. UDOŚTĘPNIANIE WYNIKÓW | 41 |
| 8. PRZYJACIEL - WSPÓŁUŻYTKOWANIE MIERZENIA | 42 |
| 9A. NASTAWIENIE - CZĘŚĆ OGÓLNA | 42 |
| 9B. NASTAWIENIE - CZĘŚĆ APLIKACYJNA | 42 |

Sehr geehrte Kunden,
Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihr Interesse an unserer waage. Bitte benutzen Sie neben dieser Anleitung auch die Bedienungsanleitung der Waage selbst, die Bestandteil dieser Anleitung ist. Dieses Handbuch konzentriert sich in erster Linie auf die App selbst und ihre Möglichkeiten, nicht auf die Verwendung der Personenwaage. Die Abbildungen und Übersetzungen der Texte oder Aktivierungselemente in der App können leicht von den Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen. Seien Sie also nicht beunruhigt, wenn Ihre App nicht zu 100 % mit den Abbildungen im Handbuch übereinstimmt.



| | |
|--|-----------|
| INHALT | |
| GRUNDSTRUKTUR DES HAUPTBILDSCHIRMS DER APP | 44 |
| GRUNDSTRUKTUR DES HAUPTBILDSCHIRMS DER APP | 45 |
| AILINK BEDIENUNGSANLEITUNG | 46 |
| 1. INSTALLATION DER APP | 46 |
| 2. KONTOREGISTRIERUNG UND ANMELDUNG | 46 |
| 3. GERÄTEKOPPLUNG | 46 |
| 4. GRUNDLEGENDE HINWEISE UND TIPPS ZUR VERWENDUNG | 48 |
| 5. WIEGEN | 48 |
| 6. ANZEIGE DER ERGEBNISSE | 49 |
| 7. TEILEN DER ERGEBNISSE | 49 |
| 8. FREUNDE - MESSUNGEN TEILEN | 50 |
| 9A. EINSTELLUNGEN - ALLGEMEINER Teil | 50 |
| 9B. EINSTELLUNGEN - ANWENDUNGSTEIL | 50 |







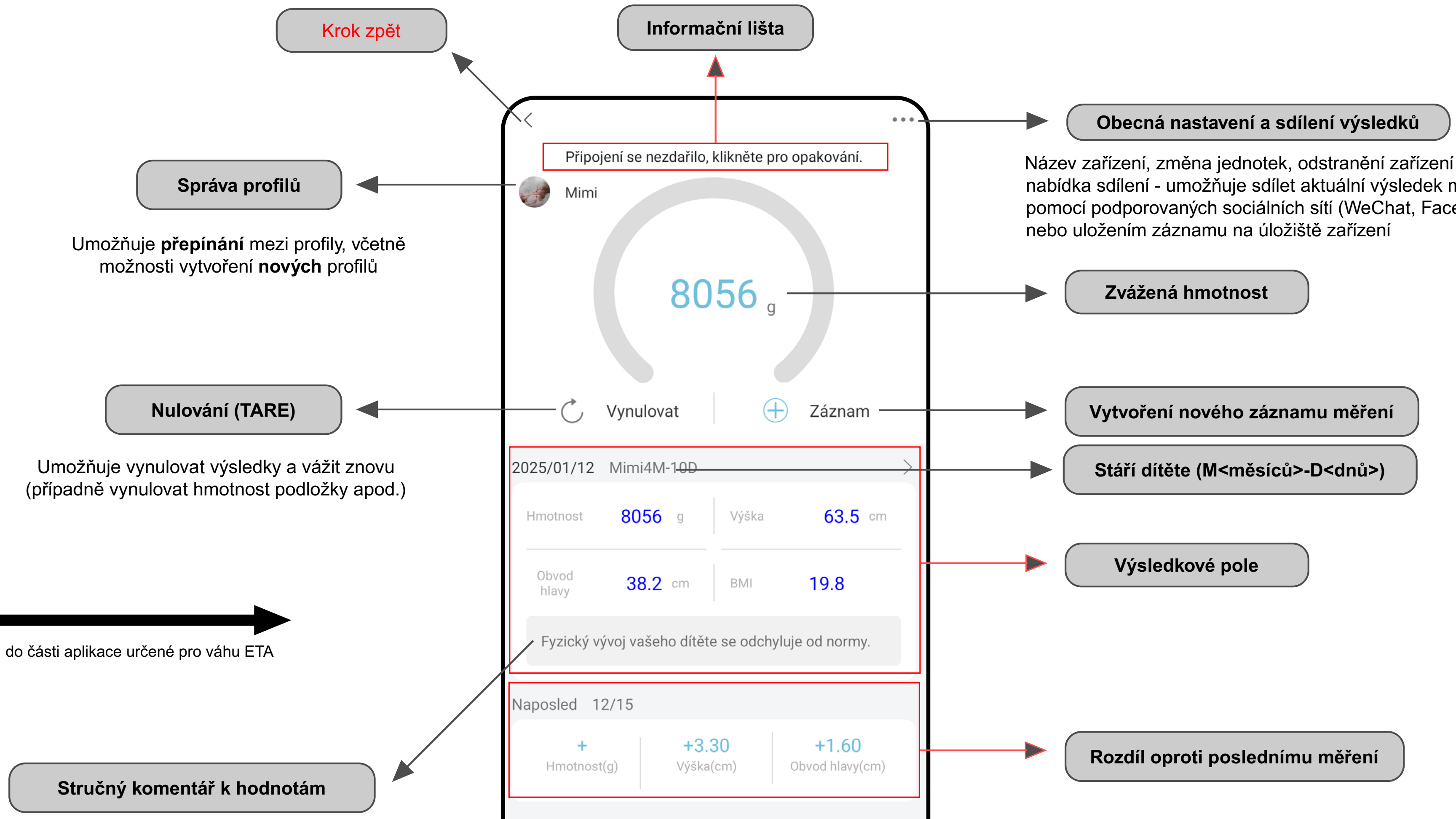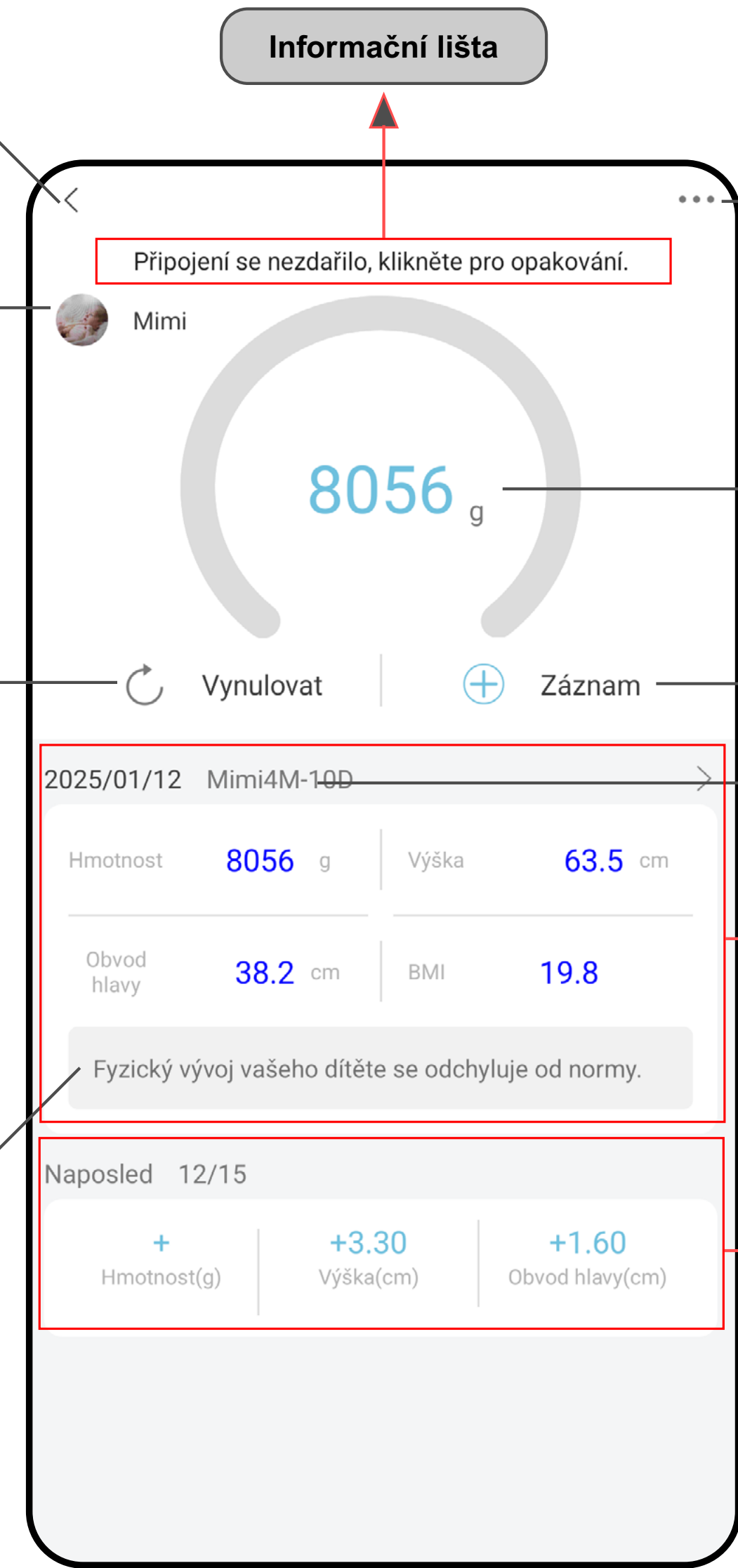Přechod do části aplikace určené pro váhu ETA



Vážený zákazníku,

Děkujeme za Vaši důvěru v produkty značky ETA. Tato příručka je určena všem majitelům váhy ETA7306, kteří chtějí naplno využít její potenciál pomocí aplikace AILINK.

Další informace, rady a tipy k Vaší váze naleznete také našich webových stránkách:

www.eta.cz/osobnipece

Tyto webové stránky neustále aktualizujeme a shromažďujeme zde nejnovější poznatky o daném výrobku.

V případě dotazů k funkci aplikace, nebo v případě jakýchkoliv problémů nejprve přejděte na výše uvedené webové stránky a pokud ani informace tam uvedené nepomohou vaši žádost vyřešit, můžete nás kontaktovat na informačním e-mailu: apps@eta.cz

1. INSTALACE APLIKACE

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:




Aplikaci si stáhněte a nainstalujte do Vašeho mobilního telefonu (tabletu).

KOMPATIBILITA

| | |
|--|---|
| Operační systém mobilního telefonu (tabletu) | Android 8.0 a vyšší IOS 11.0 a vyšší |
|--|---|


2. REGISTRACE ÚČTU A PŘIHLÁŠENÍ

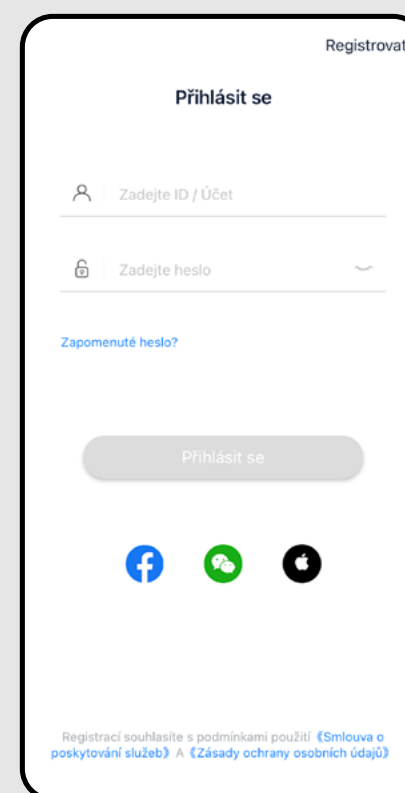1




- Jakmile aplikaci stáhnete, zapněte ji. Objeví se základní obrazovka umožňující přihlášení.
- Obrazovka také umožňuje přepnutí na registraci nového účtu, obnovení hesla v případě jeho ztráty, nebo přihlášení pomocí aplikací třetích stran.
- Pokud nemáte vytvořený účet, pokračujte na „**Registrovat**“ (případně se přihlaste aplikací třetí strany)
- Pro přihlášení zadejte název svého účtu (e-mail) a heslo, poté klikněte na „**Přihlásit se**“. V případě OS Android musíte před přihlášením odkliknout pole souhlasu s podmínkami použití v levém dolním rohu.

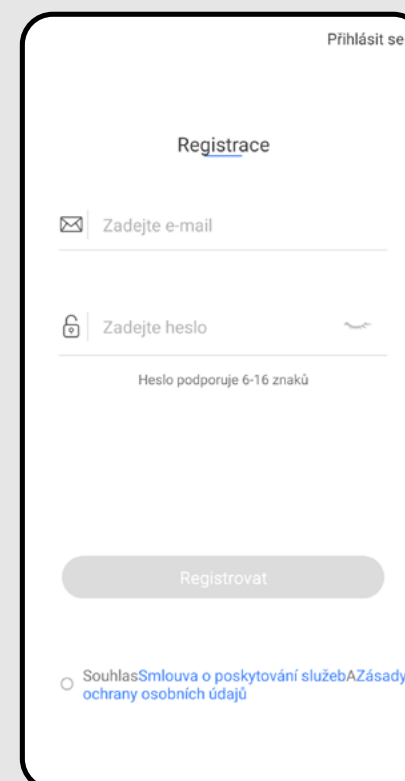2



- Zadejte platnou e-mailovou adresu a zvolte si bezpečné heslo.
- Potvrďte souhlas s poskytováním služeb a zásadami a proces potvrďte kliknutím na „**Registrovat**“.

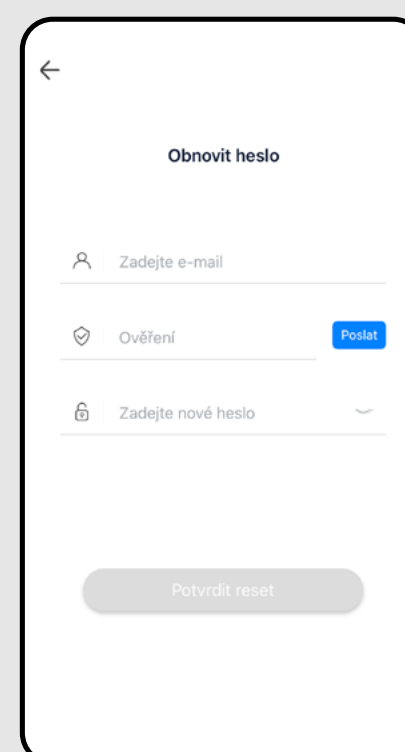3



- V případě ztráty hesla je možné jej obnovit prostřednictvím e-mailové adresy použité pro založení účtu (klikněte na "**Zapomenuté heslo?**")
 - Zadejte daný e-mail a jakmile na něj obdržíte ověřovací kód, zadejte jej do příslušného pole.
- Pozn. Ověřovacímu kódu může nějakou dobu trvat, než dorazí. Buďte prosím trpěliví. Zároveň zkontrolujte, zda kód neblokuje spamový koš/filtr vašeho poštovního klienta. V ideálním případě používejte běžné e-mailové adresy/klienty (např. gmail, seznam atp.).**

3. PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

1



- Po úspěšném přihlášení se vám objeví výchozí obrazovka, v tomto případě bez spárovaného zařízení.
- Pro spárování aplikace s váhou klikněte na „**Přidat zařízení**“

* V případě, že máte nějaké zařízení již spárováno, využijte v pravém horním rohu ikonu „+“, která stejným způsobem umožní přidat další zařízení.



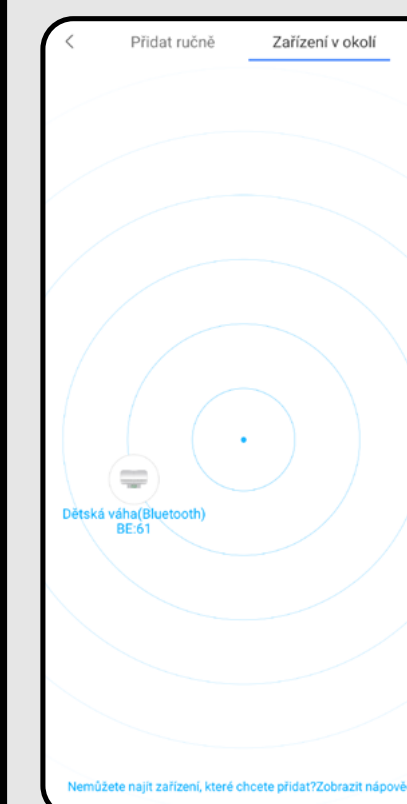
2




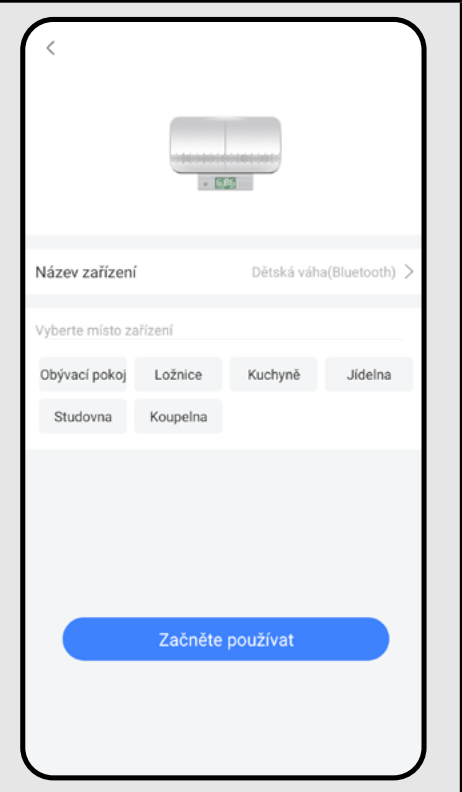
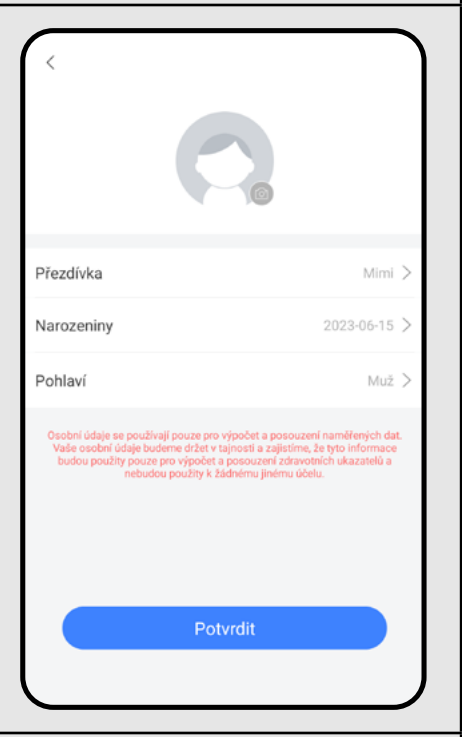
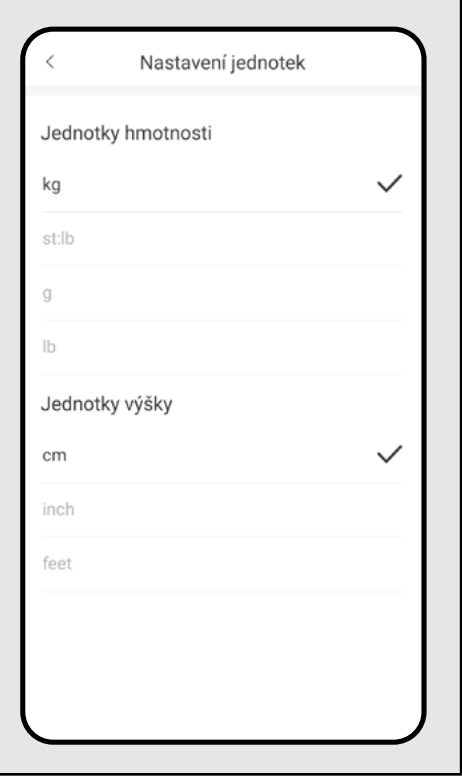
- Objeví se seznam různých druhů zařízení, pro které je aplikace určena.

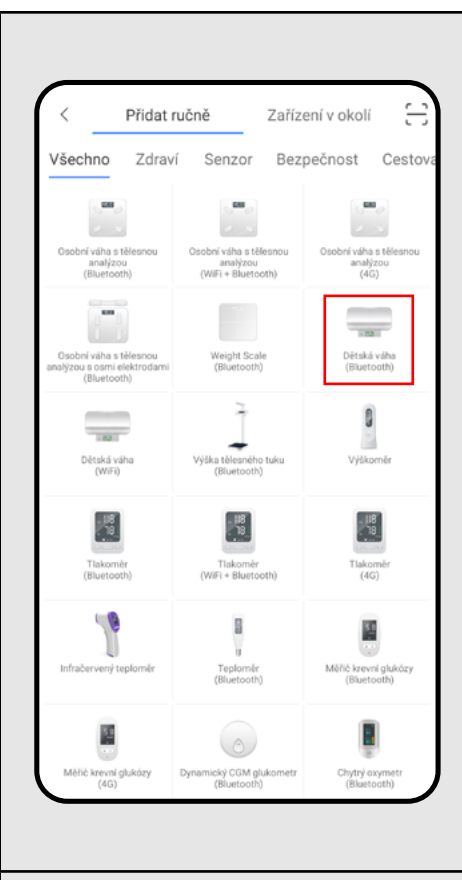

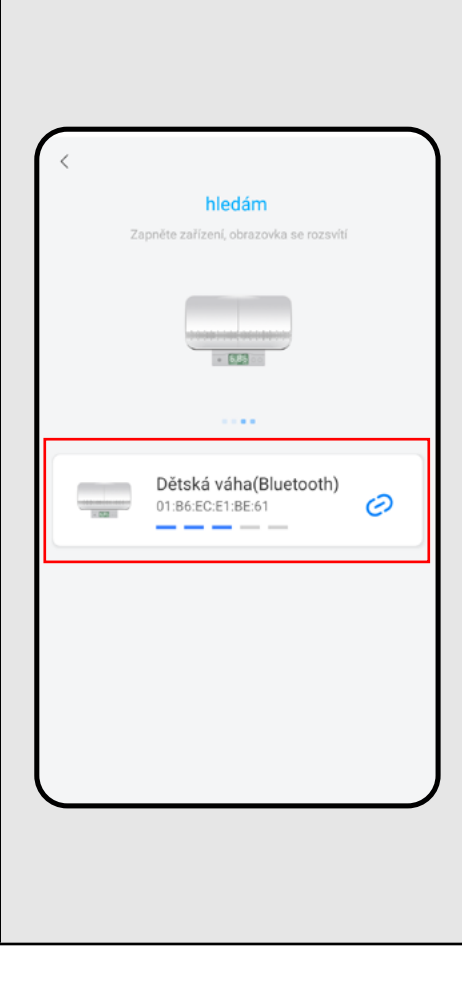
Poznámka:
Společnost ETA využívá aplikaci pouze pro váhu ETA7306 a ETA8781. Žádné další zařízení v aplikaci uvedené není v tuto chvíli podporováno.

3



- Nejlepším způsobem je automatické vyhledání zařízení, na které přejdete kliknutím na „**Zařízení v okolí**“.
- Začne se automaticky vyhledávat zařízení v nejbližším okolí.
- Váhu stiskem spínacího tlačítka zapněte.
- Jakmile se váha objeví v aplikaci, klikněte na její ikonu.

| | | |
|---|---|---|
| 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> Zahájí se proces párování. |
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> V dalším kroku aplikace nabídne možnost přidat vlastní název váhy a váhu přiřadit a kategorizovat dle místnosti, ve které se bude používat. Pro potvrzení klikněte na „Začněte používat“. <p style="text-align: center;">Poznámka Funkce kategorizace produktů dle místností má smysl spíše při používání více produktů, které aplikace podporuje. V našem případě (pouze použití váhy ETA) tuto funkci nemusíte používat.</p> |
| 6 |  | <ul style="list-style-type: none"> Pokud je toto vaše první přihlášení, může vás aplikace vyzvat k vytvoření profilu. Pro používání dětské váhy musí být profil vytvořený na dítě - tedy s jeho datem narození a pohlavím. Pokud by profil byl veden s datem narození daleko v minulosti, aplikace by nefungovala správně a nezobrazovala všechny možnosti. |
| 7 |  | <ul style="list-style-type: none"> V posledním kroku nastavení zařízení vám bude nabídnuta možnost nastavení jednotek hmotnosti a výšky. Pro potvrzení klikněte na „OK“. <p style="text-align: center;">Poznámka Pro zrušení párování/smazání daného zařízení tak učiňte v sekci nastavení, viz 9B-2.</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 8 |  | <ul style="list-style-type: none"> Druhým způsobem je manuální párování. V seznamu zařízení zvolte "Dětská váha (Bluetooth)". |
| 9 |  | <ul style="list-style-type: none"> Klikněte na "Další". |
| 10 |  | <ul style="list-style-type: none"> Zapněte váhu, začne automaticky vysílat signál, který zachytí váš mobilní telefon a zobrazí vyhledané zařízení v aplikaci. Potvrďte kliknutím na vyhledané zařízení. Další kroky jsou totožné s automatickým párováním (od kroku 3.5). |

4. ZÁKLADNÍ RADY A TIPY K POUŽITÍ

Používání váhy ETA s aplikací AiLink je intuitivní a během našeho testování jsme nezaznamenali žádné výrazné problémy či potíže, na které byste mohli při používání narazit. Přesto mají smart výrobky obecně zvýšené riziko spojené s nekompatibilitou mobilních zařízení, nebo třeba problémy s bezdrátovou konektivitou. Proto přinášíme soubor základních rad a doporučení, jak případné potíže charakteristické pro segment smart výrobků vyřešit.

1. Smart zařízení (mobil, příp. tablet):

- používejte vždy aktuální verzi aplikace staženou z oficiálních zdrojů
- ujistěte se, že vaše zařízení obsahují podporované verze Android a iOS.
- mějte aktivní funkci Bluetooth
- mějte aktivní internetové spojení pro správnou komunikaci aplikace s cloudovým serverem
- aplikaci povolte požadovaná oprávnění, která jsou v některých případech závislá na typu operačního telefonu.
V případě potíží zkontrolujte, zda nemáte v rámci např. vašeho telefonu nějaké nadřazené systémové nastavení, které zabraňuje aplikacím používat některá oprávnění - v takovém případě musíte aplikaci udělit výjimku.
- komunikaci váhy a telefonu mohou narušovat některé programy (např. VPN, firewall apod.), které používáte v telefonu. V případě problémů s párováním, nebo s běžným provozem tyto programy vypněte.
- v případě potíží vyzkoušejte párování s jiným telefonem, tím vyloučíte problém v daném telefonu.

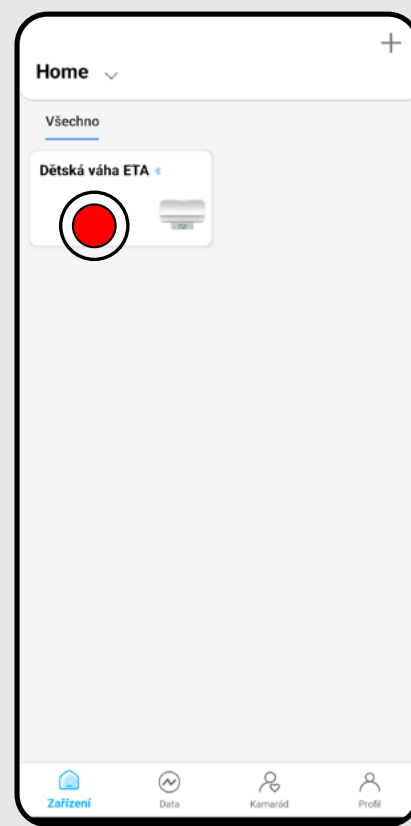
2. Jednotka váhy

Vždy se ujistěte, že používáte dostatečně nabitě baterie. Slabé baterie mohou negativně ovlivnit funkci spojení prostřednictvím Bluetooth, nebo samotný proces měření. V některých případech se může také stát, že baterie, které byly dodány spolu s výrobkem, mohou mít vlivem skladování a přepravy sníženou kapacitu, proto je vhodné při případných potížích vyzkoušet baterie nové.

- Vyzkoušejte založení nového účtu, tím vyloučíte problém s chybnou aktivací účtu;
- V průběhu párování i používání udržujte vaše smart zařízení v blízkosti váhy (nejlépe do vzdálenosti cca 2 m).


5. VÁŽENÍ

1




- Po zapnutí aplikace a úspěšném spárování klikněte na pole/ikonu spárované váhy.
- Tím přejdete z obecné části aplikace do části pro ovládání a správu samotné váhy.

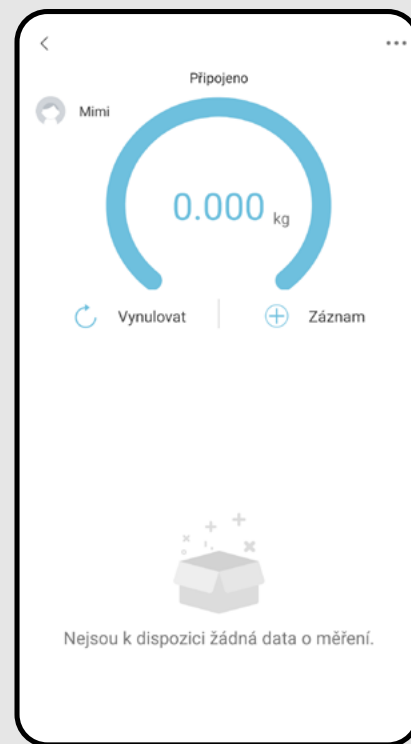2




- Zobrazí se základní obrazovka měření.
- Kliknutím na ikonu profilu v levém horním rohu si zvolte profil (pokud jich máte více).
- Váhu zapněte a vyčkejte, až se váha s aplikací spojí - informační lišta zobrazí hlášku „Připojeno“.
- Po zapnutí váhy se zařízení automaticky propojí. Pokud informační lišta oznamuje **"Připojení se nezdařilo..."**, stačí na toto oznámení kliknout a spojení se obnoví. Váha však musí být zapnutá.
- Před samotným vážením změřte dítěte jeho aktuální výšku a obvod hlavičky - tyto hodnoty je možné (volitelně) připojit k hodnotě hmotnosti.

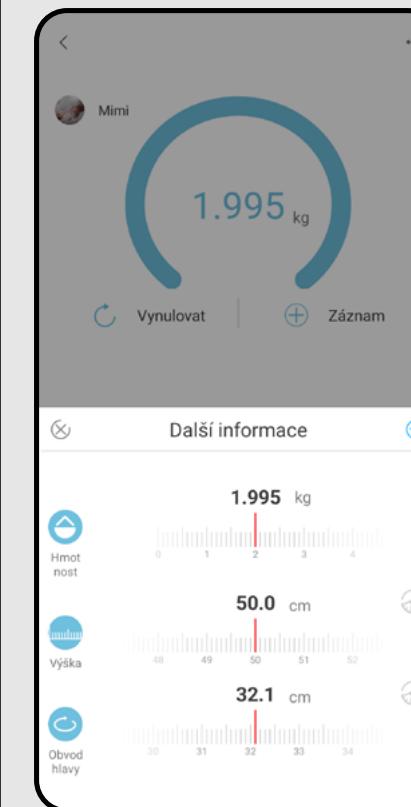3



- Nyní můžete zahájit praktické vážení - postupujte podle návodu k obsluze, který byl přiložen k váze.
- Po zvážení se data automaticky přenesou do aplikace a nabídne se obrazovka s možností doplnit výšku a obvod hlavičky dítěte. Tyto parametry zjistíte před samotným vážením a v tomto kroku je doplňte.
- Pokud výšku nebo obvod zadávat nechcete, klikněte na ikonu "🚫" na pravé straně daného parametru.
- Záznam vytvoříte kliknutím na "👍"

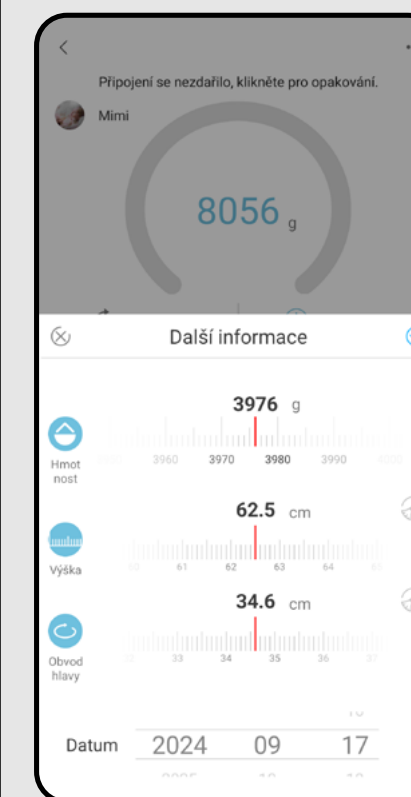4




- Výsledky měření je možné vložit také ručně. Pokud chcete vytvořit záznam měření bez nutnosti aktuálního vážení, stiskněte na hlavní obrazovce **"Záznam"** a hodnoty vložte ručně, včetně datumu, ke kterému se dané hodnoty vztahují.
- Takto lze přidávat hodnoty i zpětně.

POZNÁMKY

- Pokud selhalo připojení váhy, ujistěte se, že máte na telefonu aktivní Bluetooth, poté klikněte pro opětovné připojení na text v informační liště. Případně si přečtěte instrukce v kapitole 3.
- V případě, že měření či analýza selhalo, zkuste celý proces vážení/měření zopakovat. Případně si přečtěte instrukce v kapitole 4.
- Jakmile je záznam vytvořen, nelze zpětně sledované parametry upravit/přidat. Lze však manuálně vložit nový záznam, kterým nahradíte neúplné měření (včetně zvolení zpětného datumu).
- Pokud se dítě neustále hýbe a hodnota se neustálí, vyzkoušejte v aplikaci stisknout (v okamžiku, kdy je pohyb nejnižší) **"Záznam"** pro vynucené ustálení výsledku měření.
- Záznamy obsahují stručné slovní hodnocení vývoje dítěte dle růstových standardů WHO. Tato hodnocení a standardy jsou orientační a nelze z nich vyvozovat žádné zdravotnické závěry.


6. ZOBRAZENÍ VÝLEDKŮ

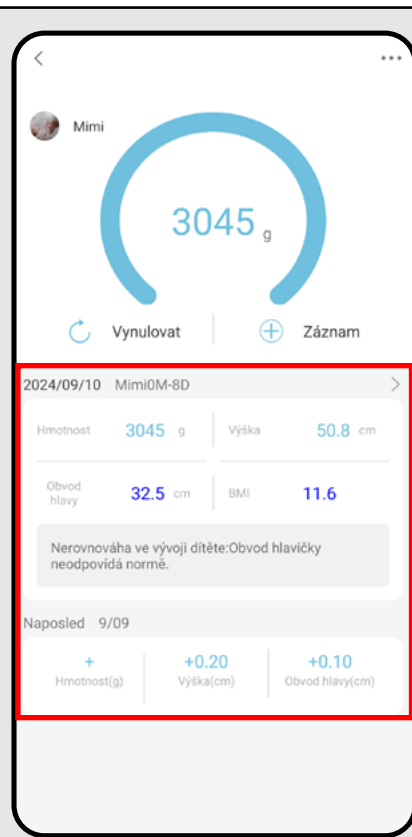1




- Klikněte na jeden ze záznamů na hlavní obrazovce. Tím přejdete do sekce evidence záznamů měření a grafického znázornění výsledků měření.
- Scrollováním můžete prohlížet jednotlivé záznamy.
- Záznamy rovněž obsahují stručný textový komentář vývoje dítěte.

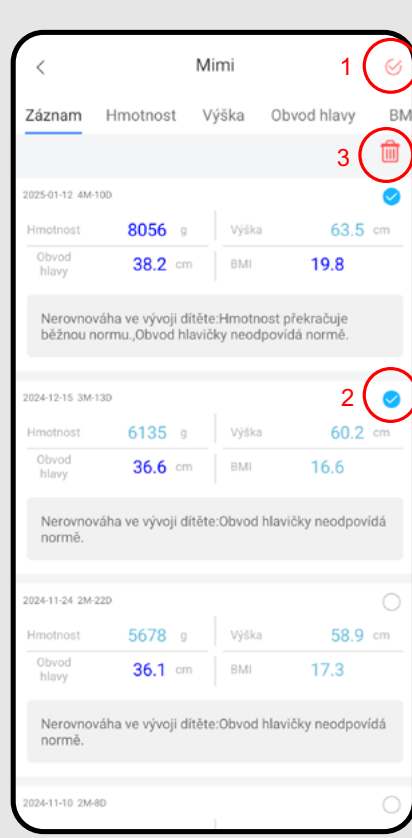2




- Pokud chcete nějaký záznam smazat, klikněte na ikonu tužky v pravém horním rohu (1).
- Poté zvolte kliknutím záznam nebo více záznamů (2), které chcete smazat.
- Na závěr volbu potvrďte kliknutím na ikonu popelnice v pravém horním rohu (3).
- Nakonec proces potvrďte kliknutím na "OK".

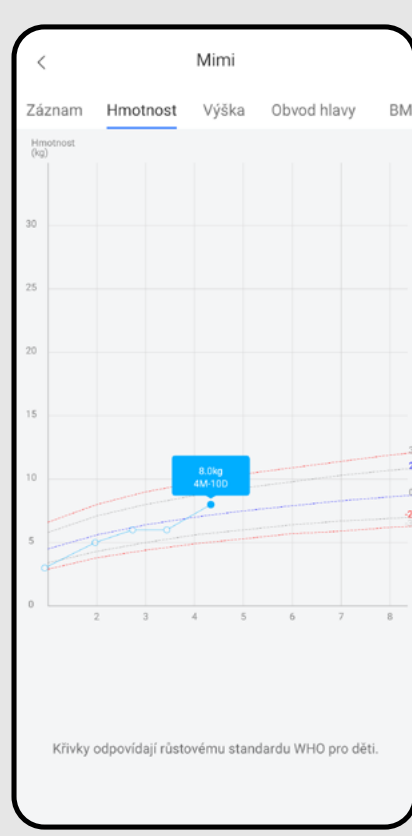3




- Kliknutím na jednotlivé parametry sledovaných měření v horní liště přejdete na jejich grafické vyjádření.
- V grafu jsou znázorněny také růstové křivky WHO - v nich tedy uvidíte přibližný vývoj v rámci těchto standardů.
- Nejprve je k dispozici "**Hmotnost**".

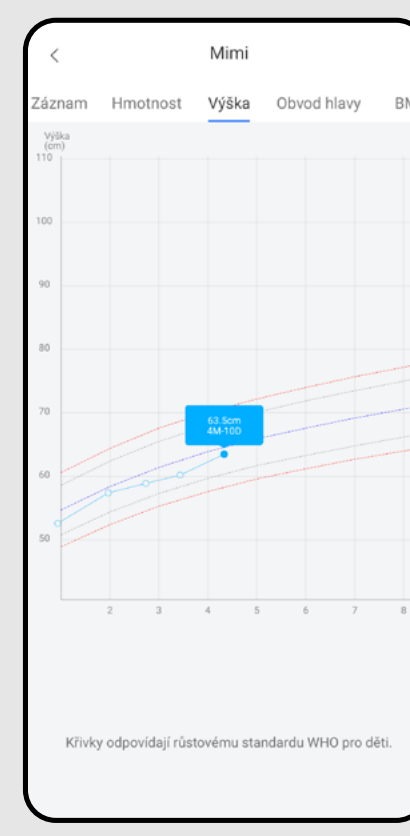4




- Dalším sledovaným parametrem je "**Výška**".

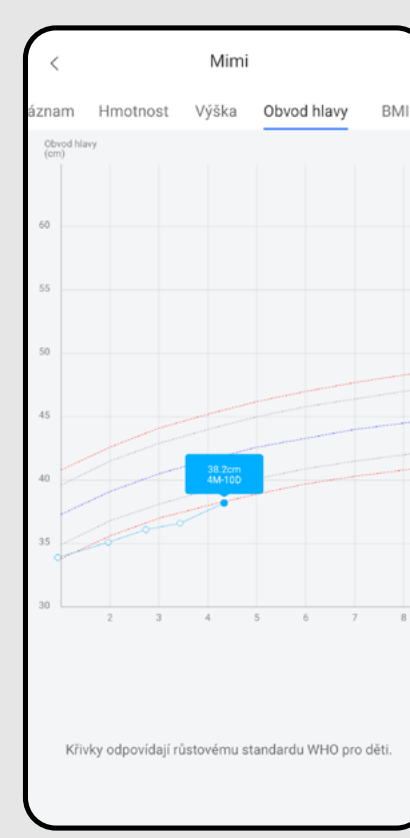5



- Dalším sledovaným parametrem je "**Obvod hlavy**".

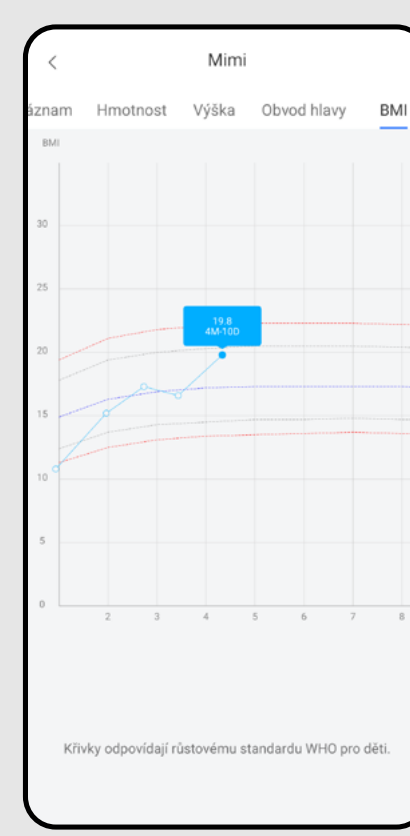
6



- Dalším sledovaným parametrem je "**BMI**".


7. SDÍLENÍ VÝLEDKŮ

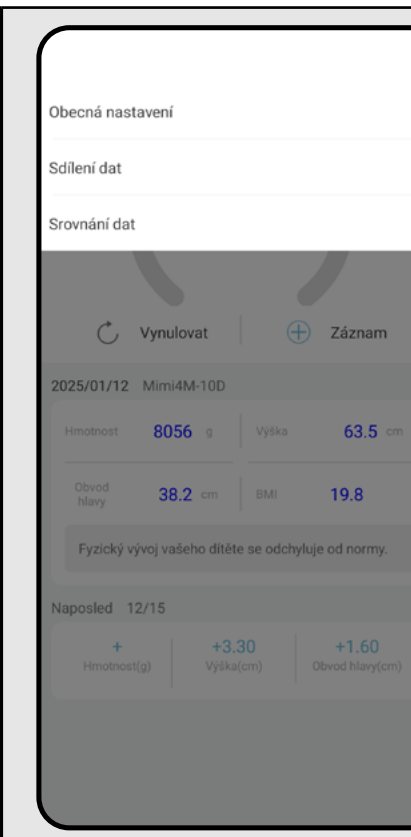1




- Na hlavní obrazovce klikněte na ikonu "..." v pravém horním rohu.
- Zobrazí se nabídka nastavení, kde máte 2 základní možnosti zobrazení a sdílení výsledků:
A) **Sdílení dat**
B) **Srovnání dat**

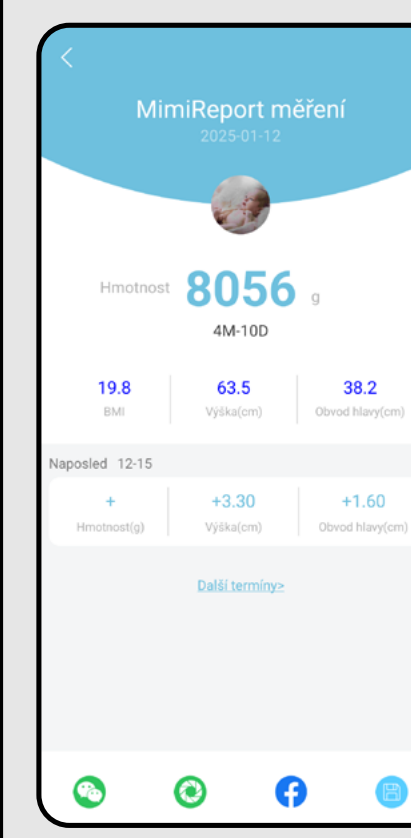2






- Sdílení dat**
- Jedná se o jednoduchý záznam konkrétního měření. Kliknutím na "**Další termíny**" přejdete na seznam měření seřazených dle data. Kliknutím na konkrétní měření zobrazíte report.
 - Report lze dále sdílet pomocí aplikace Facebook, nebo kliknutím na ikonu diskety stáhnutím do úložiště zařízení, kde lze s daným snímkem dále pracovat v různých dalších aplikacích.
- Poznámka**
- Zelené ikony patří aplikaci WeChat, kterou v Evropě nedoporučujeme používat.

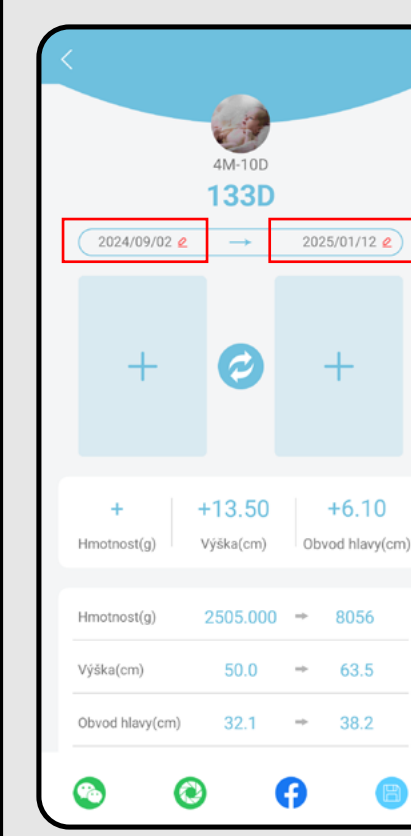3






- Srovnání dat**
- Jedná se o jednoduchý záznam konkrétního měření. Kliknutím na ikony datumů měření přejdete na seznam měření seřazených dle data. Kliknutím na konkrétní měření jej zvolíte. Učiňte tak pro datum na levé i pravé straně.
 - Vlevo zvolte starší měření, vpravo novější. Report vytvoří porovnání těchto dvou měření a zobrazí rozdíly.
 - Pod pole s daty lze přidat fotografie z daného období pro lepší vizuální kontrast změny.
 - Způsob sdílení je shodný s bodem výše.

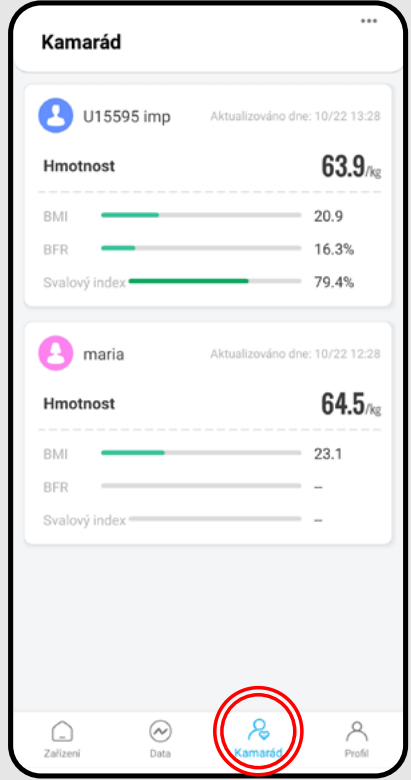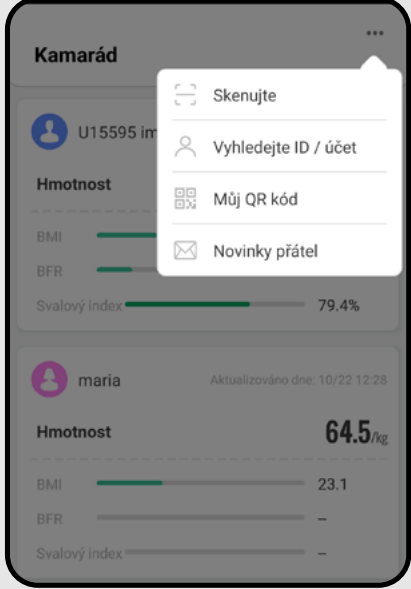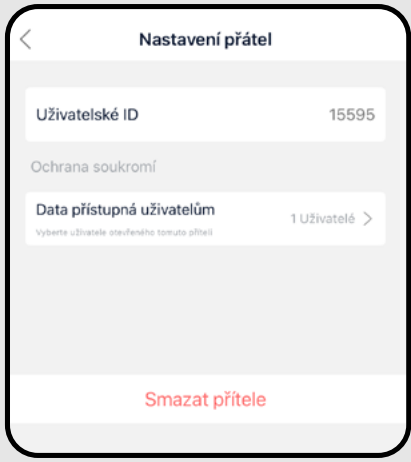8. KAMARÁD - SDÍLENÍ MĚŘENÍ



| | | |
|---|---|--|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> Vedle možnosti sdílet vlastní výsledky umožňuje aplikace také vzájemné propojení uživatelských účtů AiLink. Tímto způsobem můžete nahlížet do výsledků osoby, se kterou jste spojeni a naopak - ona osoba uvidí vaše výsledky. Příklad: na ilustraci vlevo vidíte, že aktuální profil sdílí své výsledky s uživatelem „imp“. Uživatel IMP obsahuje více profilů, rozhodl se však sdílet pouze svůj hlavní profil a profil uživatele „maria“. |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> Pro přidání nového přítele je nutné, aby jeden z účtů vstoupil do části „Kamarád“ a klikl na „...“. Následně máte k dispozici 2 možnosti: <ol style="list-style-type: none"> Pomocí možnosti „Skenujte“ lze z vašeho telefonu nascanovat QR kód, který obdržíte od druhého účtu, se kterým chcete data sdílet. QR kód získáte tak, že na telefonu druhého účtu kliknete na možnost „Můj QR kód“, tento QR kód nascanujete a potvrďte sdílení profilů. Pomocí možnosti „Vyhledejte ID / účet“ zadejte e-mail účtu druhého účtu a potvrďte. Jakmile pošlete druhé straně žádost, zobrazí se jí v aplikaci upozornění v sekci „Kamarád“, u ikony se zobrazí jedna ze zobrazených červených značek (👤/👤). Poté zvolte „...“, přejděte na „Novinky přátel“ a potvrďte přijetí žádosti. <p>Poznámka Účet, který žádost odesílá i účet, který žádost přijímá, si při odeslání/přijetí žádosti může zvolit, jaké své podprofily bude sdílet druhé straně.</p> |
| 3 |  | <ul style="list-style-type: none"> Pokud chcete změnit nějaké parametry u sdíleného účtu (např. jméno účtu, smazání sdílení, změna sdílených podprofilů), klikněte v sekci „Kamarád“ na daný profil a následně na ikonu nastavení „⚙“. |

9A. NASTAVENÍ - OBECNÁ část

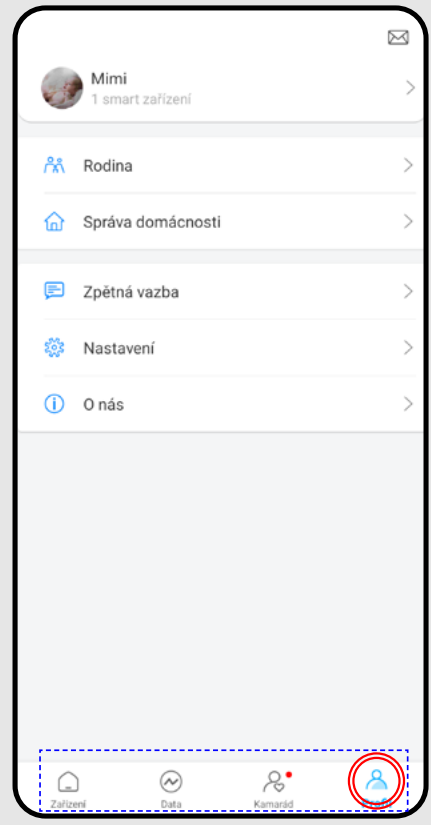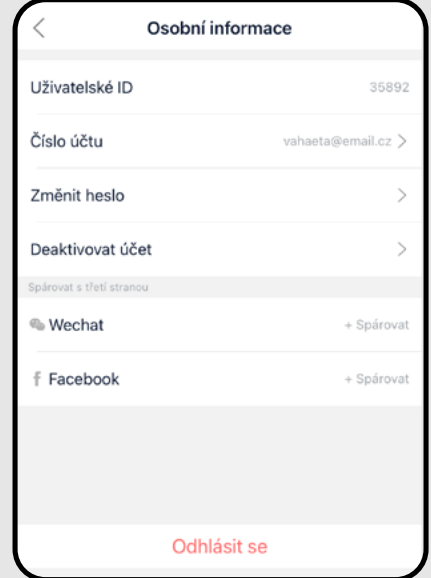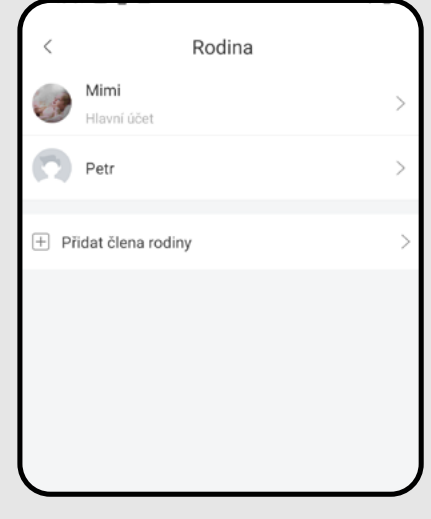
Aplikace Vám umožňuje 2 základní možnosti nastavení. Nastavení v rámci obecné části aplikace (která je společná pro správu všech výrobků, které se v aplikaci používají) a nastavení v rámci aplikační části určené pro váhu ETA. Některá nastavení se v obou případech překrývají, některá jsou specifická.


| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> V obecné části lze nastavit: <ol style="list-style-type: none"> Úprava hlavního profilu (viz níže 9A-2) Správa profilů (viz níže 9A-3) Správa domácnosti - Správa domácností, místností a s nimi spojenými produkty. Pro účely používání pouze váhy ETA je tato funkce zbytečná. Zpětná vazba - Lze napsat vývojářům aplikace. Toto pole spíše nepoužívejte. Doporučujeme použít formulář přímo z aplikační části viz 9B-2! Nastavení - Možnost přepnutí jazyka aplikace a zobrazení připojených zařízení. O nás - Zobrazí verzi aplikace a možnost nahlédnout do smluvních podmínek aplikace. |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> Po kliknutí na ikonu profilu (👤) přejdete do nastavení profilu. Lze zde zjistit ID účtu, změnit heslo, nebo deaktivovat účet. Možnosti aplikací třetích stran (WeChat, Facebook) v této části aplikace slouží pouze pro informaci, zda jste přihlášení k účtu pomocí těchto služeb. |
| 3 |  | <ul style="list-style-type: none"> Sekce „Rodina“ umožňuje jednoduchou správu profilů. V nabídce vidíte jak hlavní profil, tak všechny vytvořené podprofily. Po rozkliknutí daného profilu můžete měnit základní informace (foto, přezdívká, narozeniny, pohlaví) případně můžete profil vymazat. Pro vytvoření nového podprofilu klikněte na „Přidat člena rodiny“. |

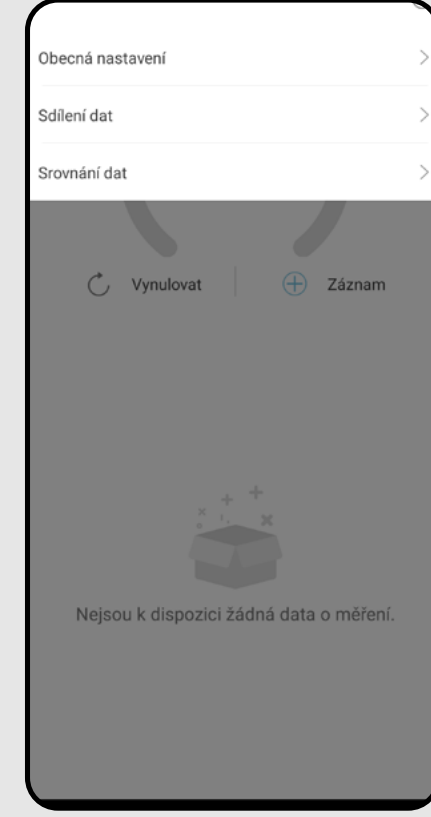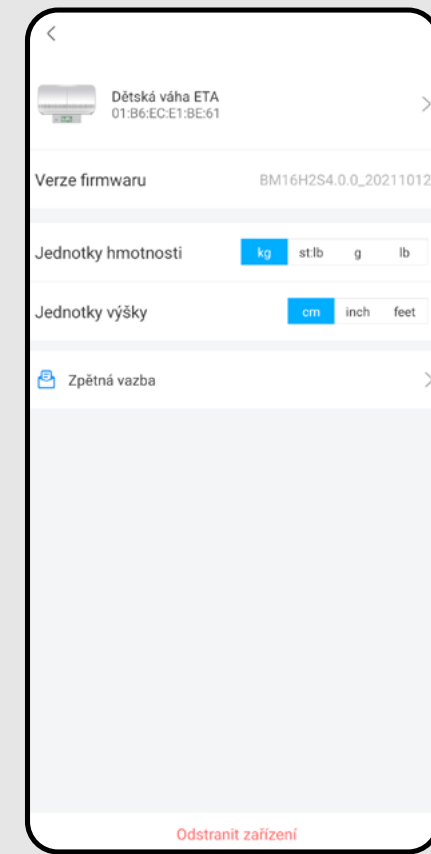9B. NASTAVENÍ - APLIKAČNÍ část


| | | |
|---|--|---|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> Na hlavní obrazovce klikněte na ikonu „...“ v pravém horním rohu. Klikněte na „Obecná nastavení“. |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> V aplikační části lze nastavit jednotky hmotnosti a výšky. Zkontrolujte verzi firmwaru, přejmenovat váhu a poslat zpětnou vazbu vývojáři. Využívejte nejlépe tuto možnost (raději než pole v obecné části nastavení). V dolní části obrazovky pak najdete možnost „Odstranit zařízení“, kterým zařízení smažete (zrušíte párování). |



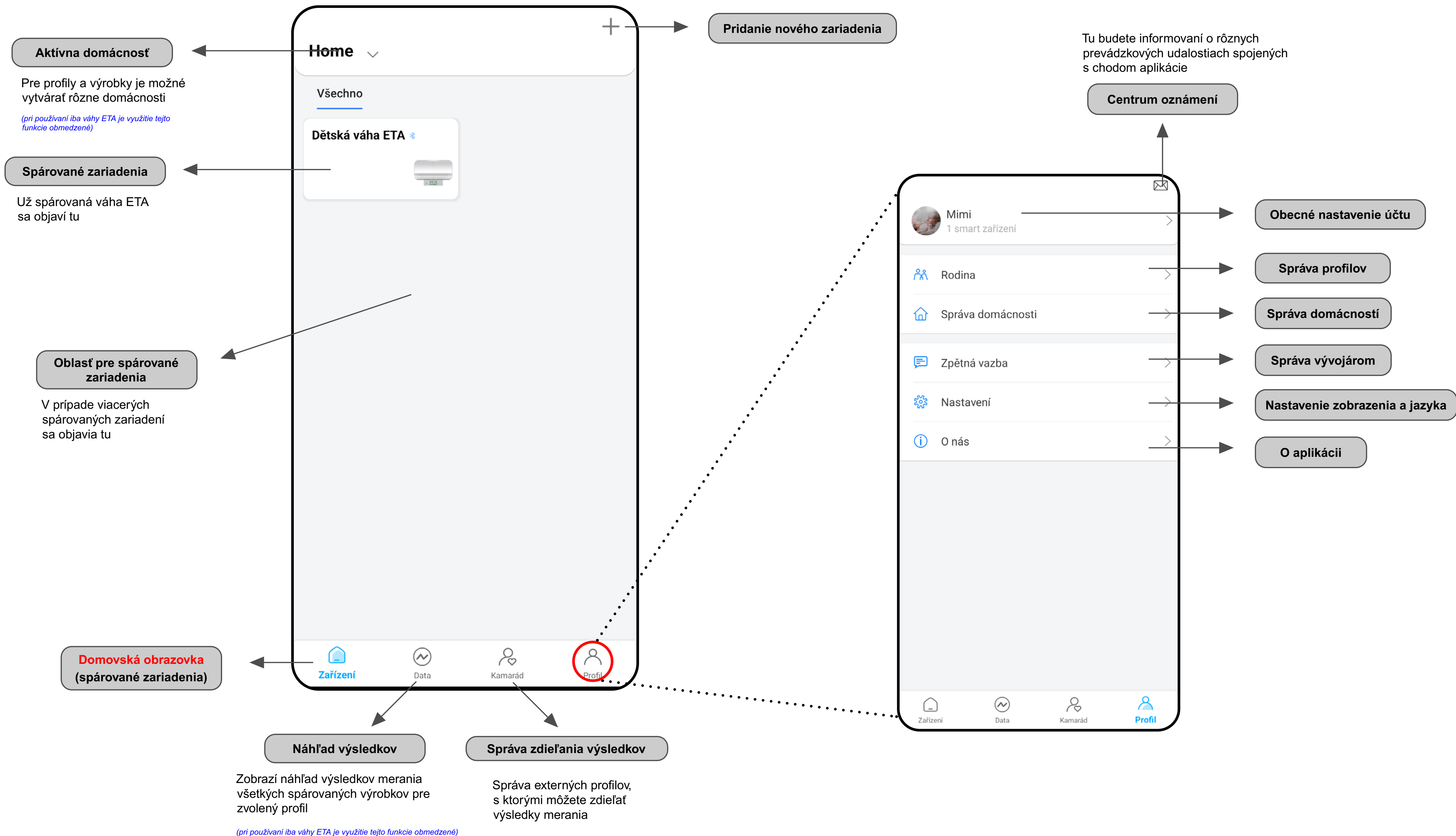

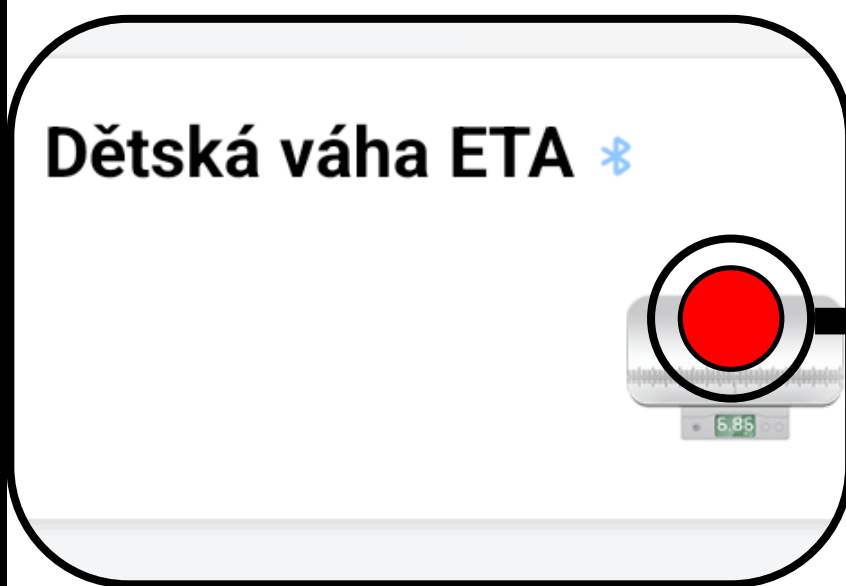

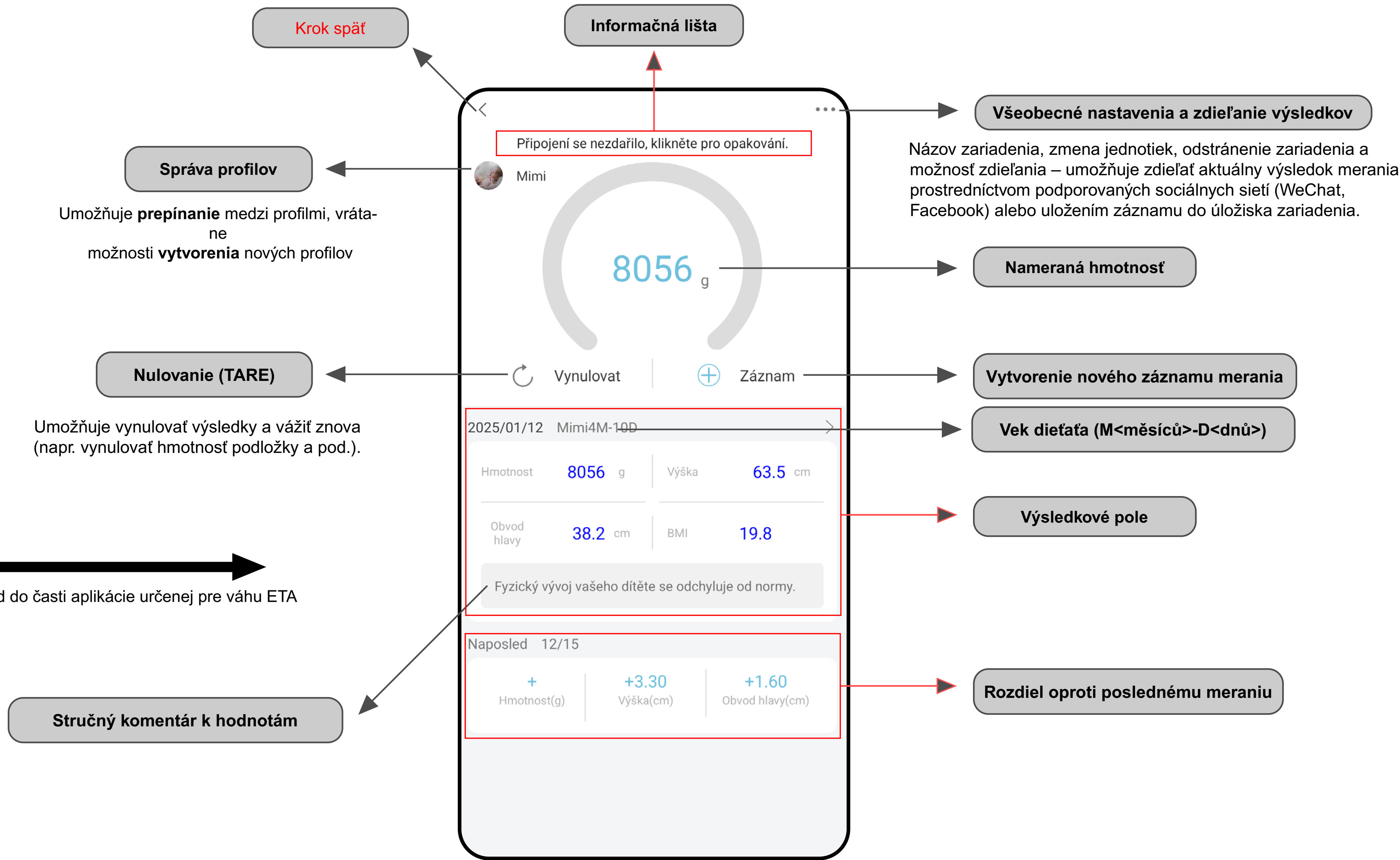Prechod do časti aplikácie určenej pre váhu ETA



Vážený zákazník,

Ďakujeme za Vašu dôveru v produkty značky ETA. Táto príručka je určená všetkým majiteľom váhy ETA7306, ktorí chcú naplno využiť jej potenciál pomocou aplikácie AILINK.

Ďalšie informácie, rady a tipy k Vašej váhe nájdete tiež na našich webových stránkach:

www.eta.cz/osobnipece

Tieto webové stránky neustále aktualizujeme a zhromažďujeme tu najnovšie poznatky o danom výrobku.

V prípade otázok k funkciám aplikácie, alebo v prípade akýchkoľvek problémov najprv prejdite na vyššie uvedené webové stránky a ak ani informácie tam uvedené nepomôžu vašu žiadosť vyriešiť, môžete nás kontaktovať na informačnom e-maili: apps@eta.cz

1. INŠTALÁCIA APLIKÁCIE

Aplikáciu nájdete v databáze aplikácií Apple Store či Google Play, alebo môžete pre urýchlenie použiť nasledujúci QR kód:




Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte do Vášho mobilného telefónu (tabletu).

KOMPATIBILITA

| | |
|--|---|
| Operačný systém mobilného telefónu (tabletu) | Android 8.0 a vyšší IOS 11.0 a vyšší |
|--|---|


2. REGISTRÁCIA ÚČTU A PRIHLÁSENIE

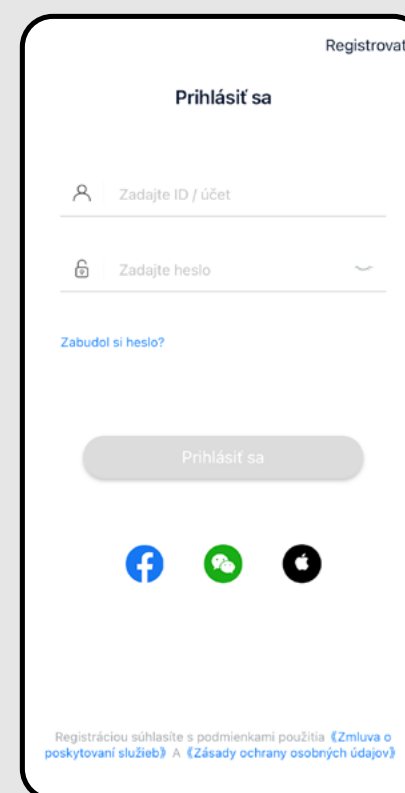1




- Hneď ako si aplikáciu stiahnete, zapnite ju. Objaví sa základná obrazovka umožňujúca prihlásenie.
- Obrazovka tiež umožňuje prepnutie na registráciu nového účtu, obnovenie hesla v prípade jeho straty, alebo prihlásenie pomocou aplikácie tretích strán.
- Ak nemáte vytvorený účet, pokračujte na „**Registrovať**“ (prípadne sa prihláste aplikáciou tretej strany).
- Pre prihlásenie zadajte názov svojho účtu (e-mail) a heslo, potom kliknite na „**Prihlásiť sa**“. V prípade OS Android musíte pred prihlásením odkliknúť pole súhlasu s podmienkami použitia v ľavom dolnom rohu.

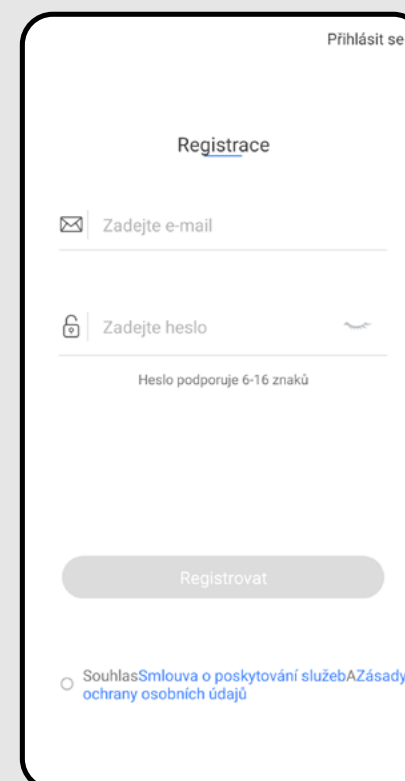2



- Zadajte platnú e-mailovú adresu a zvolte si bezpečné heslo.
- Potvrďte súhlas s poskytovaním služieb a zásadami a proces potvrďte kliknutím na „**Registrovať**“.

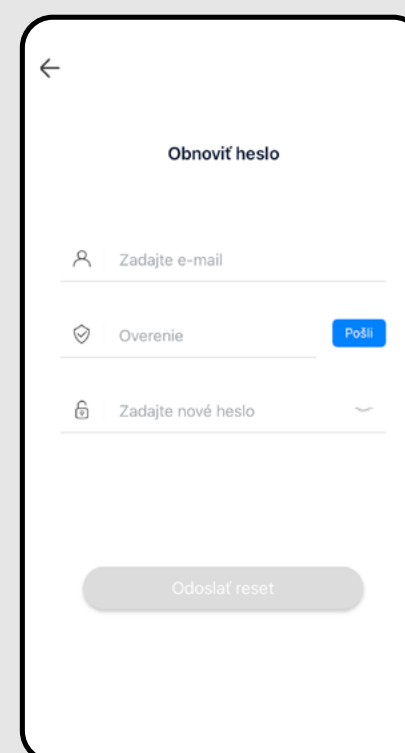3



- V prípade straty hesla je možné ho obnoviť prostredníctvom e-mailovej adresy použitej na založenie účtu.
 - Zadajte daný e-mail a hneď ako dostanete overovací kód, zadajte ho do príslušného poľa.
- Pozn. Overovaciemu kódu môže nejakú dobu trvať, kým dorazí. Buďte prosím trpezlivý. Zároveň skontrolujte, či kód neblokuje spamový kód/filter vášho poštového klienta. V ideálnom prípade používajte bežné e-mailové adresy/klienty (napr. gmail, zoznam a pod.).**

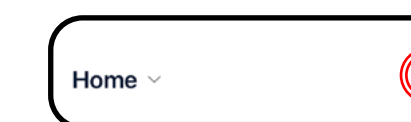
3. PÁROVANIE ZARIADENÍ

1



- Po úspešnom prihlásení sa vám objaví východisková obrazovka, v tomto prípade bez spárovaného zariadenia.
- Pre spárovanie aplikácie s váhou kliknite na „**Pridať zariadenie**“.

* V prípade, že máte nejaké zariadenie už spárované, využite v pravom hornom rohu ikonu „+“, ktorá rovnakým spôsobom umožní pridať ďalšie zariadenie.




2



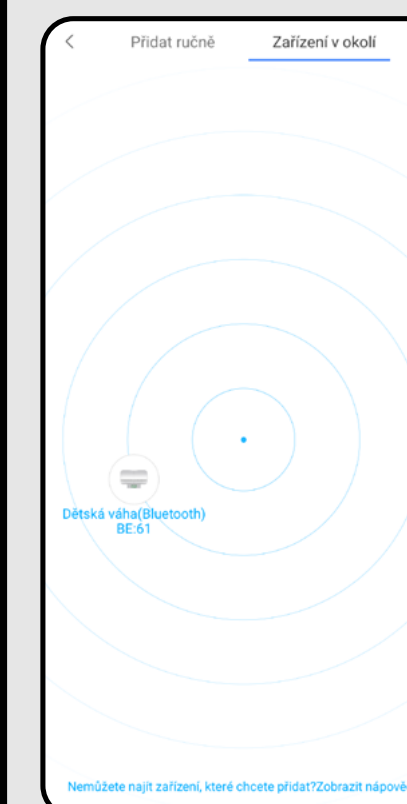
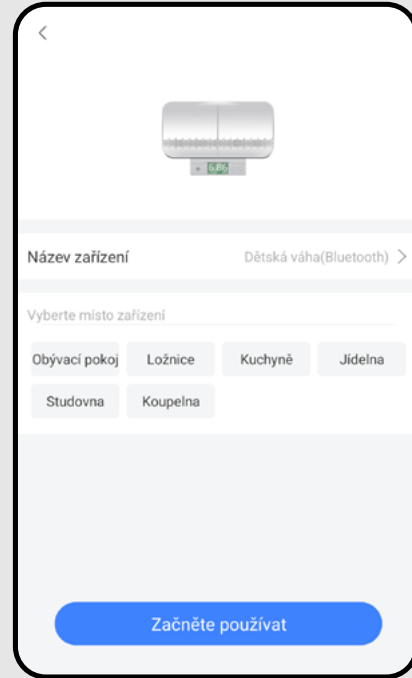
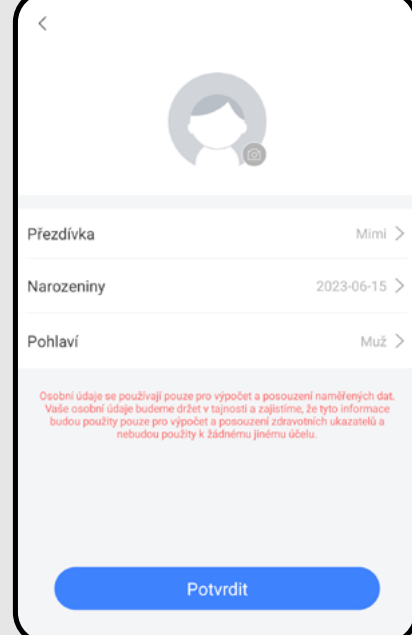
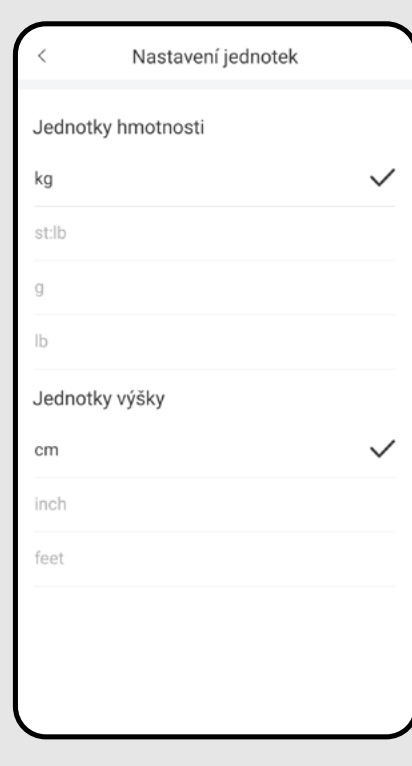
- Objaví sa zoznam rôznych druhov zariadení, pre ktoré je aplikácia určená.

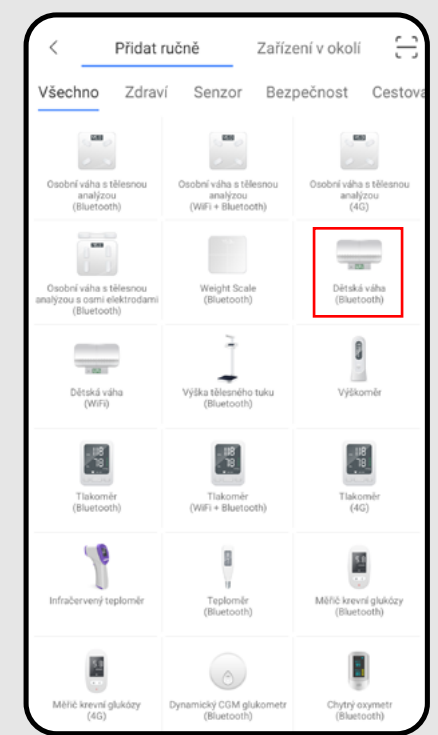

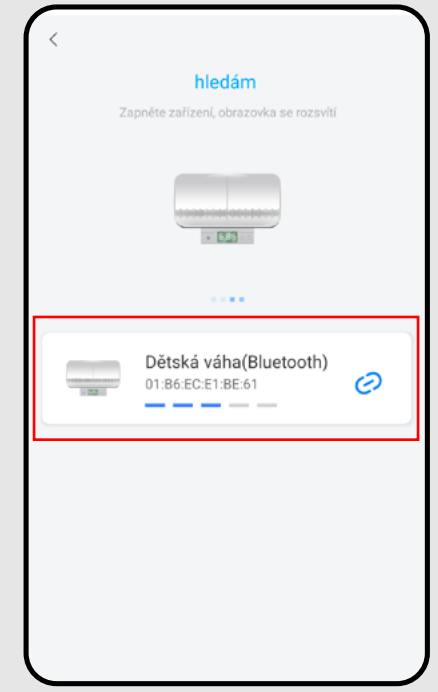
Poznámka: Spoločnosť ETA využíva aplikáciu iba pre váhu ETA7306 a ETA8781. Žiadne ďalšie zariadenie v aplikácii uvedené nie je v tejto chvíli podporované.

3



- Najlepším spôsobom je automatické vyhľadanie zariadenia, na ktoré prejdete kliknutím na „**Zariadenia v okolí**“.
- Začne sa automaticky vyhľadávať zariadenie v najbližšom okolí.
- Váhu zapnite stlačením spínacieho tlačidla.
- Hneď ako sa váha objaví v aplikácii, kliknite na jej ikonu.

| | | |
|---|---|--|
| 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> Spustí sa proces párovania. |
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> V ďalšom kroku aplikácia ponúkne možnosť pridať vlastný názov váhy a váhu priradiť a kategorizovať podľa miestnosti, v ktorej sa bude používať. Pre potvrdenie kliknite na „Začnite používať“. <p style="text-align: center;">Poznámka</p> <p>Funkcia kategorizácie produktov podľa miestností má zmysel skôr pri používaní viacerých produktov, ktoré aplikácia podporuje. V našom prípade (iba použitie váhy ETA) túto funkciu nemusíte používať.</p> |
| 6 |  | <ul style="list-style-type: none"> Ak je to vaše prvé prihlásenie, aplikácia vás môže vyzvať na vytvorenie profilu. Na používanie detskej váhy musí byť profil vytvorený pre dieťa – teda s jeho dátumom narodenia a pohlavím. Ak by bol profil vytvorený s dátumom narodenia ďaleko v minulosti, aplikácia by nefungovala správne a nezobrazovala všetky možnosti. |
| 7 |  | <ul style="list-style-type: none"> V poslednom kroku nastavenia zariadenia vám bude ponúknutá možnosť nastavenia jednotiek hmotnosti a výšky. Na potvrdenie kliknite na „OK“. <p style="text-align: center;">Poznámka</p> <p>Na zrušenie párovania alebo vymazanie zariadenia to vykonajte v sekcii nastavení, viď 9B-2.</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 8 |  | <ul style="list-style-type: none"> Druhým spôsobom je manuálne párovanie. V zozname zariadení vyberte "Dětská váha (Bluetooth)". |
| 9 |  | <ul style="list-style-type: none"> Kliknite na "Další". |
| 10 |  | <ul style="list-style-type: none"> Zapnite váhu, ktorá automaticky začne vysielat signál, ktorý zachytí váš mobilný telefón. Potvrďte kliknutím na vyhladané zariadenie. Ďalšie kroky sú rovnaké ako pri automatickom párovaní (od kroku 3.5). |

4. ZÁKLADNÉ RADY A TIPY NA POUŽITIE

Používanie váhy ETA s aplikáciou AiLink je intuitívne a počas nášho testovania sme nezaznamenali žiadne výrazné problémy, na ktoré by ste mohli pri používaní naraziť. Napriek tomu majú smart výrobky obecné zvýšené riziko spojené s nekompatibilitou mobilných zariadení, alebo napr. problémy s bezdrôtovou konektivitou. Preto prinášame súbor základných rád a odporúčení, ako prípadné problémy charakteristické pre segment smart výrobkov vyriešiť.

1. Smart zariadenia (mobil, príp. tablet):

- a) používajte vždy aktuálnu verziu aplikácie stiahnutú z oficiálnych zdrojov
- b) uistite sa, že vaše zariadenia obsahujú podporované verzie Android a iOS.
- c) majte aktívnu funkciu Bluetooth
- d) majte aktívne internetové spojenie pre správnu komunikáciu aplikácie s cloudovým serverom
- e) aplikácii povoľte požadované oprávnenia, ktoré sú v niektorých prípadoch závislé na type operačného telefónu.
V prípade problémov skontrolujte, či nemáte v rámci napr. vášho telefónu nejaké nadradené systémové nastavenie, ktoré zabraňuje aplikácii používať niektoré oprávnenia - v takom prípade musíte aplikácii udeliť výnimku.
- f) komunikáciu váhy a telefónu môžu narúšať niektoré programy (napr. VPN, firewall a pod.), ktoré používate v telefóne. V prípade problémov s párovaním, alebo s bežnou prevádzkou tieto programy vypnite.
- g) v prípade problémov vyskúšajte párovanie s iným telefónom, tým vylúčite problém v danom telefóne.

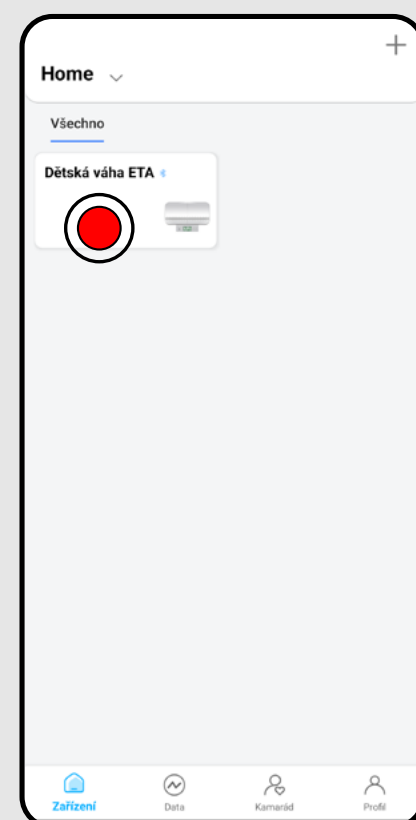
2. Jednotka váhy

Vždy sa uistite, že používate dostatočne nabitú batériu. Slabé batérie môžu negatívne ovplyvniť funkciu spojenia prostredníctvom Bluetooth, alebo samotný proces merania. V niektorých prípadoch sa môže tiež stať, že batérie, ktoré boli dodané spolu s výrobkom, môžu mať vplyvom skladovania a prepravy zníženú kapacitu, preto je vhodné pri prípadných problémoch vyskúšať batérie nové.

- Vyskúšajte založenie nového účtu, tým vylúčite problém s chybnou aktiváciou účtu;
- V priebehu párovania a používania udržiavajte vaše smart zariadenie v blízkosti váhy (najlepšie do vzdialenosti cca 2 m).


5. VÁŽENIE

1




- Po zapnutí aplikácie a úspešnom spárovaní kliknite na pole/ikonu spárovanej váhy.
- Tým prejdete z obcej časti aplikácie do časti pre ovládanie a správu samotnej váhy.

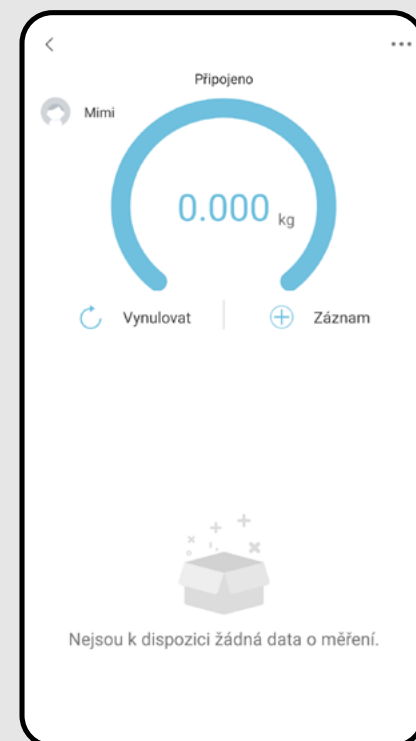2




- Zobrazí sa základná obrazovka meraní.
- Kliknutím na ikonu profilu v ľavom hornom rohu si zvolíte profil (ak ich máte viac).
- Váhu zapnite a vyčkajte, kým sa váha s aplikáciou spojí – informačná lišta zobrazí hlášku „**Pripojené**“.
- Po zapnutí sa zariadenie automaticky pripojí. Ak informačná lišta zobrazí hlášku „**Pripojení se nezdařilo...**“, kliknite na toto oznámenie a spojenie sa obnoví. Váha však musí byť zapnutá.
- Pred samotným vážením zmerajte dieťaťu jeho aktuálnu výšku a obvod hlavičky – tieto hodnoty je možné (voliteľne) pridať k hodnote hmotnosti.

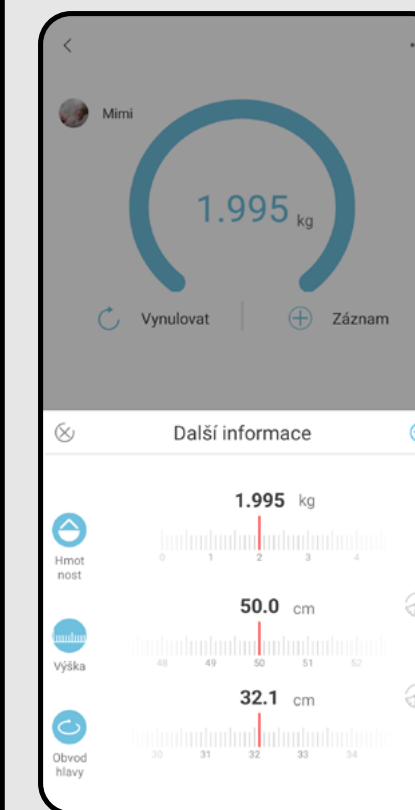3



- Teraz môžete začať praktické váženie – postupujte podľa návodu na obsluhu, ktorý bol priložený k váhe.
- Po zvážení sa dáta automaticky prenesú do aplikácie a zobrazí sa obrazovka s možnosťou doplniť výšku a obvod hlavičky dieťaťa. Tieto parametre zistíte pred samotným vážením a v tomto kroku ich doplňte.
- Ak nechcete zadávať výšku alebo obvod, kliknite na ikonu "🚫" na pravej strane daného parametra.
- Záznam vytvoríte kliknutím na "✔️".

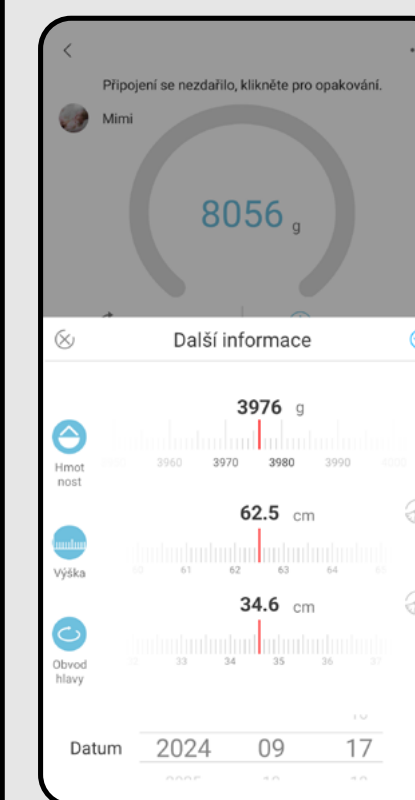4







- Výsledky merania je možné vložiť aj ručne. Ak chcete vytvoriť záznam merania bez aktuálneho váženia, na hlavnej obrazovke stlačte „**Záznam**“ a hodnoty vložte ručne, vrátane dátumu, ku ktorému sa tieto hodnoty vzťahujú.
- Takto je možné pridávať hodnoty aj spätne.

POZNÁMKY



- Ak zlyhalo pripojenie váhy, uistite sa, že máte na telefóne aktívny Bluetooth, potom kliknite pre opätovné pripojenie na text v informačnej lište. Prípadne si prečítajte inštrukcie v kapitole 3.
- V prípade, že meranie či analýza zlyhala, skúste celý proces váženia/merania zopakovať. Prípadne si prečítajte inštrukcie v kapitole 4.
- Akonáhle je záznam vytvorený, nie je možné spätne upraviť alebo pridať sledované parametre. Môžete však manuálne vložiť nový záznam, ktorým nahradíte neúplné meranie (vrátane výberu spätného dátumu).
- Ak sa dieťa neustále hýbe a hodnota sa neustáli, skúste v aplikácii stlačiť „**Záznam**“ (v okamihu, keď je pohyb najmenší) na vynútené ustálenie výsledku merania.
- Záznamy obsahujú stručné slovné hodnotenie vývoja dieťaťa podľa rastových štandardov WHO. Tieto hodnotenia a štandardy sú orientačné a nemožno z nich vyvodzovať žiadne zdravotnícke závery.

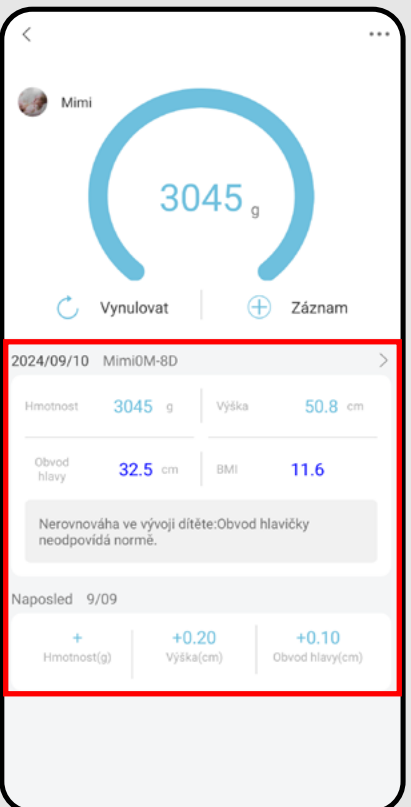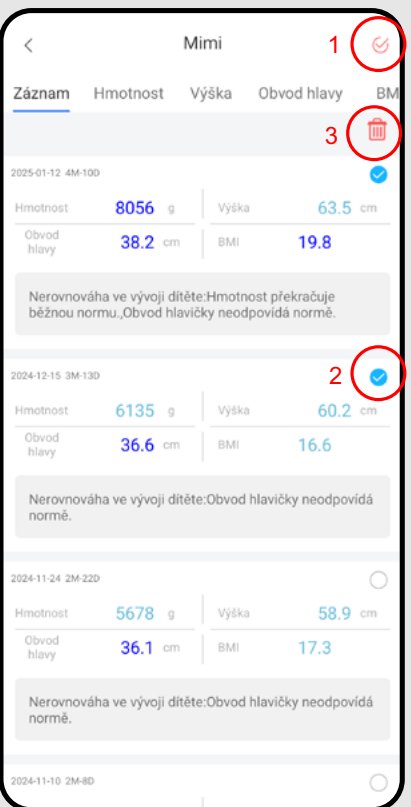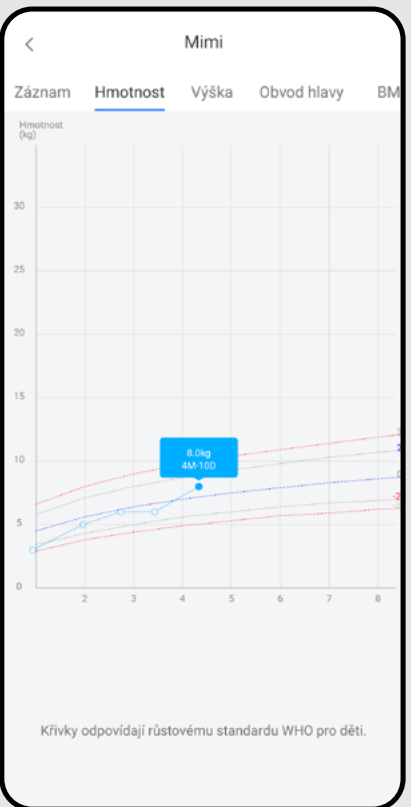6. ZOBRAZENIE VÝSLEDKOV




| | | |
|----------|---|---|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> Kliknite na jeden zo záznamov na hlavnej obrazovke. Tým prejdete do sekcie evidencie záznamov meraní a grafického zobrazenia výsledkov meraní. Scrollovaním môžete prehliadať jednotlivé záznamy. Záznamy tiež obsahujú stručný textový komentár vývoja dieťaťa. |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> Ak chcete nejaký záznam vymazať, kliknite na ikonu ceruzky v pravom hornom rohu (1). Potom kliknutím vyberte záznam alebo viacero záznamov (2), ktoré chcete vymazať. Nakoniec potvrdte výber kliknutím na ikonu koša v pravom hornom rohu (3). Proces ukončíte potvrdením kliknutím na "OK". |
| 3 |  | <ul style="list-style-type: none"> Kliknutím na jednotlivé parametre sledovaných meraní v hornej lište prejdete na ich grafické zobrazenie. V grafe sú znázornené aj rastové krivky WHO, ktoré ukazujú približný vývoj v rámci týchto štandardov. Najprv je k dispozícii graf pre "Hmotnosť". |
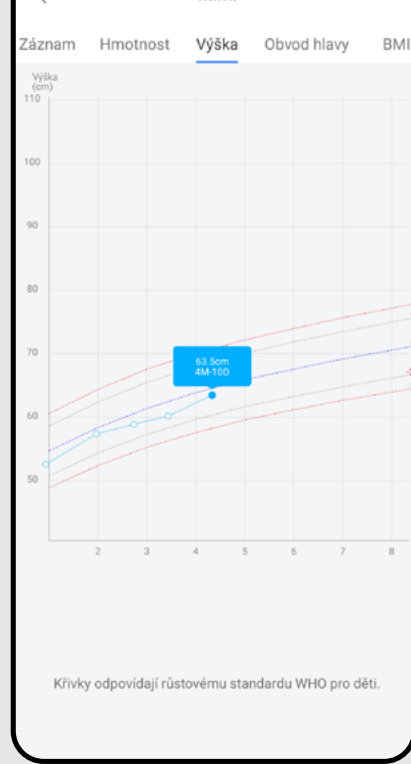
| | | |
|----------|---|---|
| 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> Ďalším sledovaným parametrom je "Výška". |
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> Ďalším sledovaným parametrom je "Obvod hlavy". |
| 6 |  | <ul style="list-style-type: none"> Ďalším sledovaným parametrom je "BMI". |

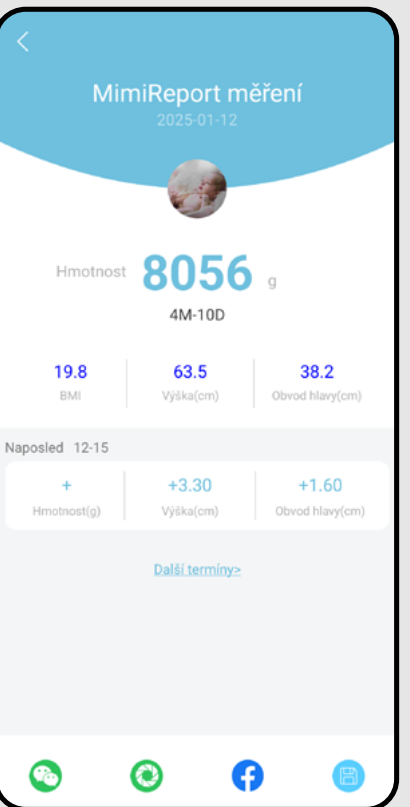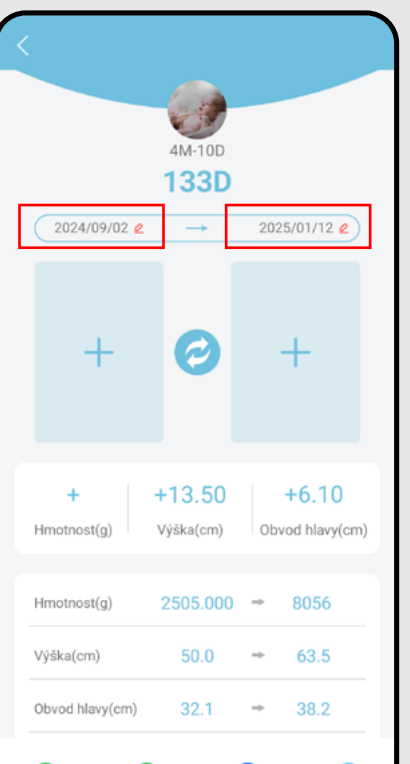7. ZDIEĽANIE VÝSLEDKOV




| | | |
|----------|---|---|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu "..." v pravom hornom rohu. Zobrazí sa ponuka nastavení, kde máte dve základné možnosti zobrazenia a zdieľania výsledkov: <ul style="list-style-type: none"> A) Sdílení dat B) Srovnání dat |
| 2 |  | <p style="text-align: center;">Sdílení dat</p> <ul style="list-style-type: none"> Ide o jednoduchý záznam konkrétneho merania. Kliknutím na "Další termíny" prejdete na zoznam meraní zoradených podľa dátumu. Kliknutím na konkrétne meranie zobrazíte report. Report je možné zdieľať prostredníctvom aplikácie Facebook alebo stiahnuť do úložiska zariadenia kliknutím na ikonu diskety. Následne môžete s daným snímkom ďalej pracovať v rôznych iných aplikáciách. <p style="text-align: center;"><u>Poznámka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Zelené ikony patria aplikácii WeChat, ktorú v Európe neodporúčame používať. |
| 3 |  | <p style="text-align: center;">Srovnání dat</p> <ul style="list-style-type: none"> Ide o jednoduchý záznam konkrétneho merania. Kliknutím na ikony dátumov meraní prejdete na zoznam meraní zoradených podľa dátumu. Kliknutím na konkrétne meranie ho vyberiete. Urobte tak pre dátum na ľavej aj pravej strane. Naľavo zvolte staršie meranie, napravo novšie. Report vytvorí porovnanie týchto dvoch meraní a zobrazí rozdiely. Pod políčka s dátumami je možné pridať fotografie z daného obdobia pre lepší vizuálny kontrast zmien. Spôsob zdieľania je rovnaký ako v predchádzajúcom bode. |

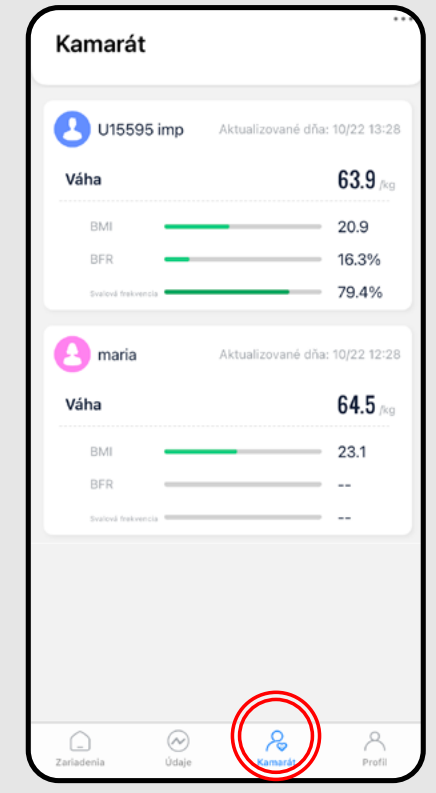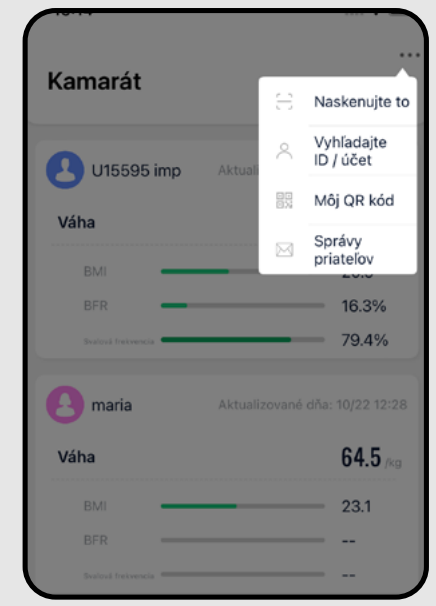8. KAMARÁT - ZDIEĽANIE MERANÍ



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Popri možnosti zdieľať vlastné výsledky umožňuje aplikácia tiež vzájomné prepojenie užívateľských účtov AiLink. • Týmto spôsobom môžete nazrieť do výsledkov osoby, s ktorou ste spojení a naopak – táto osoba uvidí vaše výsledky. • Príklad: na ilustrácii vľavo vidíte, že aktuálny profil zdieľa svoje výsledky s užívateľom „imp“. Užívateľ IMP obsahuje viac profilov, rozhodol sa však zdieľať iba svoj hlavný profil a profil užívateľa „maria“. |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Pre pridanie nového priateľa je nutné, aby jeden z účtov vstúpil do časti „Kamarát“ a klikol na „...“. Následne máte k dispozícii 2 možnosti: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pomocou možnosti „Naskenujte to“ je možné z vášho telefónu naskenovať QR kód, ktorý dostanete od druhého účtu, s ktorým chcete dáta zdieľať. QR kód získate tak, že na telefóne druhého účtu kliknete na možnosť „Môj QR kód“, tento QR kód naskenujte a potvrdíte zdieľanie profilov. 2) Pomocou možnosti „Vyhľadajte ID / účet“ zadajte e-mail účtu druhého účtu a potvrdíte. • Hneď ako pošlete druhej strane žiadosť, zobrazí sa jej v aplikácii upozornenie v sekcii „Kamarát“, u ikony sa zobrazí jedna zo zobrazených červených značiek (👤/👤). Potom zvolte „...“, prejdite na „Správy priateľov“ a potvrdíte prijatie žiadosti. <p>Poznámka Účet, ktorý žiadosť odosiela, ako aj účet, ktorý žiadosť prijíma, si pri odoslaní/prijatí žiadosti môže zvoliť, aké svoje podprofily bude zdieľať druhej strane.</p> |
| 3 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Ak chcete zmeniť nejaké parametre u zdieľaného účtu (napr. meno účtu, zmazanie zdieľaní, zmena zdieľaných podprofilov), kliknite v sekcii „Kamarát“ na daný profil a následne na ikonu nastavení „⚙“. |

9A. NASTAVENIA - OBECNÁ časť

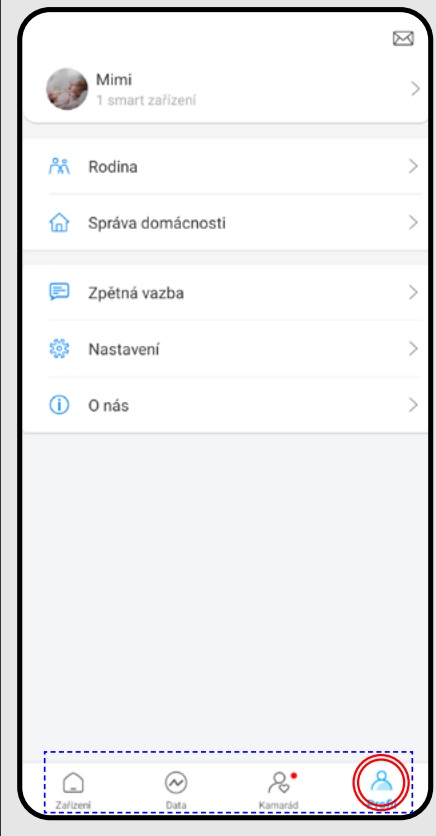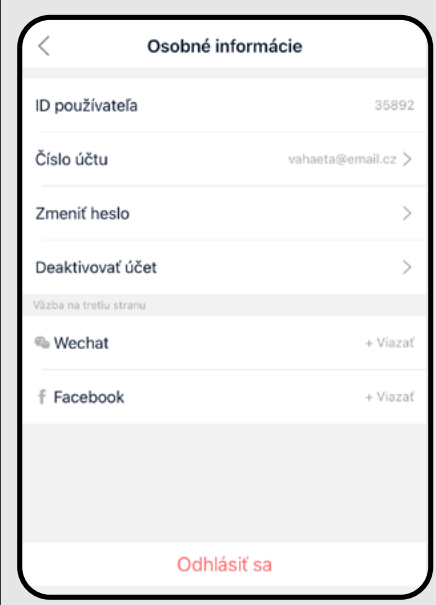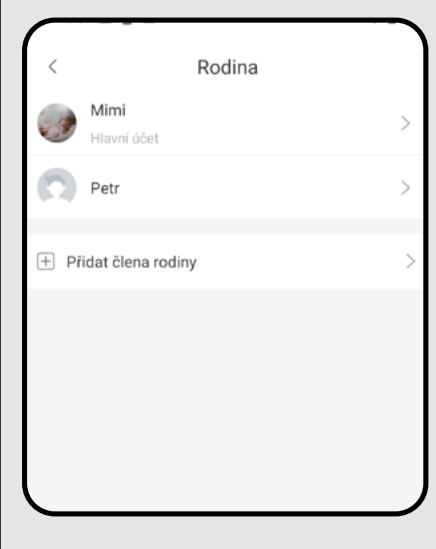
Aplikácia Vám umožňuje 2 základné možnosti nastavení. Nastavenie v rámci obcej časti aplikácie, (ktorá je spoločná pre správu všetkých výrobkov, ktoré sa v aplikácii používajú) a nastavení v rámci aplikačnej časti určenej pre váhu ETA. Niektoré nastavenia sa v oboch prípadoch prekrývajú, niektoré sú špecifické.


| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> • V obcej časti je možné nastaviť: <ol style="list-style-type: none"> a) Úprava hlavného profilu (viď nižšie 9A-2) b) Správa profilov (viď nižšie 9A-3) c) Správa domácnosti - Správa domácností, miestností a s nimi spojenými produktami. Pre účely používania iba váhy ETA je táto funkcia zbytočná. d) Spätná väzba - Je možné napísať vývojárom aplikácie. Toto pole skôr nepoužívajte. Odporúčame použiť formulár priamo v aplikačnej časti, viď. 9B-2)! e) Nastavenie - Možnosť prepnutia jazyka aplikácie a zobrazenia pripojených zariadení. f) O nás - Zobrazí verziu aplikácie a možnosť nahliadnuť do zmluvných podmienok aplikácie. |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Po kliknutí na ikonu profilu (👤) prejdite do nastavenia profilu. • Je možné tu zistiť ID účtu, zmeniť heslo, alebo deaktivovať účet. • Možnosti aplikácií tretích strán (WeChat, Facebook) v tejto časti aplikácie slúžia iba pre informácie, tu ste prihlásení k účtu pomocou týchto služieb. |
| 3 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Sekcia „Rodina“ umožňuje jednoduchú správu profilov. V ponuke vidíte ako hlavný profil, tak všetky vytvorené podprofily. • Po rozkliknutí daného profilu môžete meniť základné informácie (foto, prezývku, narodeniny, pohlavie), prípadne môžete profil vymazať. • Pre vytvorenie nového podprofilu kliknite na „Pridať člena rodiny“. |

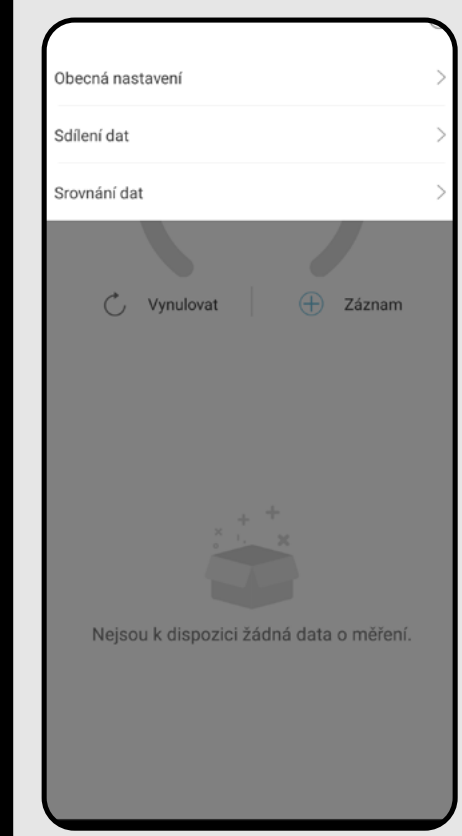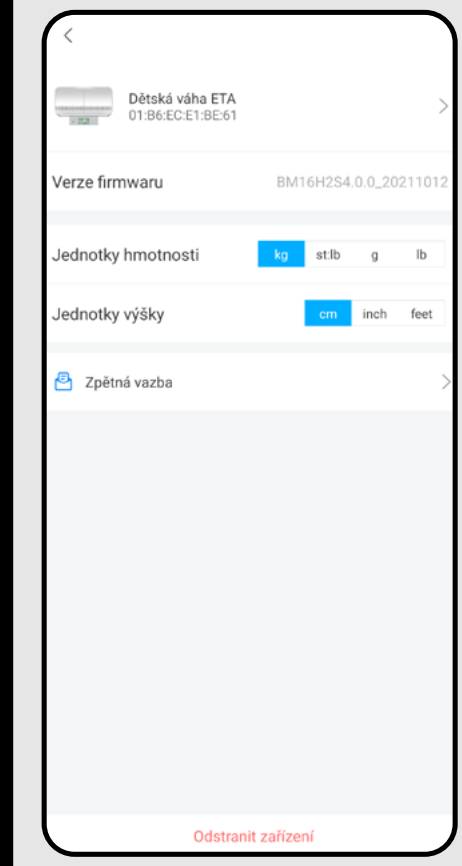9B. NASTAVENIA - APLIKAČNÁ časť

| | | |
|---|--|--|
| 1 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu „...“ v pravom hornom rohu. • Kliknite na „Obecná nastavení“. |
| 2 |  | <ul style="list-style-type: none"> • V aplikačnej časti je možné nastaviť jednotky hmotnosti a výšky, skontrolovať verziu firmvéru, premenovať váhu a poslať spätnú väzbu vývojárovi. Odporúča sa využiť túto možnosť (radšej než pole vo všeobecnej časti nastavení). • V dolnej časti obrazovky nájdete možnosť „Odstranit zařízení“, ktorou zariadenie vymažete (zrušíte párovanie). |



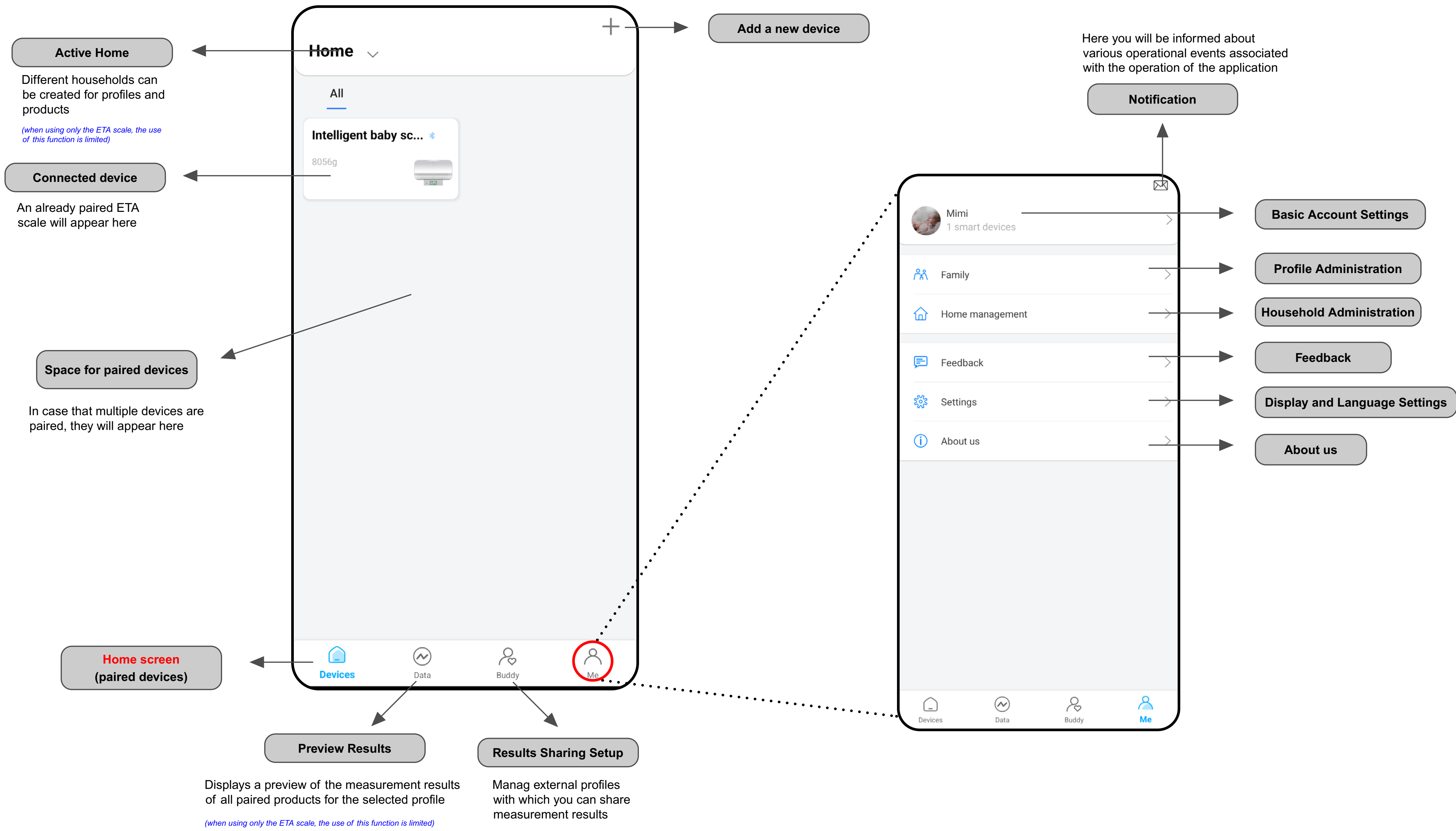

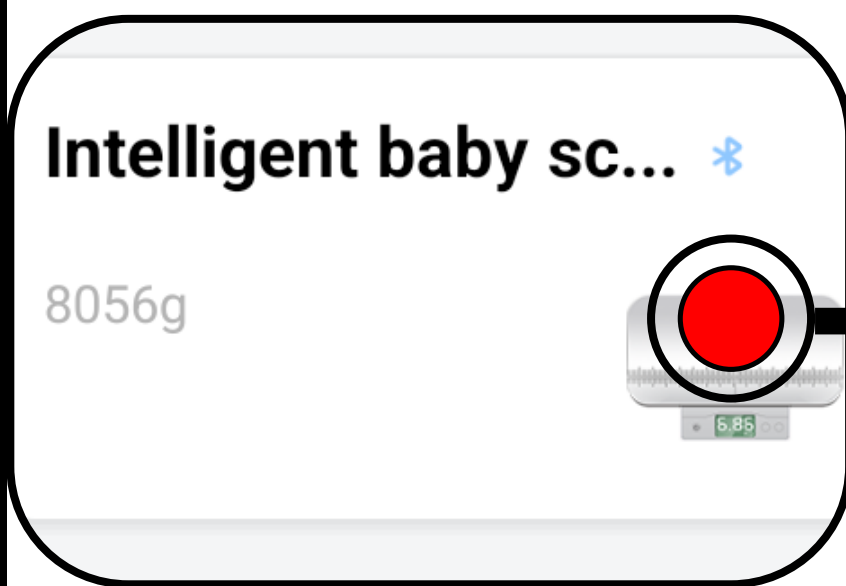

Pass into the part intended for ETA scales

Step back

Information Bar

Profile Administration

Allows you to switch between profiles, including the ability to create new profiles

General settings and sharing results

Device name, change units, delete device and share menu - allows you to share the current measurement result via supported social networks (WeChat, Facebook) or by saving the recording to the device storage

Measured Weight

Zero (TARE)

Allows you to reset results and reweigh (or reset pad weight, etc.)

Create a new measurement record

Age of child (M<months>-D<days>)



Result section

Brief commentary on the values

Difference from last measurement

USER MANUAL FOR THE AILINK APP

Dear customer,

Thank you for your trust in ETA product. This manual is intended for all owners of the ETA7306 scale who want to reach its full potential with the AILINK application.

In case of questions about the function of the application, or in case of any problems, first go to the above-mentioned website and even if the information provided there does not help you to solve your request, you can contact us at the information e-mail: info@etasince1943.com

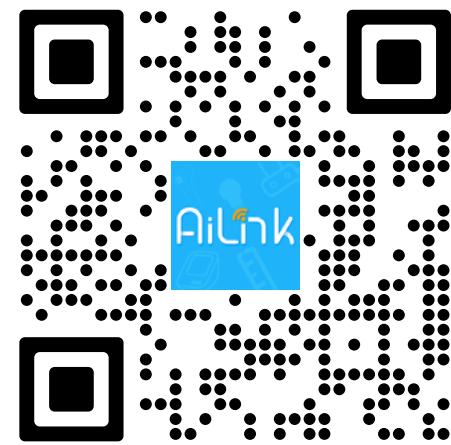
Further information, advice and tips can be found also on our websites:

www.etasince1943.com/care

We are constantly updating this website to gather the latest information about the product.

1. APPLICATION INSTALLATION

You can find this application in the database of Apple Store or Google Play, or can also use this QR code for quickening:



Download and install the application to your mobile phone (tablet).


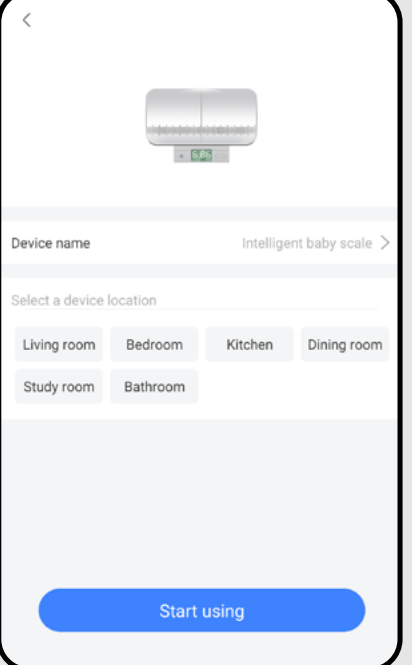
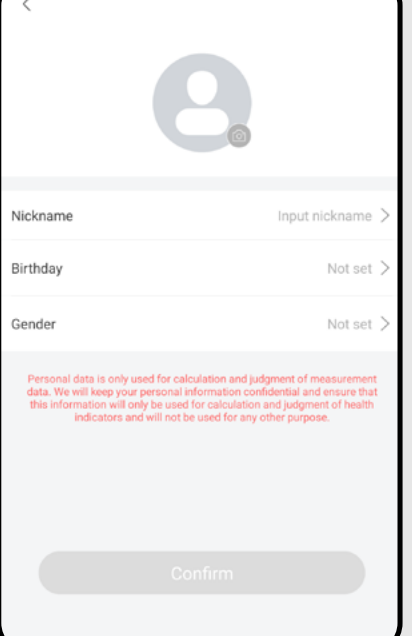
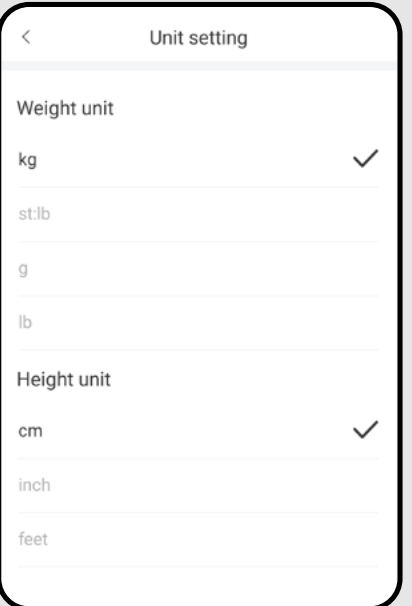
| KOMPATIBILITA | |
|--|---------------------------------------|
| Mobile phone's (tablet's) operation system | Android 8.0 and up IOS 11.0 and up |




2. ACCOUNT REGISTRATION AND LOGIN

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | <ul style="list-style-type: none"> Once you have downloaded the application, turn it on. The basic login screen appears. The screen also allows you to switch to register a new account, reset your password if it is lost, or log in using third-party applications. If you do not have an account, proceed to „Register“ (or sign in with a third-party application, if applicable) Enter your account name to log in (email) and password, then click on „Log in“. In the case of the Android OS, you must check the terms of use box in the lower left corner before logging in. |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none"> Enter a valid e-mail address and choose a secure password. Confirm your acceptance of the services and policies and confirm the process by clicking „Register“. |
| 3 | | <ul style="list-style-type: none"> If you've lost your password, you can renew it by means of the e-mail address used for creating the account. Enter this e-mail and as soon as you receive a verifying code, write it to the respective field. Remark: It could take a certain time until the verifying code comes up. Please be patient. At the same time, check that the code is not blocked by the spam basket/filter of your e-mail client. Ideally, use common email addresses / clients (eg. Gmail, Yahoo, etc.) |

3. CONNECTING THE DEVICE

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | <ul style="list-style-type: none"> After successful login, the home screen will appear, in this case without a paired device. Click to connect the application with the scale „Add device“ <p><i>* If you already have a device paired, use the „+“ icon in the upper right corner, which will allow you to add another device in the same way.</i></p> |
| 2 | | <ul style="list-style-type: none"> A list of different types of devices for which the application is intended appears. <p>Note: ETA uses the application only for the ETA7306 and ETA8781 scale. No other devices listed in the application are currently supported.</p> |
| 3 | | <ul style="list-style-type: none"> The best way is to automatically find the device you go to by clicking „Devices nearby“. The search for nearby devices starts automatically. Press the switch button to switch the scale on. When the scale appears in the application, click on its icon. |

| | | |
|---|---|--|
| 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> The pairing process will start. |
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> In the next step, the application offers the possibility to add your own balance name and assign and categorize the balance according to the room in which it will be used. Click to confirm „Start using“. <p style="text-align: center;">Note The room categorization feature makes more sense when using multiple products that the application supports. In our case (ETA scale only) you do not have to use this function.</p> |
| 6 |  | <ul style="list-style-type: none"> If this is your first login, the app may prompt you to create a profile. In order to use the baby scale, the profile must be created for the child - that is, with the child's date of birth and gender. If the profile was kept with a birth date far in the past, the app would not work properly and would not display all options. |
| 7 |  | <ul style="list-style-type: none"> In the last step of the device setup, you will be offered the option to set the weight and height units. Click „OK“ to confirm. <p style="text-align: center;">Note To cancel pairing / deleting the device, do so in the settings section, see 9B-2</p> |
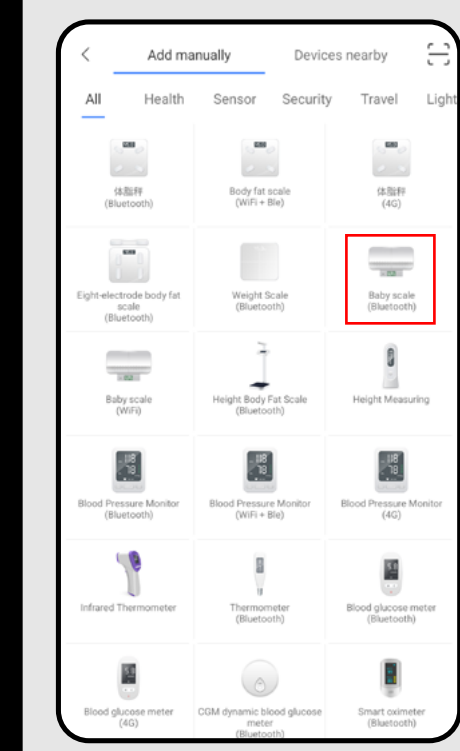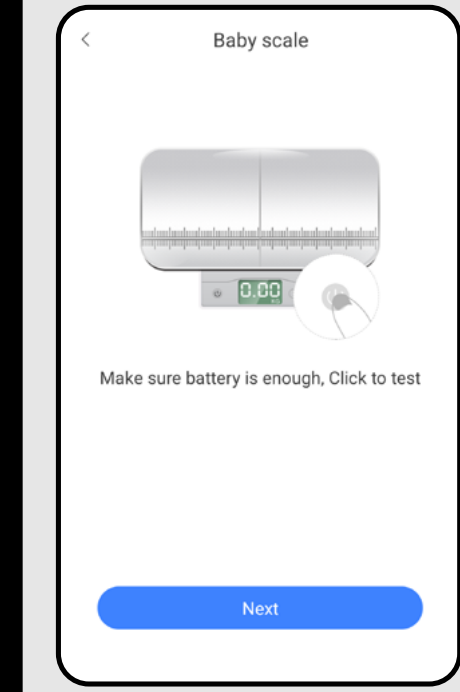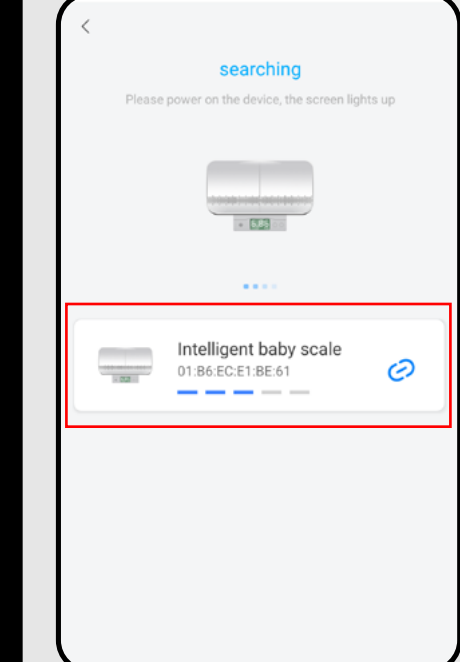
| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> The second way is manual pairing. Select "Baby scale (Bluetooth)" from the list of devices. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Click on "Next". |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Turn on the scale, it will automatically send a signal that your mobile phone will pick up and displays the device it's looking for in the app. Confirm by clicking on the searched device. The next steps are identical to the automatic pairing (from step 3.5). |

4. BASIC ADVICE AND TIPS FOR USE

Using the ETA scale with AiLink is intuitive and we did not notice any significant problems or difficulties during our testing you might encounter while using it. Nevertheless, smart products generally have an increased risk associated with incompatibility of mobile devices or problems with wireless connectivity. Therefore, we prepared a set of basic advice and recommendations on how to solve problems characteristic of the smart products segment.

1. Smart device (mobile phone, eventually tablet):

- a) always use the current version of the application downloaded from official sources
- b) make sure your devices have supported versions of Android and iOS.
- c) have the Bluetooth function active
- d) have an active internet connection for proper communication of the application with the cloud server
- e) allow the application the required permissions, which in some cases depend on the type of operating phone.
In case of problems, make sure that you do not have any parent system settings within your phone, for example, that prevent applications from using certain permissions - in which case you must grant the application an exception.
- f) the communication between the balance and the phone may be disturbed by some programs (eg VPN, firewall, etc.) that you use in the phone.
In case of problems with pairing or normal operation, turn off these programs.
- g) In case of problems, try pairing with another phone to avoid the problem in that phone.

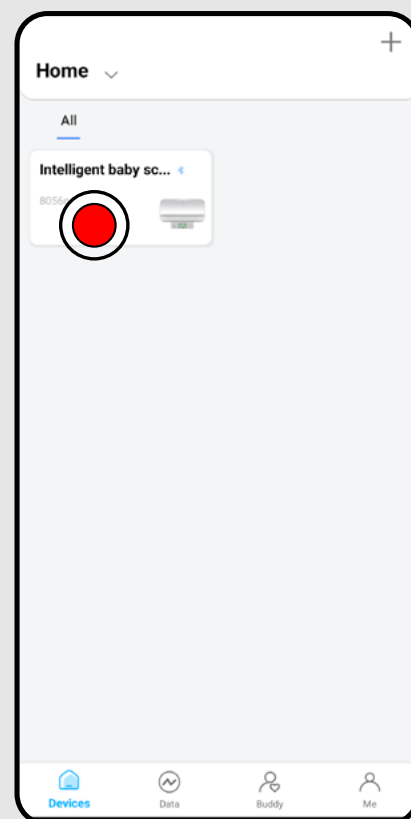
2. Scale

Always make sure you use sufficiently charged batteries. Weak batteries can negatively affect the function of the Bluetooth connection or the measurement process itself. In some cases, the batteries that came with the product may also have reduced capacity due to storage and shipping, so it is a good idea to try new batteries if you have any problems.

- Try creating a new account to avoid the problem of incorrect account activation;
- Keep your smart device close to the scale (preferably within a distance of approx. 2 m) during pairing and use.


5. MEASUREMENT

1




- After switching on the application and successful connecting, click on the field / icon of the paired balance.
- This will take you from the general part of the application to the section for controlling and managing the scale itself.

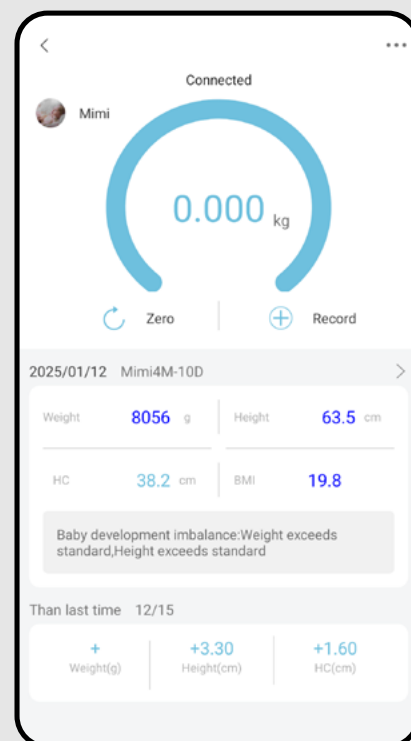2




- The basic measurement screen is displayed.
- Click on the profile icon in the upper left corner to select a profile (if you have more than one).
- Turn on the scale and wait for the scale to connect to the app - the information bar will display the message **"Connected"**.
- When the scale is switched on, the device will automatically connect. If the information bar says **"Connection failed..."**, just click on the notification and the connection will be restored. However, the scale must be switched on.
- Before the actual weighing, measure the child's current height and head circumference - these values can (optionally) be added to the weight value.

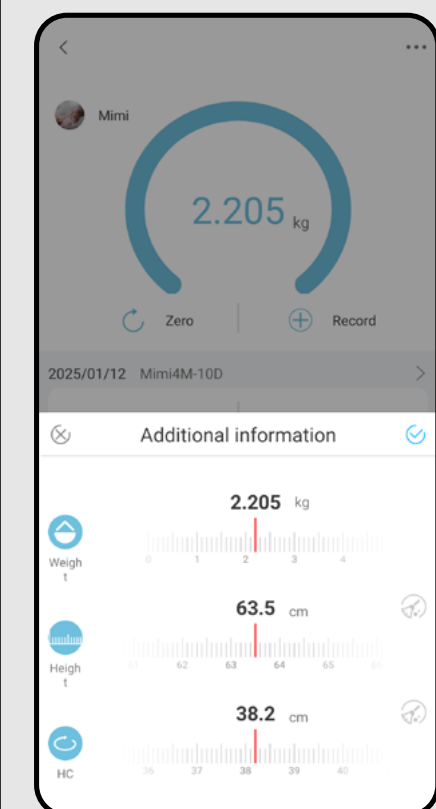3



- Now you can start the practical weighing - follow the operating instructions that came with the scale.
- Once weighed, the data will be automatically transferred to the app and a screen will appear with the option to add the height and circumference of the child's head. Find out these parameters before the actual weighing and add them in this step.
- If you do not want to enter the height or girth, click the "🚫" icon to the right of the parameter.
- To create a record, click on the "📌"

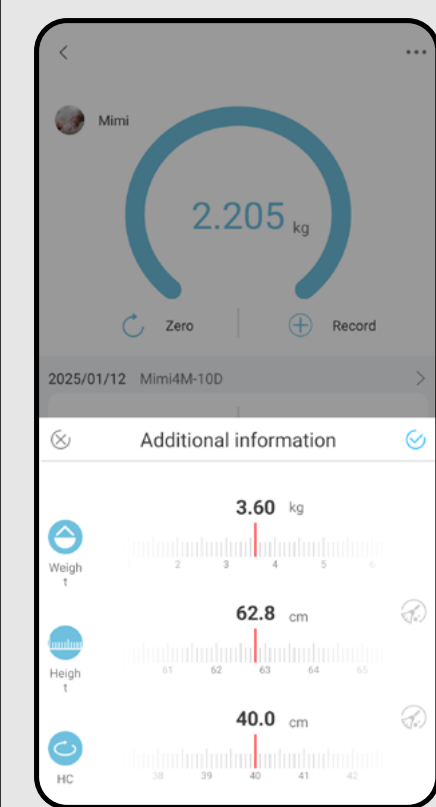4




- The measurement results can also be entered manually. If you want to create a record of the measurement without the actual weighing, press **"Record"** on the main screen and enter the values manually, including the date, to which the values relate.
- In this way, values can also be added retrospectively.

NOTES

- If the balance connection has failed, make sure you have Bluetooth activated on your phone, then click on the text in the information bar to reconnect. Alternatively, read the instructions in Chapter 3.
- If the measurement or analysis failed, try the whole weighing / measuring process again. Alternatively, read the instructions in Chapter 4.
- Once a record is created, the tracked parameters cannot be edited/ added back. However, a new record can be manually inserted to replace an incomplete measurement (including selecting a backdate).
- If the child is constantly moving and the value does not stabilize, try pressing **"Record"** in the app (at the point when movement is lowest) to force the measurement result to stabilize.
- The record contains a brief verbal assessment of the child's development according to the WHO growth standards. These assessments and standards are indicative and no medical conclusions can be drawn from them.


6. RESULT VIEW

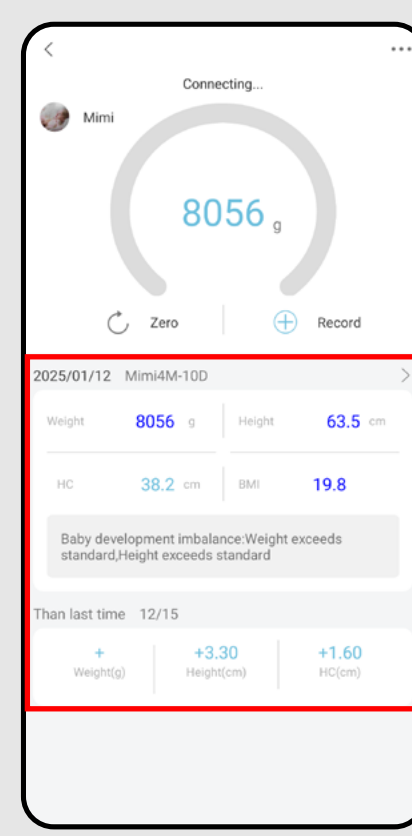1




- Click on one of the entries on the main screen. This will take you to the section for recording measurement records and graphical representation of measurement results.
- You can scroll through the individual records.
- The records also contain a brief text commentary on the child's development.

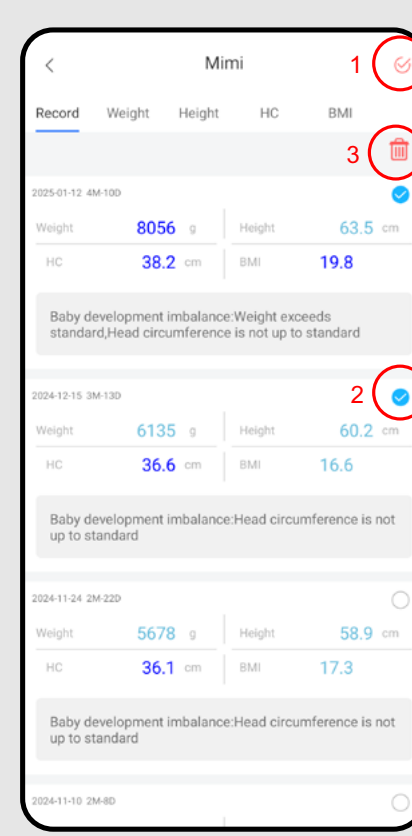2




- To delete a record, click on the pencil icon in the top right corner (1).
- Then click to select the record or multiple records (2) you want to delete.
- Finally, confirm the selection by clicking on the trash can icon in the upper right corner (3).
- Finally, confirm the process by clicking "OK".

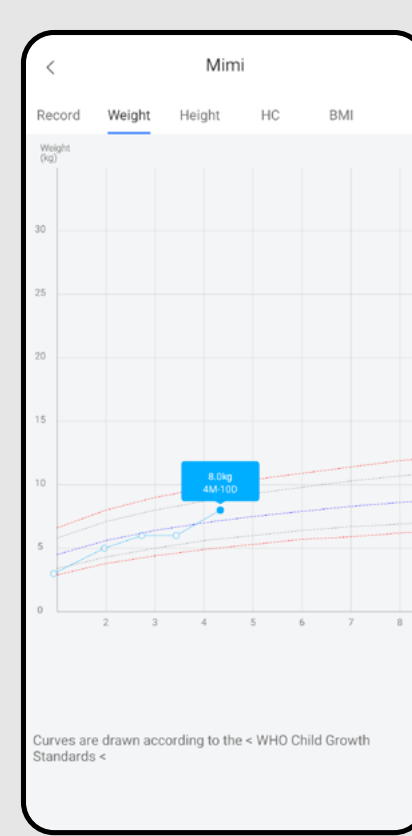3




- Click on the individual parameters of the monitored measurements in the top bar to go to their graphical representation.
- The WHO growth curves are also shown in the graph - so you can see the approximate development within these standards.
- First, the "Weight" is available.

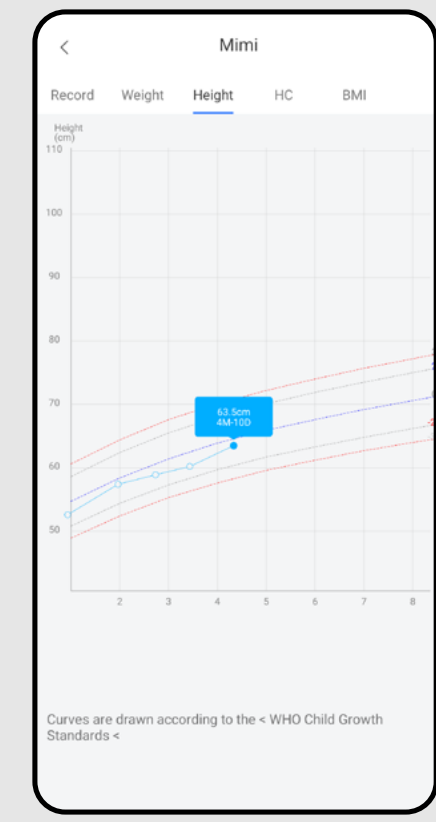4




- Another monitored parameter is "Height".

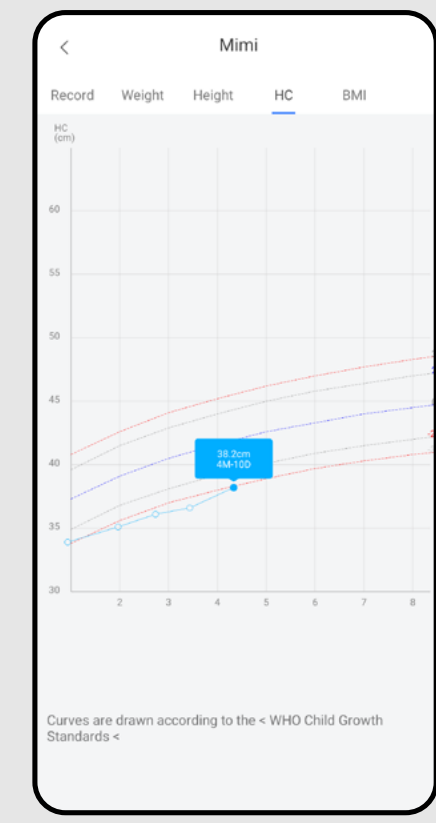5



- Another monitored parameter is "Head circumference (HC)".

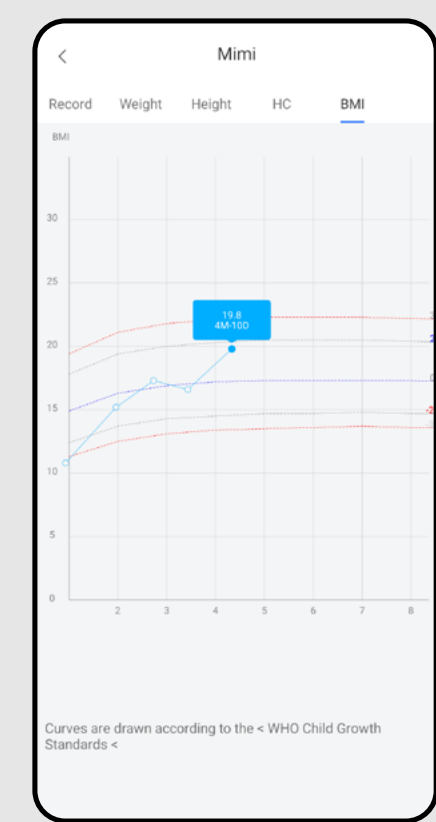
6



- Another monitored parameter is "BMI".


7. SHARING RESULTS

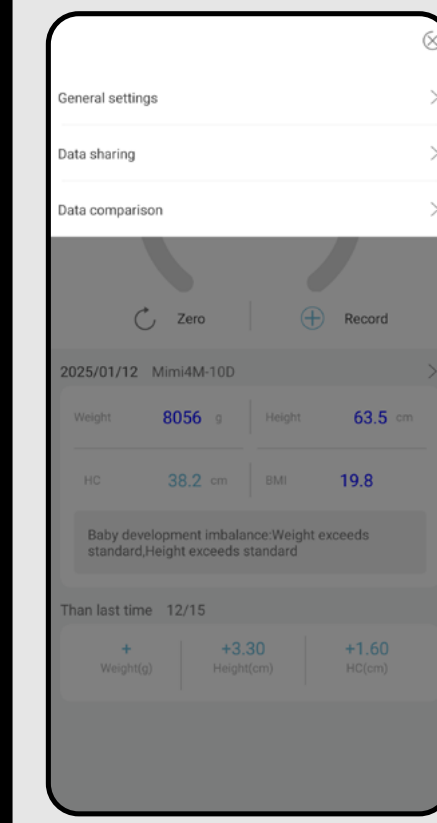1




- On the main screen, click on the "... " icon in the top right corner.
- The settings menu will appear, where you have 2 basic options to view and share your results:
A) **Data Sharing**
B) **Data Comparison**

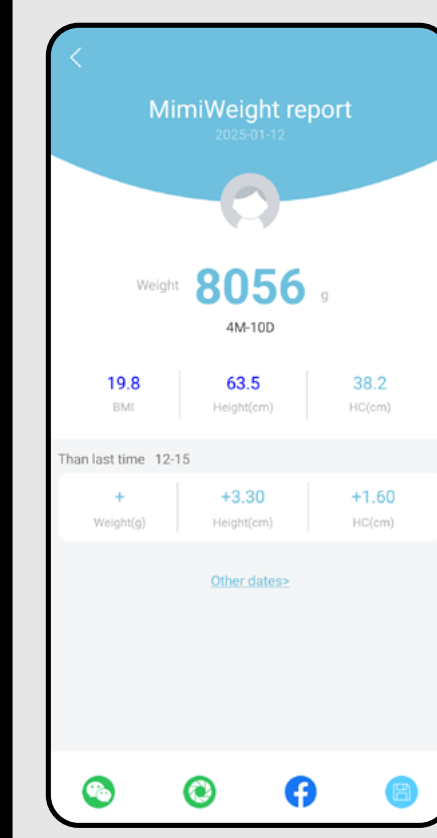2



- **Data Sharing**
- This is a simple record of a specific measurement. Click on "More Dates" to go to a list of measurements sorted by date. Click on a specific measurement to view the report.
- The report can be further shared using the Facebook app, or by clicking on the floppy disk icon to download it to the device storage where it can be further work with the image in various other applications.
- Note
- The green icons belong to the WeChat app, which is not recommended for use in Europe.

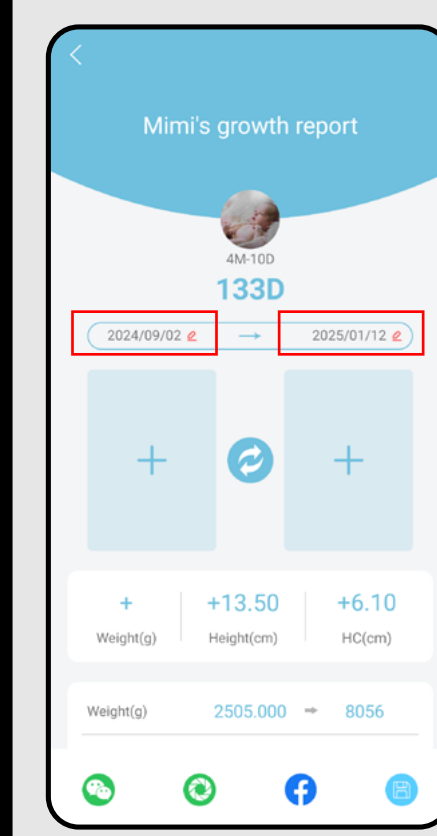
3



- **Data comparison**
- This is a simple record of a specific measurement. Click on the measurement date icons to go to a list of measurements sorted by date. Click on a specific measurement to select it. Do this for the date on the left and right side.
- Select an older measurement on the left and a more recent one on the right. The report will create a comparison of the two measurements and show the differences.
- Photos can be added below the date fields from the period to give a better visual contrast of the change.
- The method of sharing is the same as the point above.


8. FRIEND – RESULT SHARING

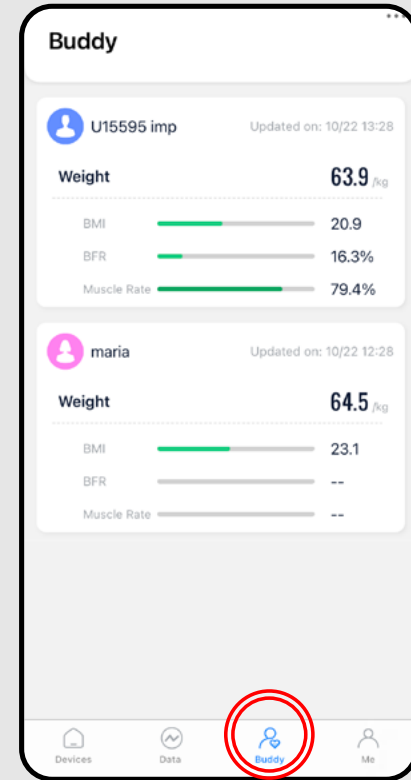1



- In addition to the ability to share your own results, the application also allows you to link AiLink user accounts to each other.
- This way you can view the results of the person you are connected to and vice versa - that person will see your results.
- Example: in the illustration on the left you can see that the current profile shares its results with the user „imp“. IMP has multiple profiles, but has chosen to share only his primary profile and profile of „Maria“.

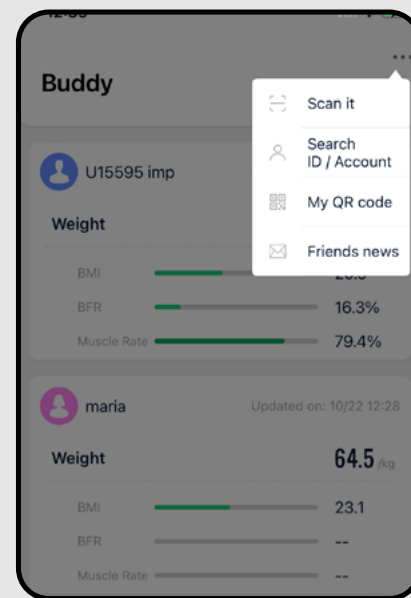2




- To add a new friend, one of the accounts must enter the „Buddy“ and press „...“. Then you have 2 options:
 - 1) You can use the „Scan it“ option Scan the QR code you receive from the other account you want to share data with from your phone. You can get the QR code by clicking on „My QR code“, on the phone of the other account, scan this QR code and confirm the sharing of profiles.
 - 2) Use the „Search ID / Account“ option to enter the e-mail address of the other account and confirm.
- As soon as you send a request to the other party, a notification will appear in the application in the „Friend“, section, one of the displayed red markers (👤/👤🔴). will appear next to the icon. Then select „...“, go to „Friends' News“ and confirm your request.

Note

The account that sends the request and the account that receives the request can choose which sub-profiles to share with the other party when sending / receiving the request.

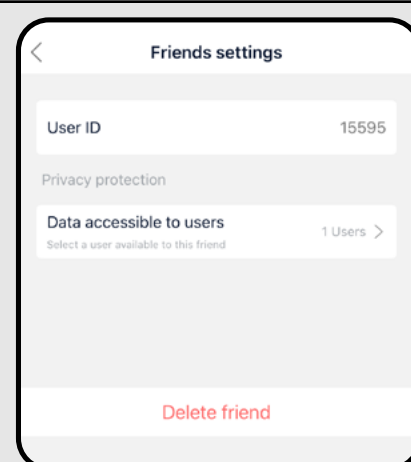3




- If you want to change some parameters of the shared account (eg account name, delete share, change shared sub-profiles), click on the profile in the „Buddy“ section and then on the settings icon „⚙️“.

9A. SETTINGS - GENERAL


The application allows you 2 basic setting options. Settings within the general part of the application (which is common for the management of all products used in the application) and settings within the application part intended for the ETA scale. In both cases, some settings overlap, some are specific.

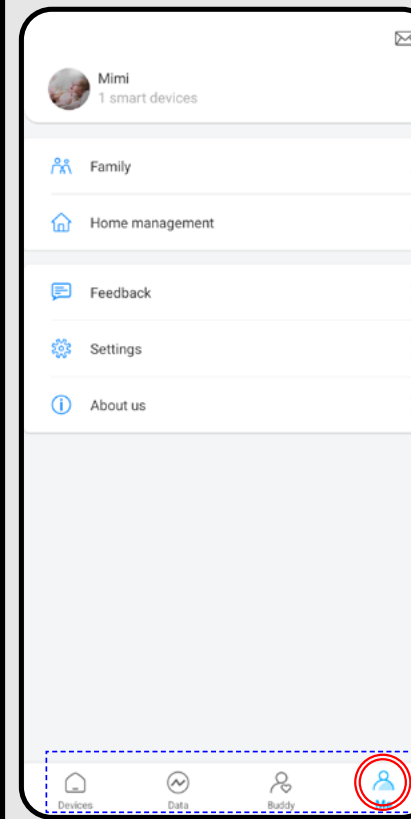1




- **General section allows you to set:**
 - a) **Main profile adjustment** (see below 9A-2)
 - b) **Profile management** (see below 9A-3)
 - c) **Home management** - Management of households, rooms and related products. This function is unnecessary for the purpose of using only the ETA scale.
 - d) **Feedback** - It is possible to give a feedback to the developers of the app. Please, do not use this option. We recommend to use the form in the app. (See below 9B-2)!
 - e) **Settings** - Ability to switch the application language and display connected devices.
 - f) **About us** - Displays the version of the application and the option to view the terms and conditions of the application.

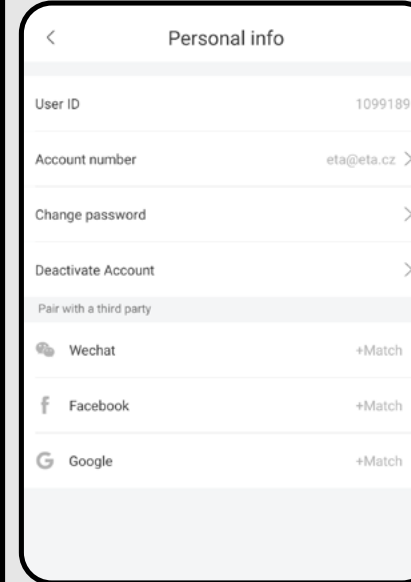2



- Click on the profile icon (👤) to go to the profile settings.
- Here you can find the account ID, change the password, or deactivate the account.
- The options of third-party applications (WeChat, Facebook) in this part of the application are only used to inform you whether you are logged in to your account using these services.

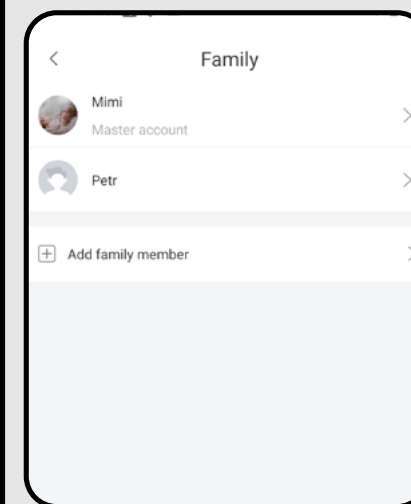
3



- Section „Family“ allows easy profile management. In the menu you can see both the main profile and all created sub-profiles.
- After clicking on the profile, you can change the basic information (photo, nickname, birthday, gender) or you can delete the profile.
- To create a new subprofile, click on „Add family member“.


9B. SETTINGS - APPLICATION

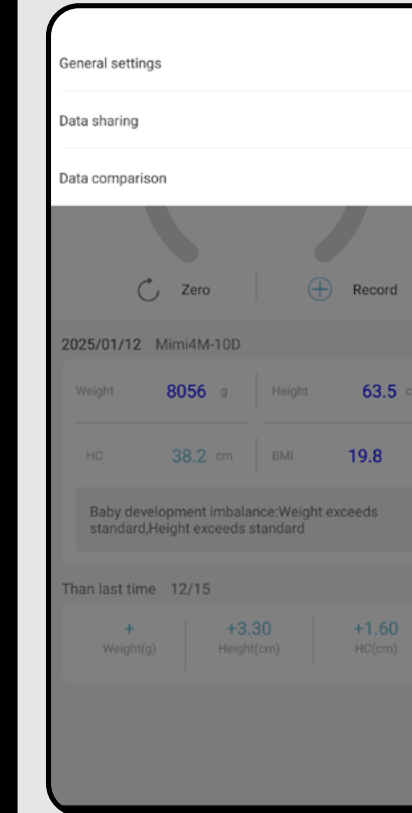1




- On the main screen, click on the „...“ icon. in the top right corner.
- Click on „General settings“.

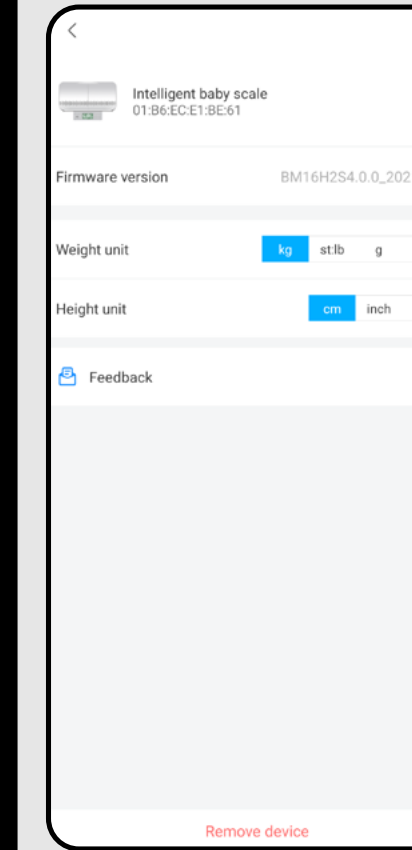
2



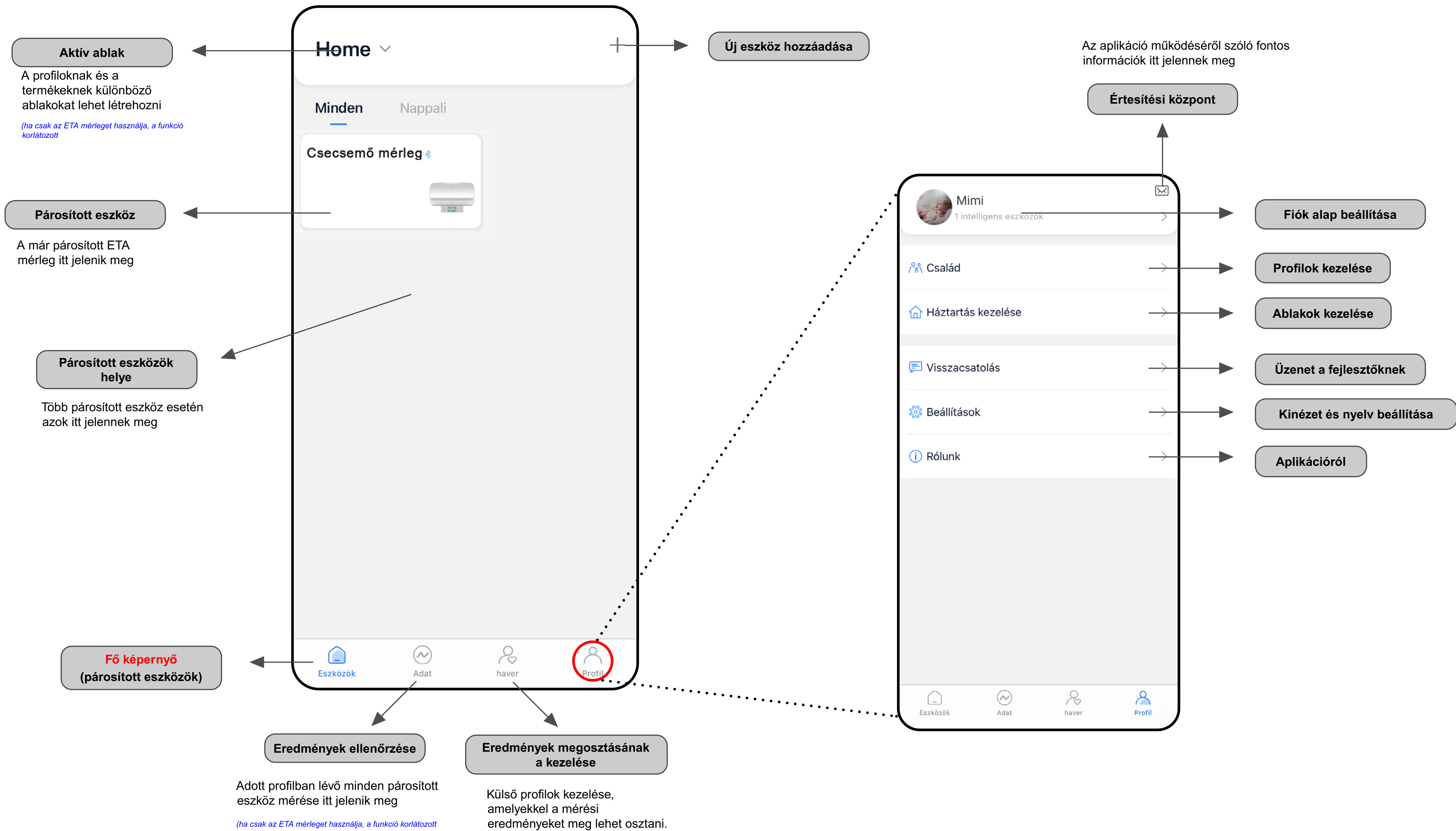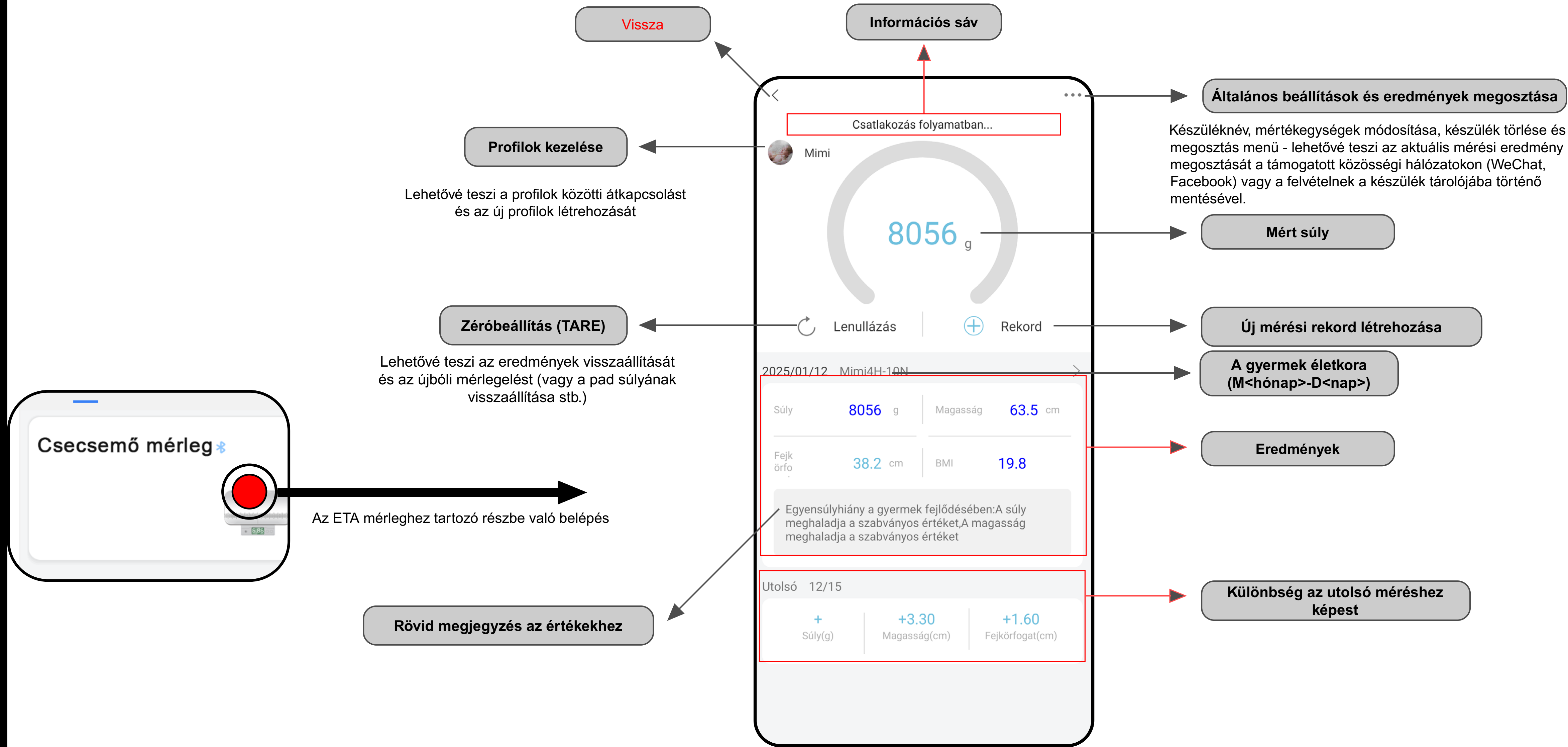- **In the application section you can set the units** of weight and height. Check the firmware version, rename the weight and send feedback to the developer. **Make best use of this option** (rather than the field in the general settings section).
- Then at the bottom of the screen you will find the „Remove device“ option, which will delete the device (unpair it).







APLIKÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

Tisztelt Vásárló,

Köszönjük, hogy az ETA termékét választotta! Ez a használati utasítás azon ETA7306 mérleg tulajdonosainak való, akik szeretnék a mérleg teljes potenciálját kihasználni, az AILINK aplikáció segítségével.

További információkat, tanácsokat és tippeket weboldalunkon találhat meg:

www.eta.hu/care

Ezt a weboldalt folyamatosan frissítjük és a legújabb, adott termékről szóló információkat nyilvánossá tesszük.

Kérdések, vagy bármilyen problémák esetén először nézze meg a fent említett weboldalt és ha az ott található információk nem segítik megoldani a problémát, forduljon hozzánk a következő e-mail címen keresztül: info@eta.hu

1. AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE

Az alkalmazást megtalálja az Apple Store vagy a Google Play alkalmazás adatbázisában, vagy használhatja az alábbi QR-kódot, hogy felgyorsítsa a dolgokat:



Töltse le és telepítse az alkalmazást a mobiltelefonjára (tabletjére).


KOMPATIBILITÁS

Telefon (tablet) operációs rendszere

Android 8.0 és magasabb
IOS 11.0 és magasabb


2. FIÓK REGISZTRÁCIÓJA ÉS BEJELENTKEZÉS

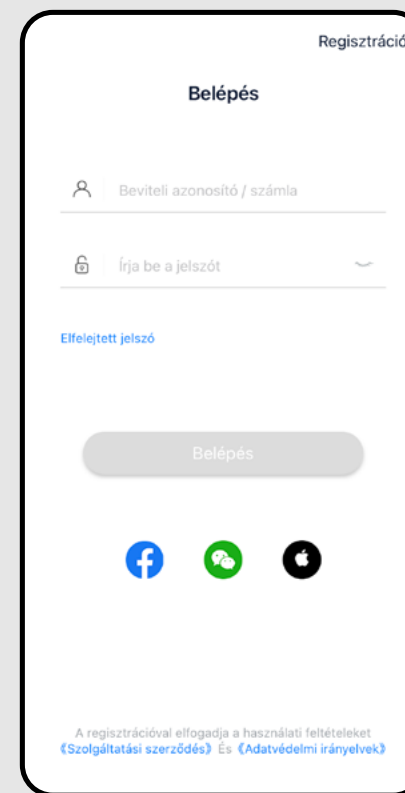1




- Miután letöltötte az aplikációt, kapcsolja azt be. A bejelentkezési képernyő jelenik meg.
- A képernyőn lehet az új fiókot is regisztrálni, elfelejtett jelszó esetén újat kérni, vagy harmadik féltől származó alkalmazások segítségével bejelentkezni.
- Ha nincs létrehozva a fiókja, válassza ki a „**Regisztráció**” opciót (esetleg jelentkezzen be harmadik féltől származó alkalmazással)
- Bejelentkezéshez adja meg a fiók nevét (e-mail címét) és jelszavát és válassza ki a „**Belépés**” opciót. OS Android esetén szükséges a használati feltételekkel egyetérteni.

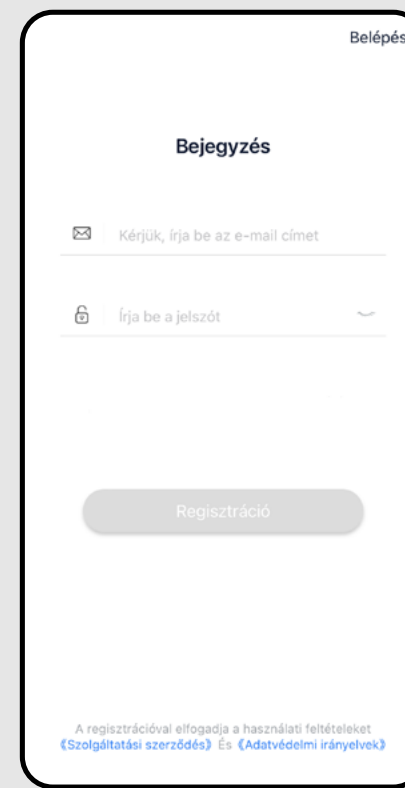2



- Adjon meg egy érvényes e-mail címet és válassza ki a jelszót.
- Erősítse meg a szolgáltatások nyújtására vonatkozó beleegyezését és az irányelveket, majd a folyamatot a "**Bejegyzés**" gombra kattintva véglegesítse.

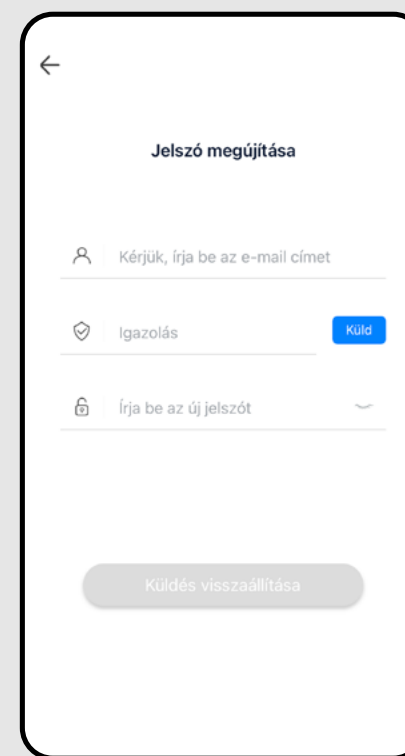
3



- Abban az esetben, ha elveszíti a jelszavát, a fiók létrehozásához használt e-mail címmel visszaállíthatja azt.
 - Írja be az e-mail címét, és amikor megkapja rá az ellenőrző kódot, írja be azt a megadott mezőbe.
- Megj. Az ellenőrző kód megérkezése eltarthat egy ideig. Kérjük, legyen türelemmel. Ugyanakkor ellenőrizze, hogy a kód nem blokkolja-e a levelezőprogramja spam szemétyűjtőjét/szűrőjét. Ideális esetben alap e-mail címeket használjon (pl. gmail, seznam, stb.).**

3. ESZKÖZ PÁROSÍTÁSA

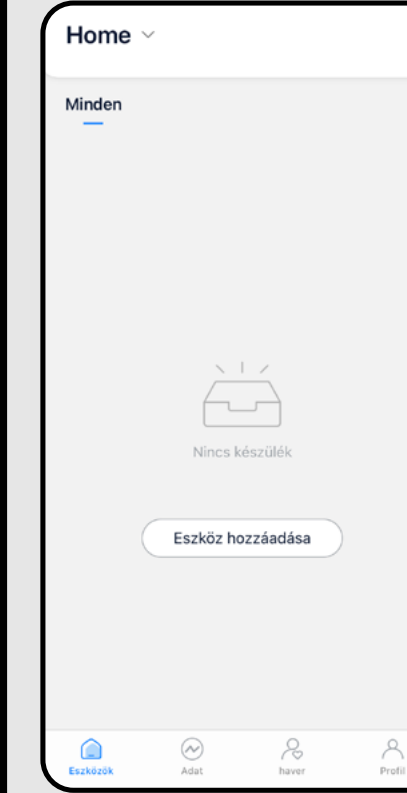
1



- Sikeres bejelentkezés után a fő képernyő jelenik meg, ebben az esetben párosított eszköz nélkül.
 - Aplikáció és mérleg párosításához válassza ki az „**Eszköz hozzáadása**” opciót.
- * Abban az esetben, ha megvan a párosított eszköz, használja a jobb felső sarokban lévő „+” ikont, amely lehetővé teszi az eszköz hozzáadását*



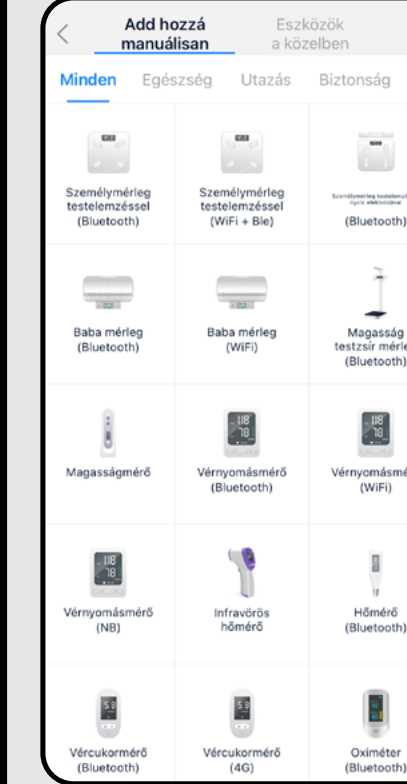2




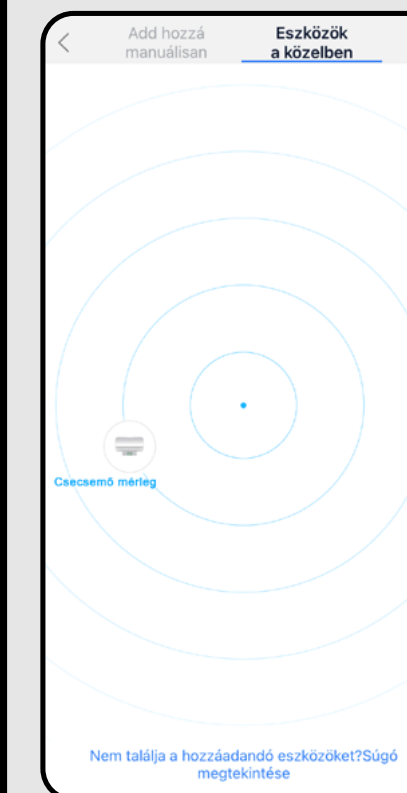- Eszközök listája jelenik meg, amelyekhez az aplikáció használható.


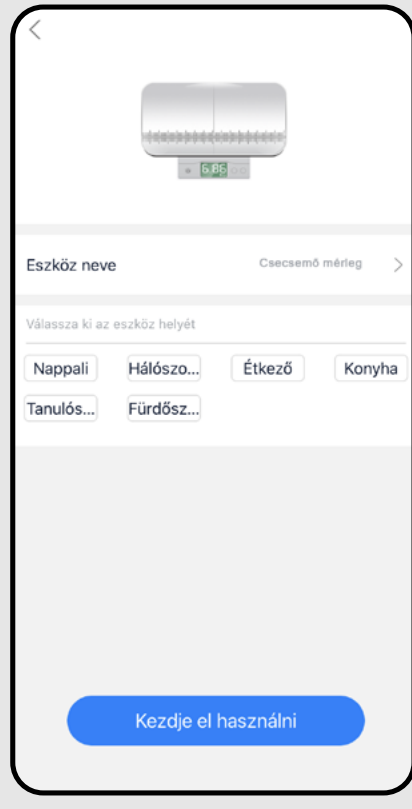
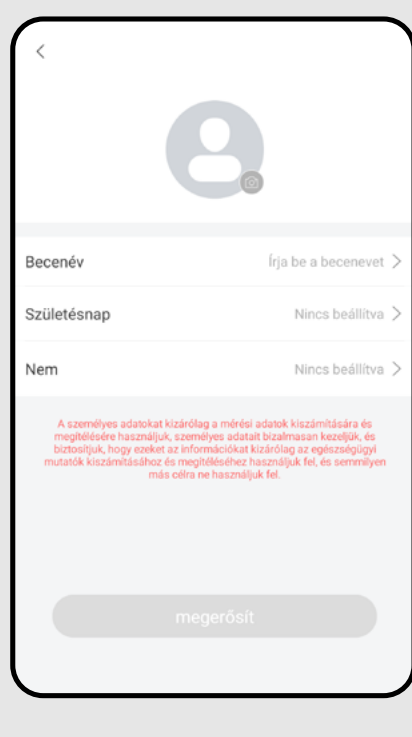
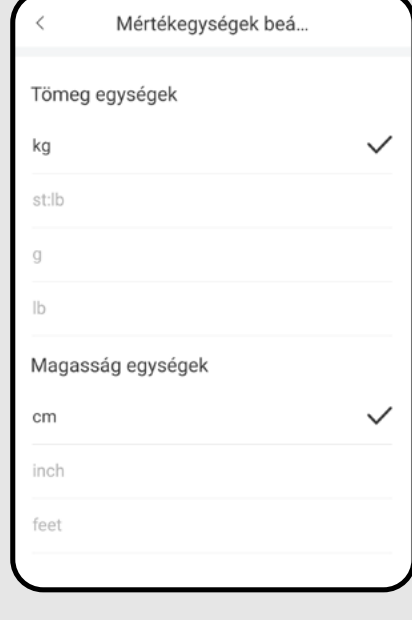
Megjegyzés:

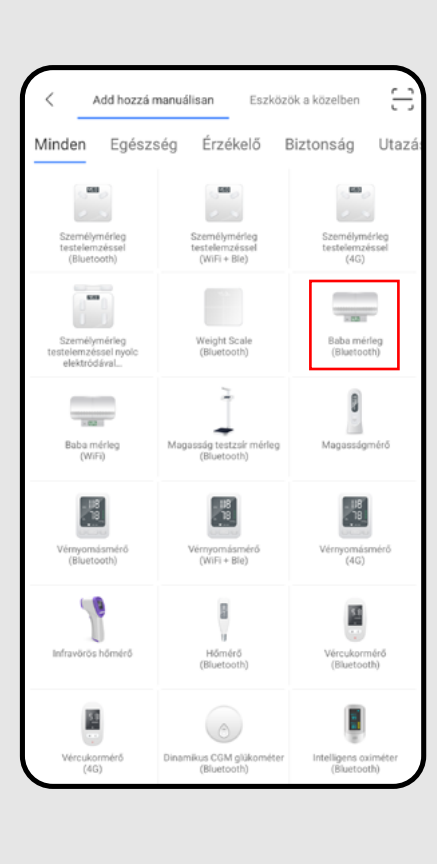

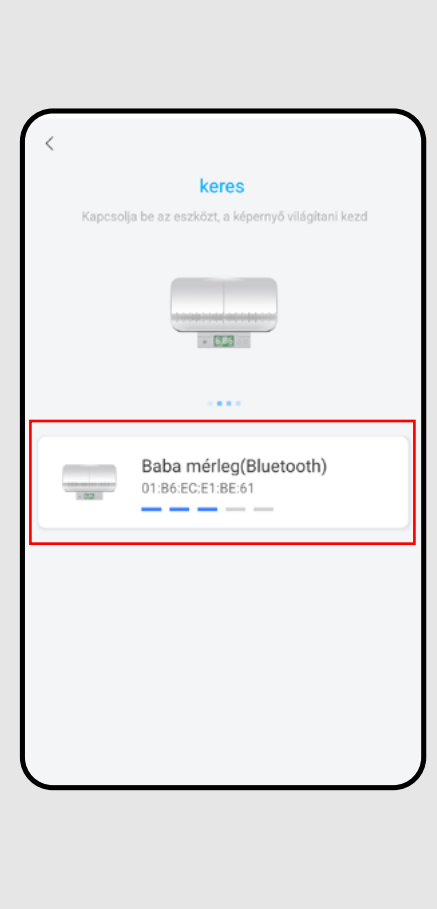
Az ETA társaság az aplikációt csak az ETA7306 és ETA8781 mérleghez használja. Semmilyen más, aplikációban sorolt eszköz jelenleg nem támogatott.

3



- Legjobb mód az eszköz automatikus keresése, amelyet az „**Eszközök a közelben**” opcióval lehet kiválasztani.
- Közeli eszközök keresése automatikusan elkezdődik.
- Kapcsolja be a mérleget a bekapcsológomb megnyomásával.
- Miután a mérleg megjelent az aplikációban, klikkeljen az ikonjára.

| | | |
|---|---|---|
| 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Megkezdődik a párosítási folyamat. |
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> • A következő lépésben lehet a mérlegnek saját nevet adni, a mérleget hozzáadni és kategorizálni egy ablakhoz, amelyben a mérleget használni fogja. • Megerősítéshez válassza ki a „Kezdje el használni“ opciót. <p style="text-align: center;">Megjegyzés Az eszközök szoba szerinti kategorizálásának funkciója több támogatott eszköz használata esetén hasznos. A mi esetünkben (csak ETA mérleg használata) ezt a funkciót nem szükséges használni.</p> |
| 6 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Ha ez az első bejelentkezése, az alkalmazás felszólíthatja egy profil létrehozására. • A baba mérleg használatához létre kell hozni egy gyermeki profilt – azaz a születési dátumát és nemét meg kell adni. • Ha a profilban túl régi születési dátum szerepel, az alkalmazás nem fog megfelelően működni, és nem jeleníti meg az összes lehetőséget. |
| 7 |  | <ul style="list-style-type: none"> • A készülék beállításának utolsó lépésében felajánlásra kerül a súly- és magasságegységek beállításának lehetősége. • A megerősítéshez kattintson az „OK“ gombra. <p style="text-align: center;">Jegyzet Az eszköz párosításának/törlésének megszakításához tegye ezt a beállítások részben, lásd: 9B-2</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 8 |  | <ul style="list-style-type: none"> • A második módszer a kézi párosítás. • Az eszközlistában válassza a "Baba mérleg (Bluetooth)" lehetőséget. |
| 9 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Kattintson a "Következő" gombra. |
| 10 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja be a mérleget, az automatikusan jelet sugároz, amit a mobiltelefonja érzékel, és az alkalmazásban megjeleníti a megtalált eszközt. • Erősítse meg a megtalált eszközre kattintva. • A további lépések megegyeznek az automatikus párosítással (a 3.5 lépéstől kezdve). |

4. ALAP HASZNÁLATI TANÁCSOK ÉS TIPPEK

Az AiLink applikációval való ETA mérleg használata intuitív, tesztelés közben semmilyen problémát nem észleltünk, amelyekkel használat közben találkozhat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a mobil eszköz nem lesz kompatibilis, vagy a vezeték nélküli csatlakozás nem fog problémamentesen működni. Emiatt alap tanácsok és javaslatok listáját hoztuk létre, amelyek segíthetnek az adott, smart eszközökre jellemző problémákat megoldani.

1. Smart eszköz (mobil, tablet):

- Mindig aktuális, hivatalos forrásokból származó verziót használjon.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön eszközei támogatott Android és iOS verziót használják.
- A Bluetooth funkció legyen bekapcsolva.
- Az internet kapcsolat legyen aktív, az applikáció és a felhős szerver közötti megfelelő kommunikációhoz.
- Engedélyezze az applikációnak a szükséges jogokat, amelyek sokszor az operációs rendszertől függhetnek. Problémák esetén ellenőrizze, hogy a telefonjában nem létezik olyan beállítás, amely akadályozza az applikációnak a szükséges engedélyeket használni – ebben az esetben szükséges az applikációnak kivételt adni.
- A mérleg és telefon kommunikációját egyéb programok zavarhatják (mint VPN, firewall stb.), amelyeket a telefonban használ. Párosítási, vagy használati problémák esetén ezeket a programokat kapcsolja ki.
- Problémák esetén próbáljon más telefonnal való párosítást, így lehet az adott telefon problémáját kizárni.

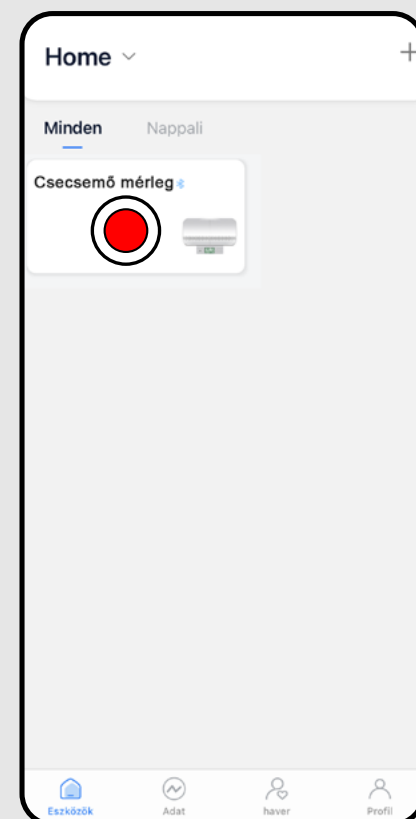
2. Súly egység

Mindig ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak feltöltve. A gyenge elemek negatívan befolyásolhatják a Bluetooth csatlakozást, vagy a mérési folyamatot. Néhány esetben megtörténhet, hogy az elemeket, amelyek a csomagolásban voltak, a hosszú tárolás miatt lemerültek, ezért problémák esetén javasolt az új elemeket kipróbálni.

- Próbáljon új fiókot létrehozni, így az adott fiók hibás aktivációval kapcsolatos problémáit kizárhatja;
- Párosítás és használat közben tartsa a smart eszközt a mérleg közelében (optimális esetben max. 2 m távolságban).


5. MÉRÉS

1




- Applikáció bekapcsolása és sikeres párosítás után válassza ki a párosított mérleg ikonját.
- Ezzel az applikáció általános részéről átkapcsol az adott mérleghez tartozó részbe.

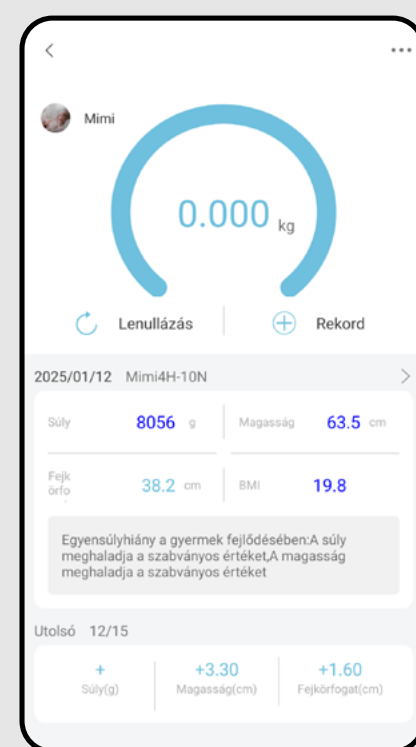2




- Alap mérési képernyő jelenik meg.
- A bal felső sarokban lévő profil ikon kiválasztásával válassza ki a kívánt profilt (ha több profillal rendelkezik).
- Kapcsolja be a mérleget, és várja meg, amíg az alkalmazás csatlakozik – az információs sáv megjeleníti az „**Připojeno**“ üzenetet.
- A mérleg bekapcsolása után az eszköz automatikusan kapcsolódik. Ha az információs sáv azt jelzi, hogy **"A kapcsolat sikertelen..."**, kattintson erre az értesítésre, hogy újrapárosítsa. A mérlegnek azonban be kell lennie kapcsolva.
- Mérlegelés előtt mérje meg a gyermek aktuális magasságát és fejének kerületét – ezek az értékek (opcionálisan) hozzáadhatók a súlyhoz.

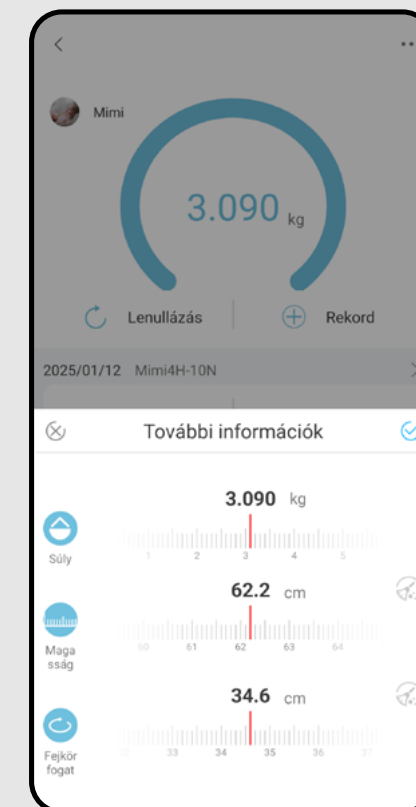3



- Most már elkezdheti a tényleges mérlegelést – kövesse a mellékelt használati utasítást.
- A mérlegelés után az adatok automatikusan átvivődnek az alkalmazásba, és megjelenik egy képernyő, ahol lehetőség van a magasság és a fej kerületének kiegészítésére. Ezeket az értékeket a mérlegelés előtt mérje meg, és ezen a ponton adja meg őket.
- Ha nem szeretné megadni a magasságot vagy a fejkörfogatot, kattintson az adott paraméter jobb oldalán lévő "🚫" ikonra.
- Az adatfelvételhez kattintson a "📌" gombra.

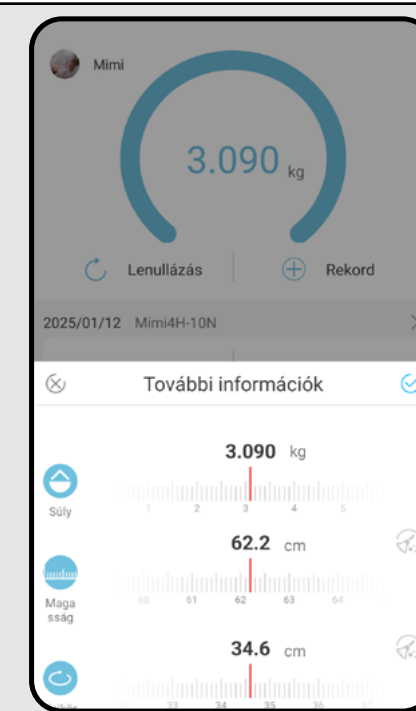4




- A mérések eredményeit kézzel is megadhatja. Ha mérlegelés nélkül szeretne adatokat rögzíteni, kattintson a főképernyőn a **"Rekord"** gombra, és adja meg az értékeket kézzel, beleértve azokat a dátumokat is, amelyekhez az adatok tartoznak.
- Ily módon értékeket utólag is hozzá lehet adni.

MEGJEGYZÉSEK

- Ha a mérleg csatlakozása sikertelen, ellenőrizze a Bluetooth funkció működését, utána próbálja újra csatlakoztatni a mérleget az információs listán keresztül. Ha szükséges, olvassa el a 3. fejezetben lévő információkat.
- Abban az esetben, ha a mérés sikertelen, próbálja a mérést megismételni. Ha szükséges, olvassa el a 4. fejezetben lévő információkat.
- Amint az adatfelvétel megtörtént, a követett paramétereket nem lehet módosítani/hozzáadni. Azonban manuálisan új adatfelvételt lehet készíteni, amely felváltja a hiányos mérést (beleértve a visszadátumozást is).
- Ha a gyermek folyamatosan mozog, és az érték nem stabilizálódik, próbálja meg az alkalmazásban megnyomni a **"Rekord"** gombot abban a pillanatban, amikor a mozgás a legkisebb, hogy kényszerítse az eredmény stabilizálását.
- A rögzítések tartalmazzák a WHO növekedési normáinak megfelelően a gyermek fejlődésének rövid szóbeli értékelését. Ezek az értékelések és normák tájékoztató jellegűek, és nem lehet belőlük egészségügyi következtetéseket levonni.


6. EREDMÉNYEK MEGJELENÉSE

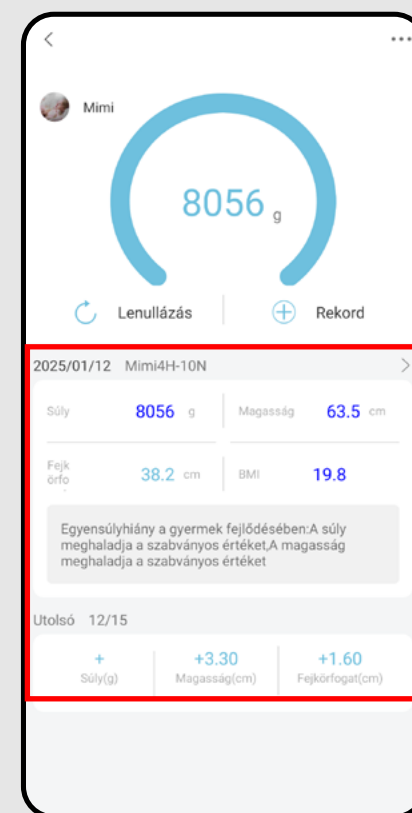1




- Kattintson egy rekordra a főképernyőn. Ezzel eljut a mérések nyilvántartási szekciójába és az eredmények grafikus megjelenítéséhez.
- Görgetéssel megtekintheti az egyes rekordokat.
- A rögzítések szintén tartalmaznak rövid szöveges megjegyzést a gyermek fejlődésével kapcsolatban.

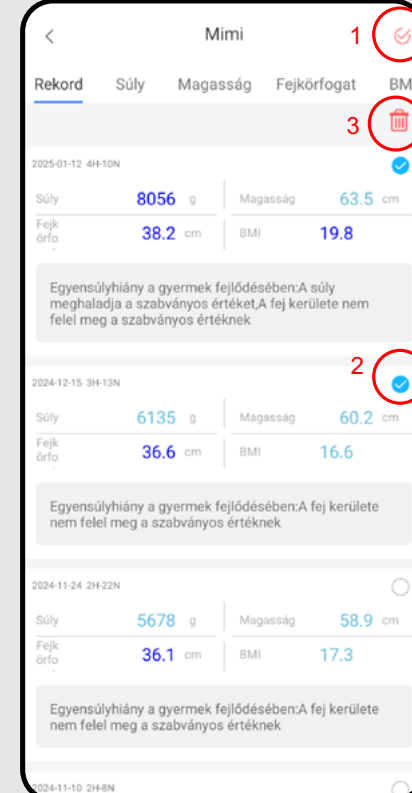2




- Ha törölni szeretne egy rekordot, kattintson a jobb felső sarokban lévő ceruza ikonra (1).
- Ezután válassza ki a törölni kívánt rekordot vagy rekordokat (2).
- Végül a jobb felső sarokban lévő kuka ikonra kattintva erősítse meg a választást (3).
- Végül a folyamatot erősítse meg az **"Rendben"** gombra kattintva.

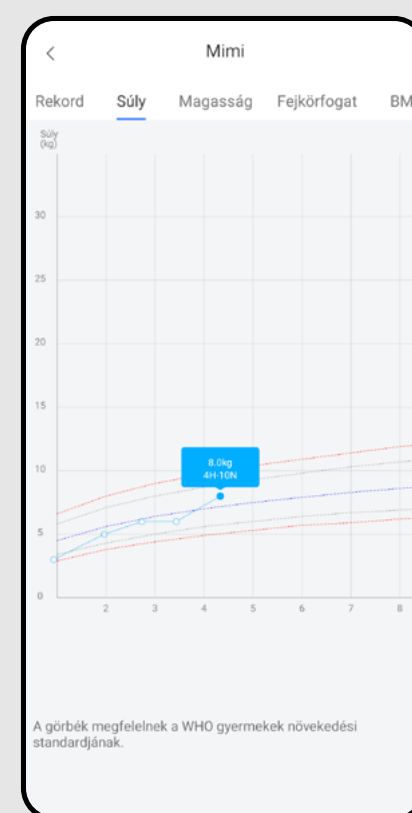3




- A felső sávban a mért paraméterekre kattintva azok grafikus megjelenítésére léphet.
- A grafikonon a WHO növekedési görbéi is megjelennek – ezekben látható a hozzávetőleges fejlődés ezen normák szerint.
- Először a **"Súly"** érhető el.

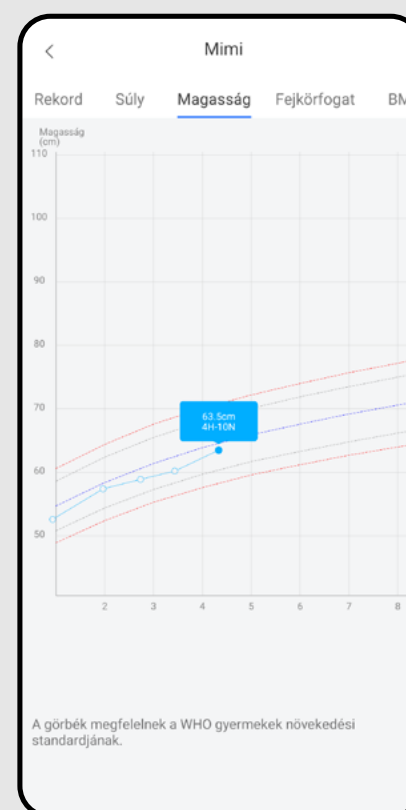4




- A következő követett paraméter a **"Magasság"**.

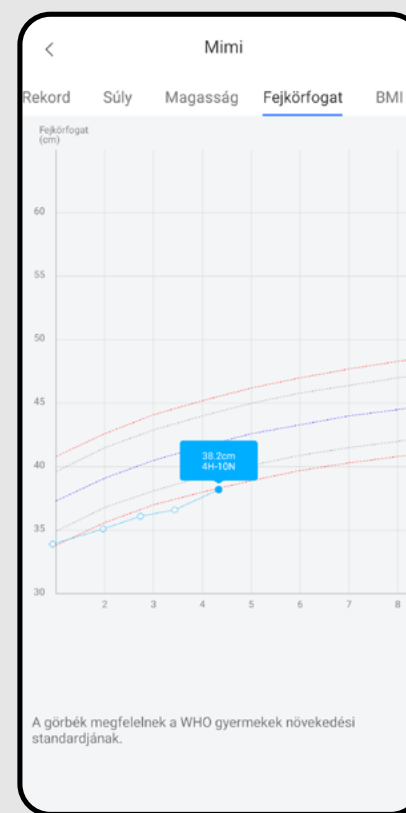5



- A következő követett paraméter a **"Fejkörfogat"**.

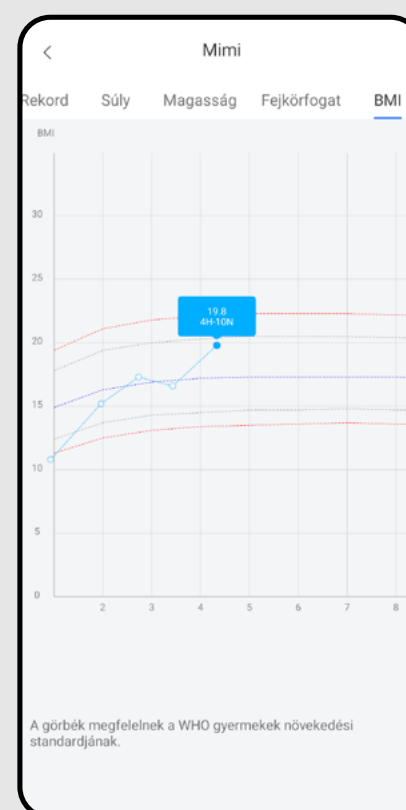
6



- A következő követett paraméter a **"BMI"**.

7. EREDMÉNYEK MEGOSZTÁSA

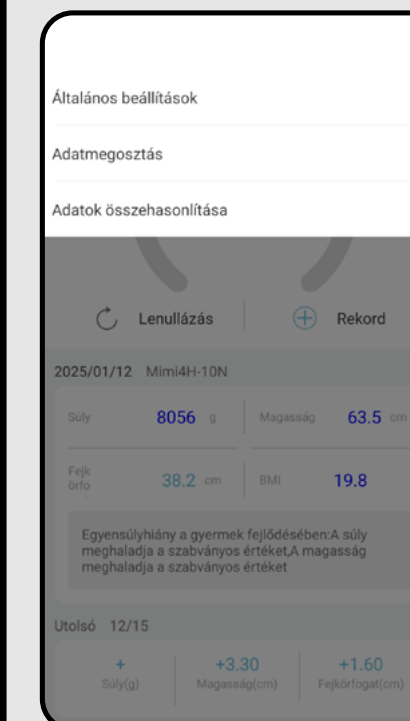1




- A főképernyőn kattintson a jobb felső sarokban lévő "... " ikonra.
- Megjelenik a beállítások menü, ahol két alapvető lehetőség áll rendelkezésre az eredmények megtekintésére és megosztására:
 - A) **Adatok megosztása**
 - B) **Adatok összehasonlítása**

2






- Ez egy egyszerű rögzítés egy konkrét mérésről. A **"Egyéb időpontok"** gombra kattintva megnyílik a dátum szerinti mérések listája. A konkrét mérésre kattintva megtekintheti a jelentést.
- A jelentést tovább lehet osztani a Facebook alkalmazás segítségével, vagy a lemez ikonra kattintva letöltheti az eszköz tárhelyére, ahol az adott képpel különböző alkalmazásokban is dolgozhat.
- **Megjegyzés**
- A zöld ikonok a WeChat alkalmazáshoz tartoznak, amelyet Európában nem javasolunk használni.

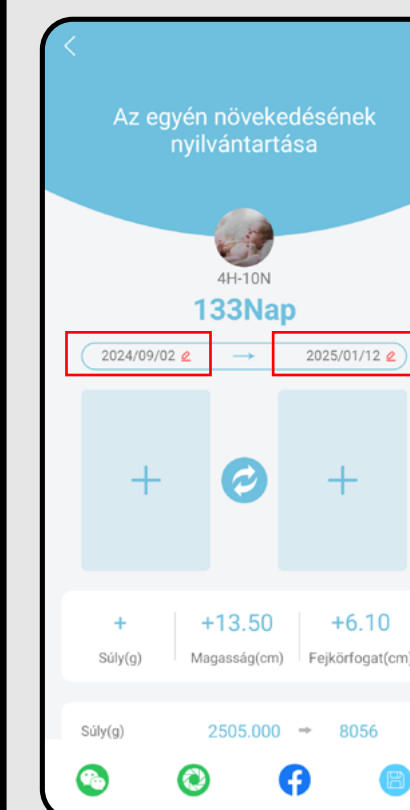3



- Ez egy egyszerű rögzítés egy konkrét mérésről. A mérési dátum ikonokra kattintva megnyílik a dátum szerinti mérések listája. Kattintson a kiválasztott mérésre. Végezze el ezt a bal és jobb oldali dátumok esetében is.
- Bal oldalon válassza a régebbi mérést, jobb oldalon az újabbat. A jelentés a két mérés összehasonlítását készíti el, és megjeleníti a különbségeket.
- A dátum mezők alá fotókat lehet hozzáadni az adott időszakról a jobb vizuális kontraszt érdekében.
- Az eredmények megosztásának módja megegyezik a fenti pontban leírtakkal.

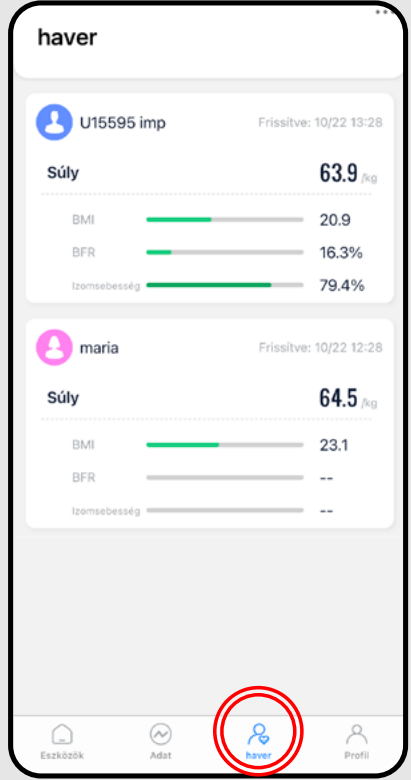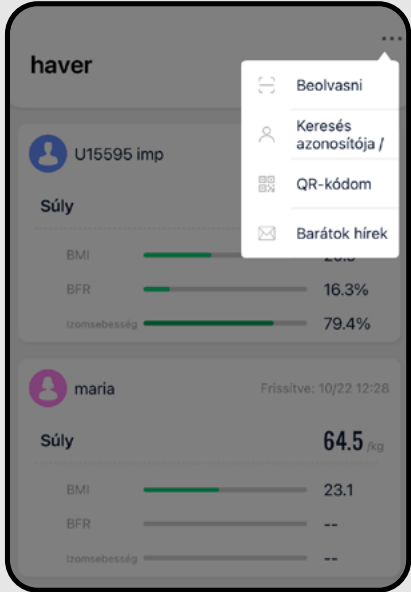
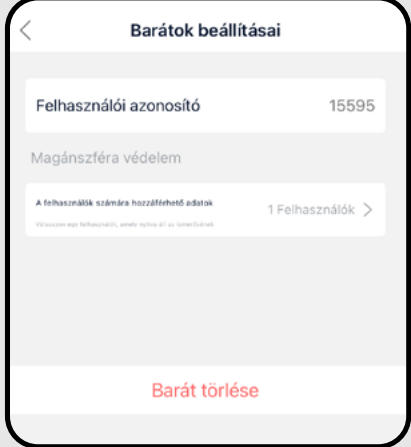
8. BARÁT – MÉRÉSEK MEGOSZTÁSA


| | |
|--|---|
| <p>1</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Megosztási lehetőség mellett az applikáció lehetővé teszi AiLink felhasználói fiókok csatlakozását. Ezzel a lehetőséggel lehet a csatlakozott személy eredményeit látni. Ez fordítva is működik – a csatlakozott személy az Ön eredményeit is látja. Példa: bal oldalon lévő ábrán látható, hogy az aktuális felhasználó „imp” nevű felhasználóval osztja meg az eredményeit. IMP felhasználó több profillal rendelkezik, de csak a fő profilját - „maria” – osztja meg. |
| <p>2</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Új barát hozzáadásához szükséges, hogy az egyik felhasználó lépjen be a „Haver” opcióba és válasszon „...” lehetőséget. Utána 2 opció használható: <ol style="list-style-type: none"> „Beolvasni” opcióval lehet a telefonjából QR kódot szkennelni, amelyet a másik felhasználótól kap. QR kódot lehet úgy létrehozni, hogy a másik telefonján az „QR-kódom” opciót választja ki, ezt a QR kódot leszkenne és a profilok megosztását megerősíti. „Keresés azonosítója” opcióval adja meg a másik fiók e-mail címét és erősítse meg. Miután elküldte a kérést a másik félnek, a másik félnél a „Haver” szekcióban a következő jelek jelennek meg (👤/👤). Válassza ki „...” opciót, kattikjen a „Barátok hírek” opcióra és erősítse meg a kérés elfogadását. <p>Megjegyzés A fiók, ahonnan a kérés érkezik és a fiók, amely a kérést fogadja választhat, melyik alprofilokat szeretné a másik féllel megosztani.</p> |
| <p>3</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Ha megszeretné bármilyen fiók paramétereit változtatni (pl. Felhasználói név, törlés, megosztás, alprofilok módosítása) válassza ki a „Haver” szekcióban az adott profilt és utána „⚙️” ikont. |

9A. BEÁLLÍTÁS - ÁLTALÁNOS rész


| | |
|--|--|
| <p>Az applikáció lehetővé tesz 2 alap beállítási opciót. Általános beállítást (minden eszköz kezeléséhez, amelyeket az applikáció használ) és ETA mérleghez tartozó beállítást. Néhány beállítás közös, néhány pedig egyéni.</p> | |
| <p>1</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Általános beállítás: <ol style="list-style-type: none"> Fő profil kezelése (nézze: 9A-2) Profilok kezelése (nézze: 9A-3) Háztartás kezelése - Háztartások, szobák és hozzá tartozó termékek kezelése. Csak ETA mérleg használata esetén a funkció főlegesen. Visszajelzés - lehet a fejlesztőknek üzeni. Ezt a mezőt inkább ne használja. Javasoljuk inkább az applikációs részben lévő űrlapot használni (lásza 9B-2)! Beállítás - Applikáció nyelvének a kiválasztása, csatlakozott eszközök megjelenítése. Rólunk - Applikáció verziójának és felhasználói feltételek megjelenítése. |
| <p>2</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Profil kiválasztásával (👤 Mimi) lépjen be a profil beállításába. Fiók ID látható, jelszó módosítása, vagy profil törlése lehetséges. Harmadik fél applikációi (WeChat, Facebook) rész, tájékoztatás jellegű, láthatja melyik fiókok vannak csatlakoztatva |
| <p>3</p>  | <ul style="list-style-type: none"> A „Család” szekció a profilok egyszerű kezelését teszi lehetővé. Fő profil és összes alprofil látható. Adott profil kiválasztása után lehet az alap információkat módosítani (kép, név, születési nap, nem), esetleg a profilt törölni. Új alprofil létrehozásához válassza ki a „Családtag hozzáadása” opciót. |

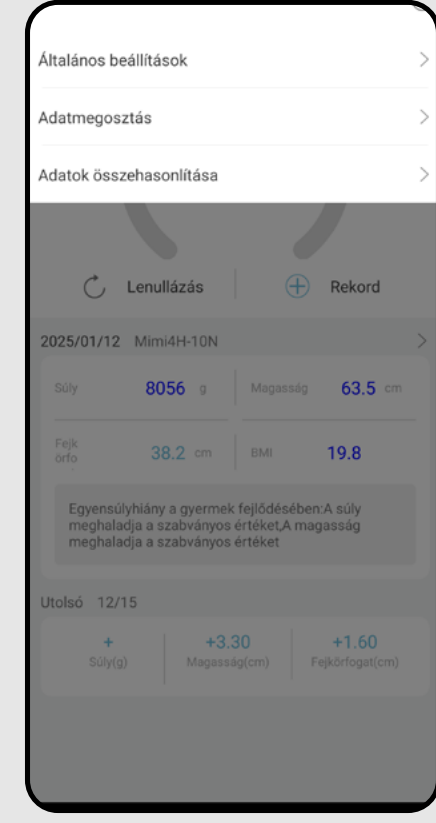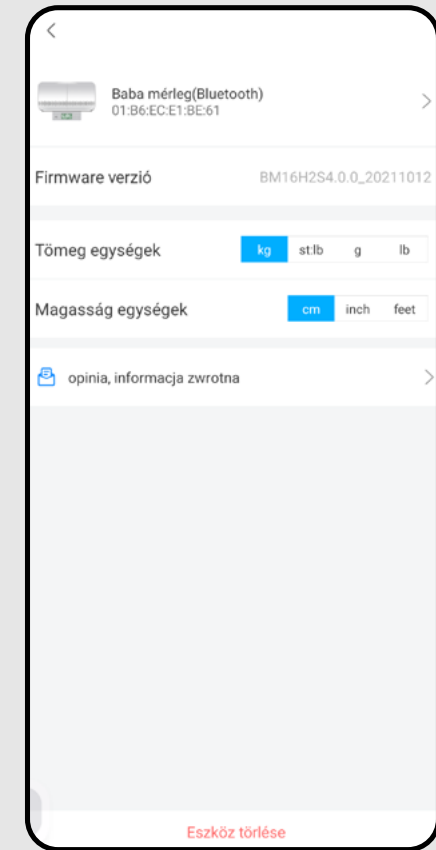
9B. BEÁLLÍTÁS – APLIKÁCIÓ rész

| | |
|---|--|
| <p>1</p>  | <ul style="list-style-type: none"> A főképernyőn kattintson a jobb felső sarokban lévő „...” ikonra. Kattintson az „Általános beállítások” lehetőségre. |
| <p>2</p>  | <ul style="list-style-type: none"> Az alkalmazás részében beállíthatja a súly- és magasságegységeket. Ellenőrizheti a firmware verziót, átnevezheti a mérleget, és visszajelzést küldhet a fejlesztőnek. Használja ezt a lehetőséget (előnyben részesítve az általános beállítások mezőjét). A képernyő alsó részén találja az „Eszköz törlése” lehetőséget, amellyel törölheti az eszközt (megszakítja a párosítást). |

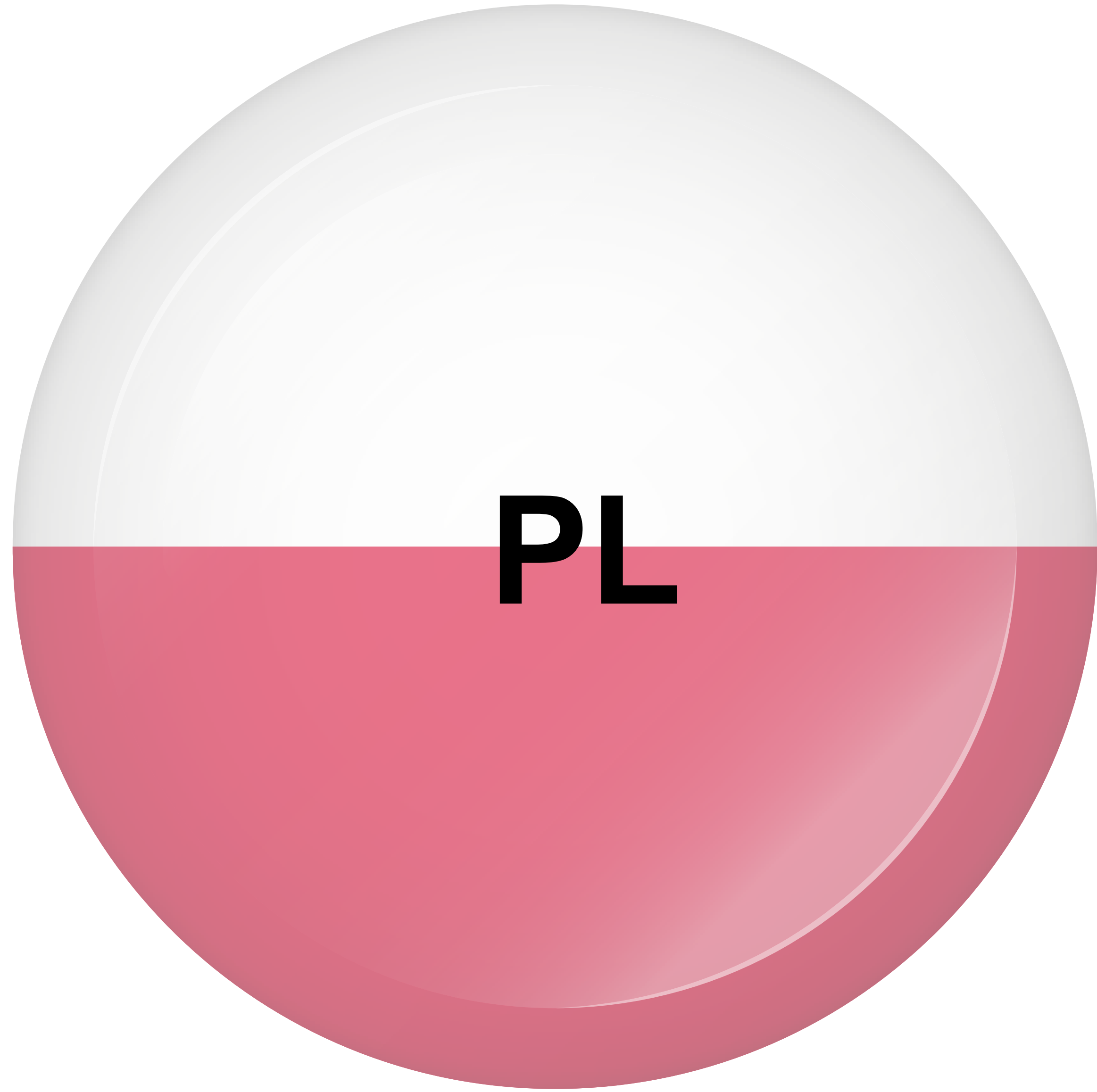

PL

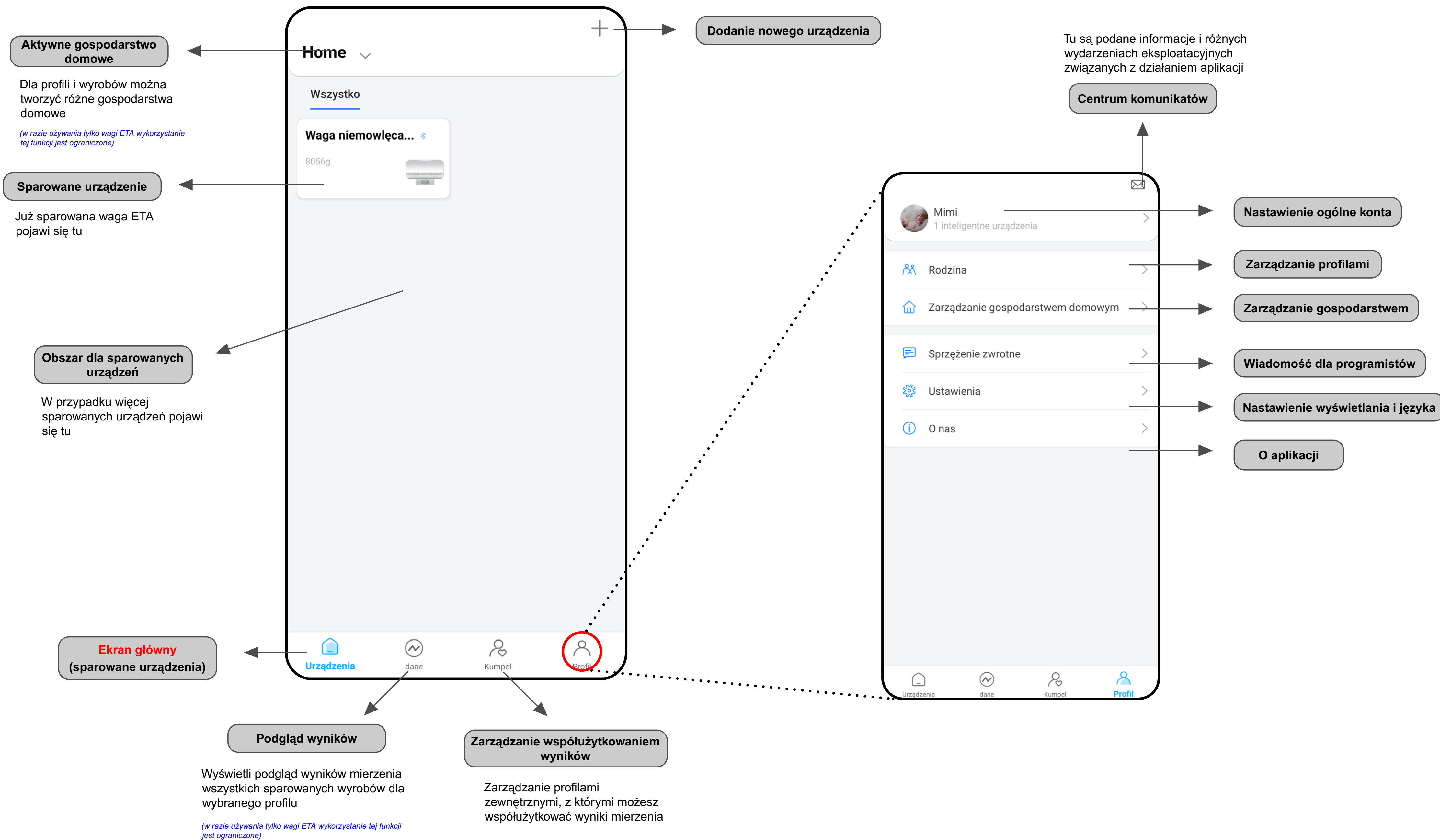

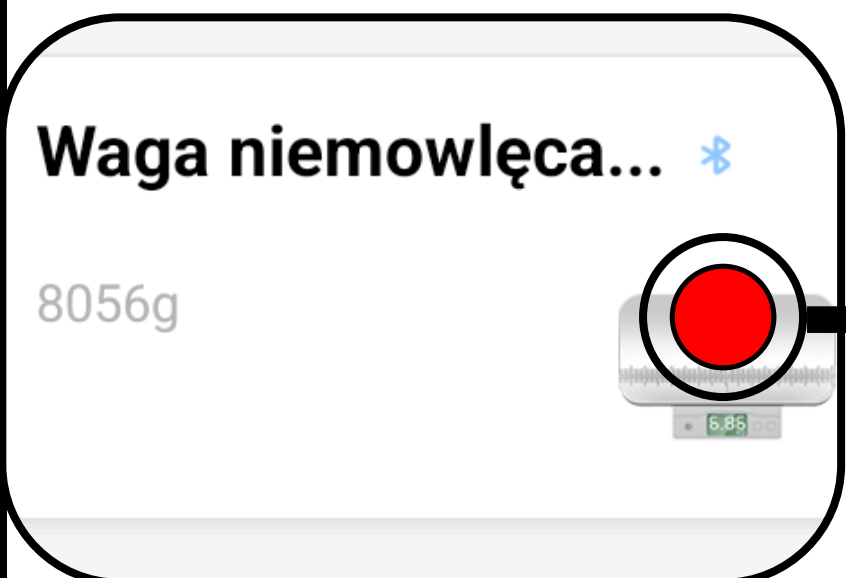


Przejdź do części aplikacji dotyczącej skali ETA

Krótki komentarz na temat wartości

Zero (TARE)
Umożliwia zresetowanie wyników i ponowne ważenie (lub zresetować wagę podkładki itp.).

Zarządzanie profilami
Umożliwia przełączanie między profilami, łącznie z możliwością wytworzenia nowych profili

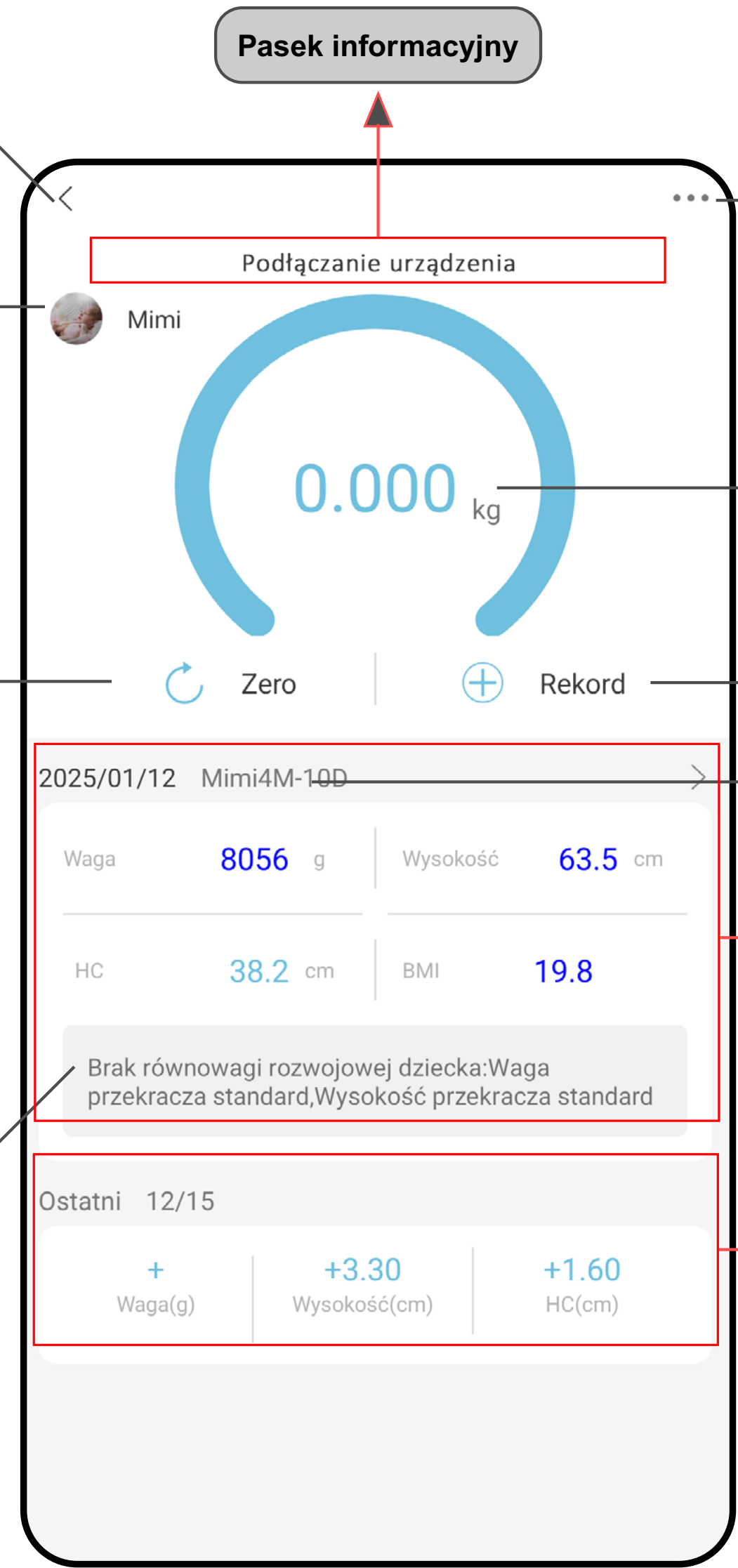Powrót o krok



Pasek informacyjny

Ustawienia ogólne i wyniki udostępniania
Nazwa urządzenia, zmiana jednostek, usuwanie urządzenia i menu udostępniania - umożliwia udostępnianie bieżącego wyniku pomiaru za pośrednictwem obsługiwanych sieci społecznościowych (WeChat, Facebook) lub poprzez zapisanie nagrania w pamięci urządzenia.

Zmierzona waga

Utwórz nowy rekord pomiaru

Wiek dziecka (M<miesiące>-D<dni>)

Pole wyników

Różnica w stosunku do ostatniego pomiaru

2025/01/12 Mimi4M-10D

| | | | |
|------|---------|----------|---------|
| Waga | 8056 g | Wysokość | 63.5 cm |
| HC | 38.2 cm | BMI | 19.8 |

Brak równowagi rozwojowej dziecka:Waga przekracza standard,Wysokość przekracza standard

Ostatni 12/15

| | | |
|---------|--------------|--------|
| + | +3.30 | +1.60 |
| Waga(g) | Wysokość(cm) | HC(cm) |

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie do produktów marki ETA. Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla wszystkich właścicieli wagi ETA7306, którzy chcą w pełni wykorzystać jej potencjał z pomocą aplikacji AILINK.

Blizsze informacje i rady dotyczące Twojej wagi znajdziesz też na naszych stronach internetowych:

www.eta-polska.pl/care

Te strony internetowe nieustannie aktualizujemy i gromadzimy tu najnowsze informacje o danym wyrobie.

W razie pytań dotyczących działania aplikacji, lub w razie jakichkolwiek problemów należy najpierw przejść na podane powyżej strony internetowe, a jeżeli tam podane informacje nie pomogą w rozwiązaniu problemu, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: sprzedaz@digison.pl

1. INSTALACJA APLIKACJI

Aplikację znajdziesz w bazie danych aplikacji Apple Store lub Google Play, lub możesz dla przyspieszenia użyć następującego kodu QR:




Pobierz aplikację i zainstaluj w swoim telefonie komórkowym (tablecie).

| KOMPATIBILITA | |
|--|---|
| System operacyjny telefonu komórkowego (tabletu) | Android 8.0 i nowszy IOS 11.0 i nowszy |


2. REJESTRACJA KONTA I ZALOGOWANIE

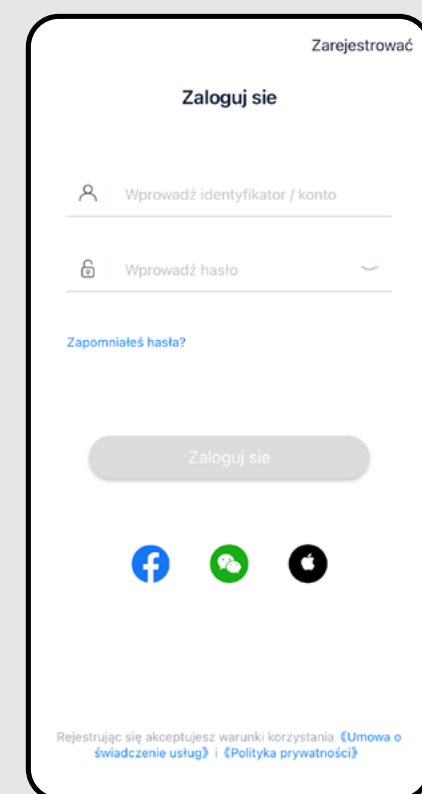1




- Jak tylko pobierzesz aplikację, włącz ją. Pojawi się ekran główny umożliwiający zalogowanie.
- Ekran umożliwia też przełączenie na rejestrację nowego konta, wznowienie hasła w razie jego straty, lub zalogowanie z pomocą aplikacji trzecich stron.
- Jeżeli nie masz wytworzonego konta, kontynuuj na „Zarejestrować“ (ewentualnie zaloguj się z aplikacji trzeciej strony)
- W celu zalogowania wpisz nazwę swojego konta (e-mail) i hasło, następnie kliknij w „Zaloguj sie“. W przypadku OS Android musisz przed zalogowaniem potwierdzić kliknięciem w pole akceptacji warunków korzystania w lewym dolnym rogu.

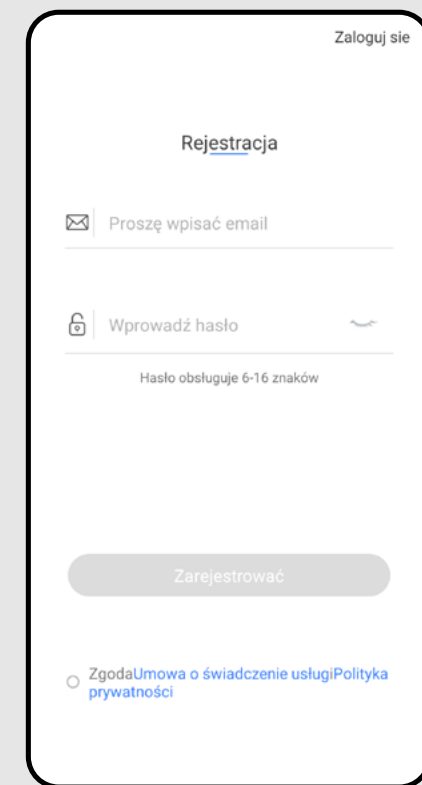2



- Wpisz prawidłowy adres e-mail i wybierz bezpieczne hasło.
- Potwierdź zgodę na świadczenie usług i zasady, a proces zakończ kliknięciem na „Zarejestrować“.

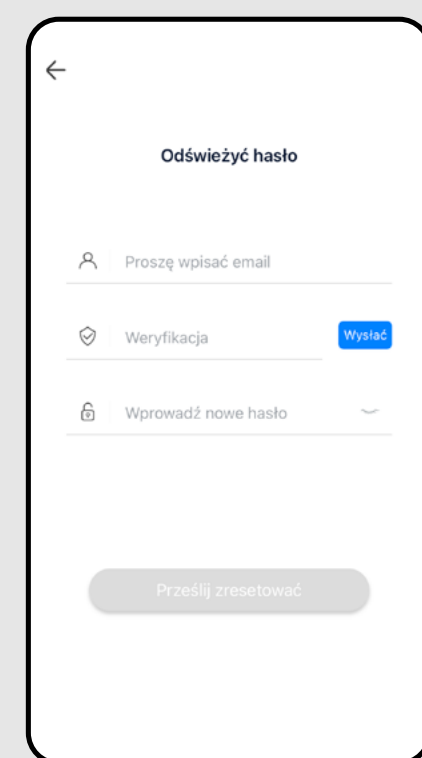
3



- W przypadku straty hasła można je wznowić za pośrednictwem adresu e-mail użytego do założenia konta.
 - Zadaj dany e-mail i po otrzymaniu kodu weryfikacyjnego wpisz go do odpowiedniego pola.
- Uwaga: Zasłanie kodu weryfikacyjnego może chwilę trwać. Bądź cierpliwy. Jednocześnie kontroluj, czy kodu nie blokuje koszt/filtr spamowy twojego klienta pocztowego. W idealnym przypadku używaj zwykłych adresów e-mail/klientów (np. gmail, itp.).**

3. PAROWANIE URZĄDZEŃ

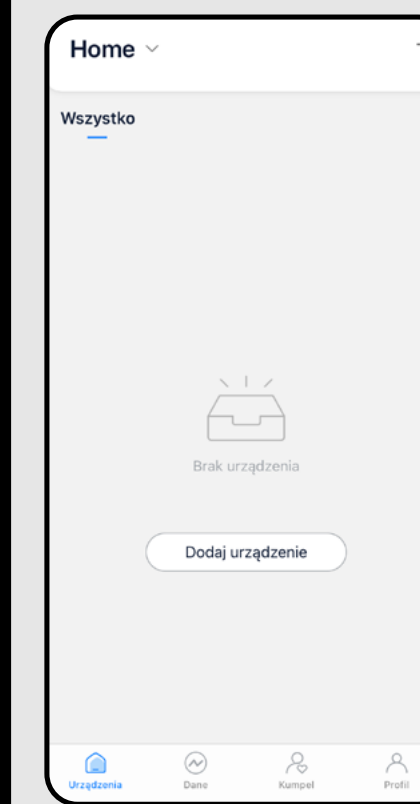
1



- Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się ekran główny, w tym przypadku bez sparowanego urządzenia.
 - W celu sparowania aplikacji z wagą kliknij „Dodaj urządzenie“.
- * W przypadku, kiedy masz jakieś urządzenie już sparowane, wykorzystaj w prawym górnym rogu ikonę „+“, która w taki sam sposób umożliwi dodanie następnego urządzenia.*



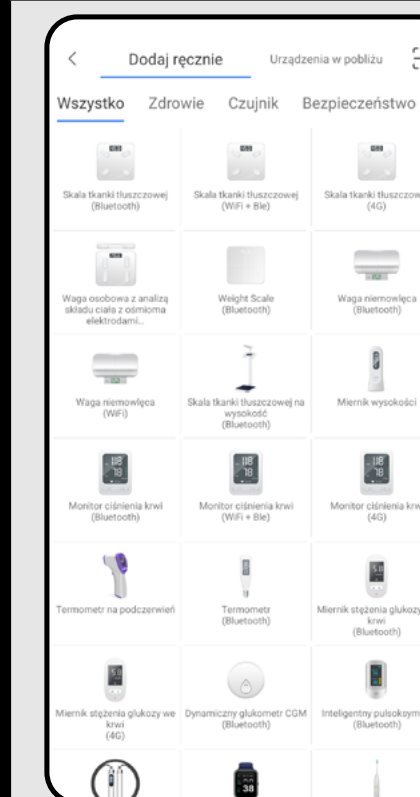
2



- Pojawi się lista różnych rodzajów urządzeń, do których jest przeznaczona aplikacja.

Uwaga: Spółka ETA wykorzystuje aplikację tylko dla wagi ETA7306 i ETA8781. Żadne inne urządzenie podane w aplikacji nie jest aktualnie obsługiwane.

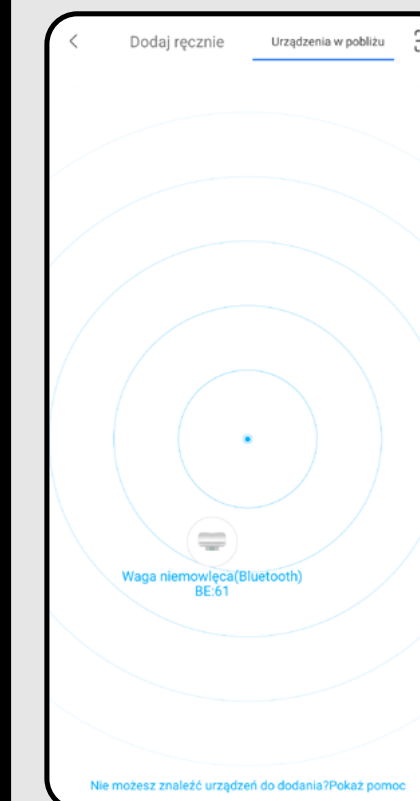3



- Najlepszym sposobem jest automatyczne wyszukanie urządzenia, na które przejdziesz klikając w „Urządzenia w pobliżu“.
- Zacznie się automatycznie wyszukiwanie urządzeń w najbliższej okolicy.
- Włącz wagę, naciskając przycisk zasilania.
- Jak tylko waga pojawi się w aplikacji, kliknij w jej ikonę.

| | | |
|---|--|--|
| 4 | | <ul style="list-style-type: none"> • Rozpocznie się proces parowania. |
| 5 | | <ul style="list-style-type: none"> • W następnym kroku aplikacji zaoferuje możliwość dodania własnej nazwy wagi i przyporządkowania wagi i kategoryzacji według pomieszczenia, w którym będzie używana. • W celu potwierdzenia kliknij w „Zaczniij korzystać“. <p style="text-align: center;">Uwaga</p> <p>Funkcja kategoryzacji produktów według pomieszczeń ma sens raczej w razie używania kilku produktów obsługiwanych przez aplikację. W naszym przypadku (tylko używanie wagi ETA) tej funkcji nie musisz używać.</p> |
| 6 | | <ul style="list-style-type: none"> • Jeśli to Twoje pierwsze logowanie, aplikacja może poprosić Cię o utworzenie profilu. • Aby korzystać z wagi dziecięcej, należy utworzyć profil dla dziecka – z podaniem daty urodzenia i płci. • Jeśli profil będzie zawierał datę urodzenia z dalekiej przeszłości, aplikacja nie będzie działać poprawnie i nie wyświetli wszystkich opcji. |
| 7 | | <ul style="list-style-type: none"> • W ostatnim kroku konfiguracji urządzenia zostanie wyświetlona opcja ustawienia jednostek wagi i wzrostu. • Aby potwierdzić, kliknij „OK“. <p style="text-align: center;">Notatka</p> <p>Aby anulować parowanie/usunięcie urządzenia, zrób to w sekcji ustawień, patrz 9B-2</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 8 | | <ul style="list-style-type: none"> • Drugim sposobem jest ręczne parowanie. • Na liście urządzeń wybierz "Waga niemowlęca (Bluetooth)". |
| 9 | | <ul style="list-style-type: none"> • Kliknij "Kolejny". |
| 10 | | <ul style="list-style-type: none"> • Włącz wagę, zacznie automatycznie wysyłać sygnał, który zostanie wykryty przez Twój telefon komórkowy i wyświetli znalezione urządzenie w aplikacji. • Potwierdź kliknięciem na znalezione urządzenie. • Kolejne kroki są takie same jak w przypadku automatycznego parowania (od kroku 3.5). |

4. PODSTAWOWE RADY DOTYCZĄCE UŻYWANIA

Używanie wagi ETA z aplikacją AiLink jest intuicyjne i podczas naszych testów nie zarejestrowaliśmy żadnych wyraźnych problemów, na które mógłbyś podczas używania natrafić. Pomimo to smart wyroby wykazują ogólnie większe ryzyko związane z niekompatybilnością urządzeń mobilnych, lub na przykład problemami z połączeniem bezprzewodowym. Dlatego podajemy zbiór podstawowych rad i zaleceń, jak ewentualnie rozwiązać problemy charakterystyczne dla segmentu wyrobów smart.

1. Urządzenie smart (telefon komórkowy, ew. tablet):

- a) używaj zawsze aktualnej wersji aplikacji pobranej z oficjalnych źródeł
- b) upewnij się, że Twoje urządzenia mają obsługiwane wersje Android i iOS.
- c) miej aktywną funkcję Bluetooth
- d) miej aktywne połączenie internetowe dla prawidłowej komunikacji aplikacji z serwerem cloudowym
- e) w aplikacji udostępnij wymagane uprawnienia, które w niektórych przypadkach zależą od typu telefonu operacyjnego. W razie problemów skontroluj, czy nie masz w ramach np swojego telefonu jakiegoś nadrzędnego nastawienia systemowego, które uniemożliwia aplikacjom korzystanie z niektórych uprawnień - w takim przypadku musisz udzielić aplikacji wyjątku.
- f) komunikację wagi i telefonu mogą zakłócać niektóre programy (np. VPN, firewall, itp.), których używasz w telefonie. W razie problemów z parowaniem lub z normalną pracą wyłącz te programy.
- g) w razie problemów wypróbuj parowanie z innym telefonem, w ten sposób wykluczysz problem w danym telefonie.

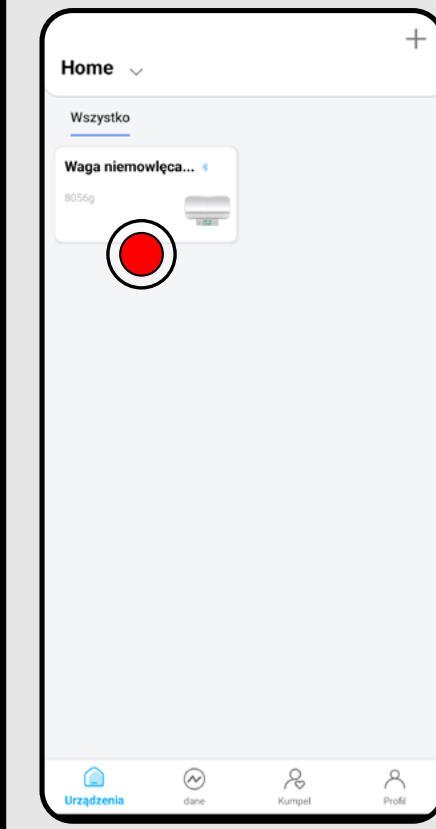
2. Jednostki wagi

Zawsze upewnij się, że używasz dostatecznie naładowanych baterii. Słabe baterie mogą negatywnie wpływać na funkcję połączenia za pośrednictwem Bluetooth, lub sam proces mierzenia. W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że baterie, które były dostarczone z wyrobem, w wyniku magazynowania i transportu mogą mieć obniżoną pojemność, dlatego jest wskazane w razie problemów wypróbowanie nowych baterii.

- Wypróbuj założenie nowego konta, w ten sposób wykluczysz problem z błędną aktywacją konta;
- W trakcie parowania i używania utrzymuj swoje smart urządzenie w pobliżu wagi (najlepiej do odległości ok. 2 m).


5. WAŻENIE

1



- Po włączeniu aplikacji i pomyślnym sparowaniu kliknij w pole/ikonę sparowanej wagi.
- W ten sposób przejdziesz z ogólnej części aplikacji do części do obsługi i zarządzania samą wagą.

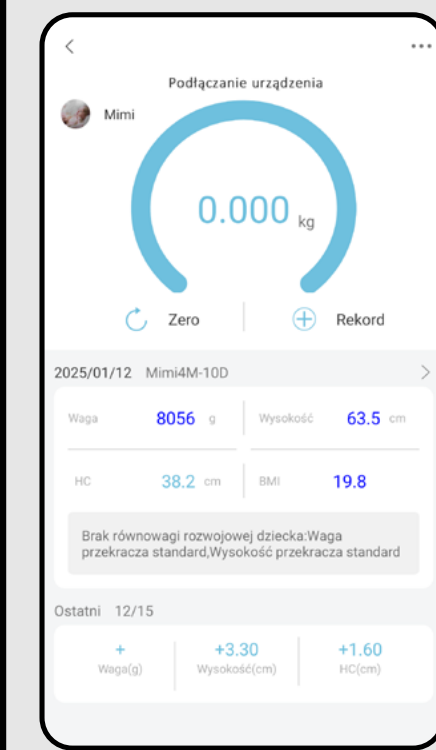
2



- Wyświetlony zostanie podstawowy ekran pomiaru.
- Kliknij ikonę profilu w lewym górnym rogu, aby wybrać profil (jeśli masz więcej niż jeden).
- Włącz wagę i poczekaj, aż waga połączy się z aplikacją – pasek informacyjny wyświetli komunikat „**Podłączony**”.
- Po włączeniu waga automatycznie się połączy. Jeśli pasek informacyjny informuje o „**Nieudanym połączeniu...**”, wystarczy kliknąć na to powiadomienie, aby odnowić połączenie. Waga jednak musi być włączona.


Przed ważeniem zmierz dziecku aktualny wzrost i obwód głowy – te wartości (opcjonalnie) można dodać do wartości wagi.

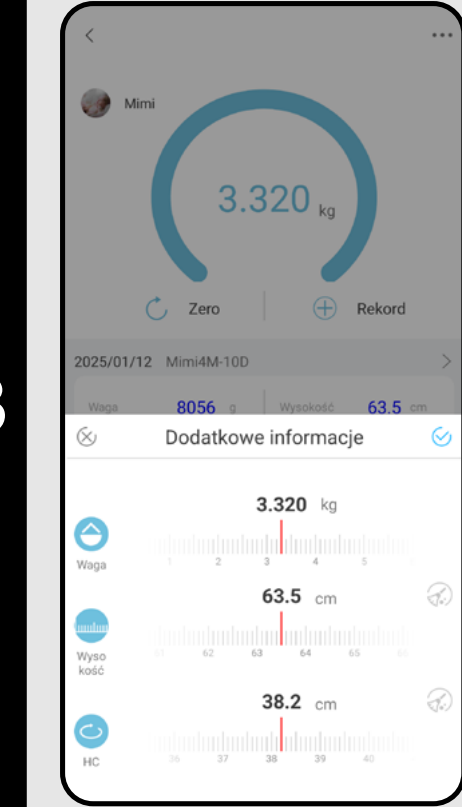3



- Teraz możesz rozpocząć ważenie – postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dołączonej do wagi.
- Po ważeniu dane zostaną automatycznie przesłane do aplikacji, a na ekranie pojawi się opcja dodania wzrostu i obwodu głowy dziecka. Te parametry ustal przed ważeniem i dodaj je w tym kroku.
- Jeśli nie chcesz podawać wzrostu ani obwodu głowy, kliknij ikonę "🚫" po prawej stronie danego parametru.
- Aby utworzyć zapis, kliknij na "📌".

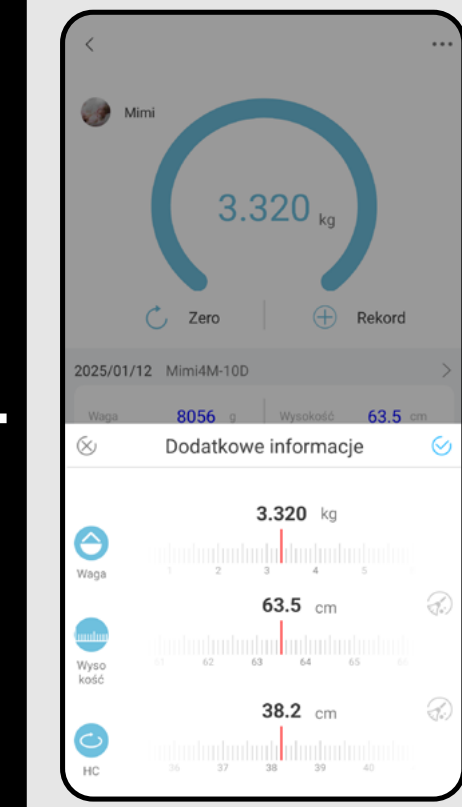4




- Wyniki pomiarów można również wprowadzić ręcznie. Jeśli chcesz utworzyć zapis bez aktualnego ważenia, naciśnij „**Rekord**” na głównym ekranie i ręcznie wprowadź wartości, w tym datę, do której się odnoszą.
- W ten sposób można dodawać wartości również wstecz.

UWAGI

- **Jeżeli podłączenie wagi jest nieudane, upewnij się, że masz w telefonie aktywny Bluetooth, następnie kliknij dla ponownego połączenia w tekst na pasku informacyjnym. Ewentualnie przeczytaj instrukcje w rozdziale 4.**
- Po utworzeniu zapisu nie można zmieniać/dodawać śledzonych parametrów. Można jednak ręcznie dodać nowy zapis, który zastąpi niekompletny pomiar (w tym z możliwością ustawienia daty wstecznej).
- Jeśli dziecko ciągle się porusza i wartość nie jest stabilna, spróbuj w aplikacji nacisnąć (w momencie, gdy ruch jest najmniejszy) „**Rekord**”, aby wymusić stabilizację wyniku pomiaru.
- Zapiski zawierają krótką werbalną ocenę rozwoju dziecka zgodnie ze standardami wzrostu WHO. Oceny te i standardy mają charakter orientacyjny i nie należy wyciągać z nich wniosków zdrowotnych.


6. WYŚWIETLANIE WYNIKÓW

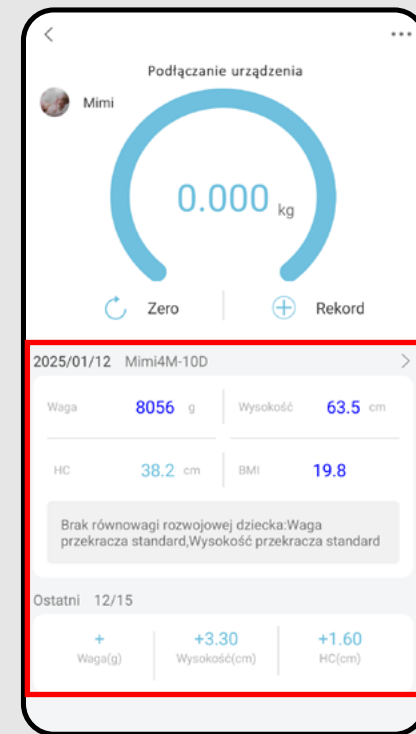1




- Kliknij na jeden z zapisów na głównym ekranie. Przeniesiesz się do sekcji rejestrowania pomiarów i graficznego przedstawienia wyników.
- Przewijając, możesz przeglądać poszczególne zapisy.
- Zapiski zawierają również krótki komentarz tekstowy dotyczący rozwoju dziecka.

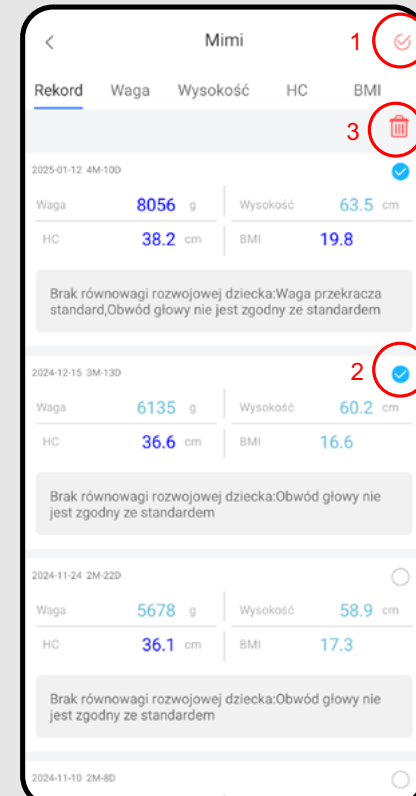2




- Jeśli chcesz usunąć zapis, kliknij ikonę ołówka w prawym górnym rogu (1).
- Następnie wybierz zapis lub kilka zapisów, które chcesz usunąć (2).
- Na koniec potwierdź wybór, klikając ikonę kosza w prawym górnym rogu (3).
- Na koniec proces potwierdź kliknięciem na "OK".

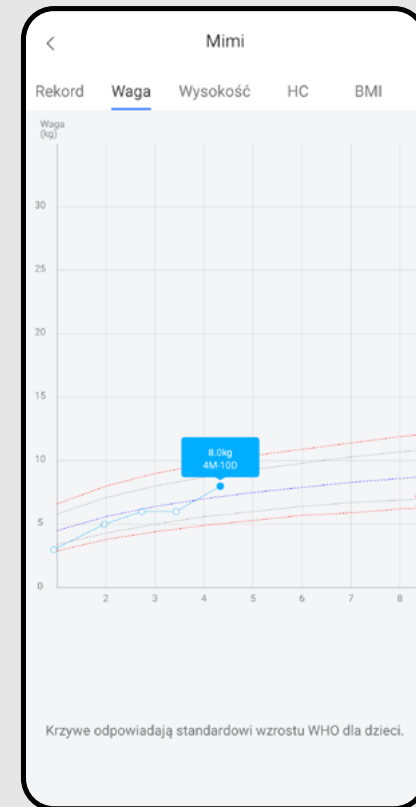3




- Klikając na poszczególne parametry mierzonych wartości na górnym pasku, przejdziesz do ich graficznej reprezentacji.
- Na wykresie są również przedstawione krzywe wzrostu WHO – zobaczysz tam przybliżony rozwój w ramach tych standardów.
- Najpierw dostępna jest "Waga".

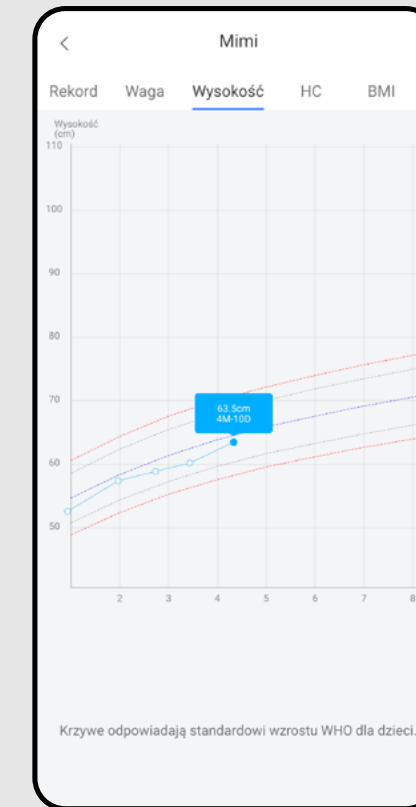4




- Kolejnym mierzonym parametrem jest "Wysokość".

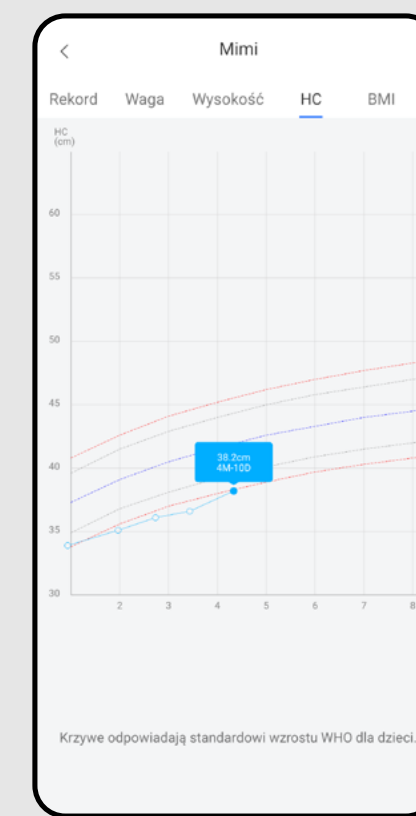5



- Kolejnym mierzonym parametrem jest „Obwód głowy (HC)".

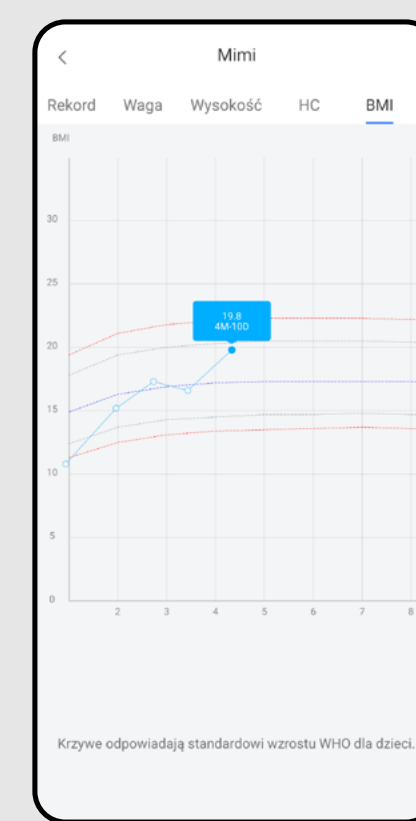
6



- Kolejnym mierzonym parametrem jest "BMI".

7. UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW

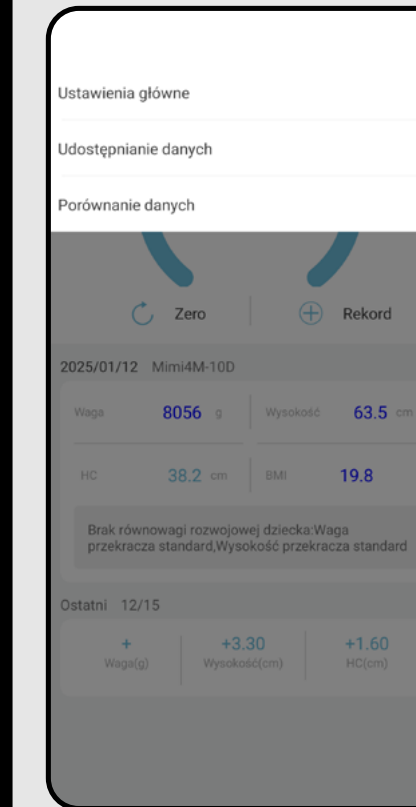
1



- Na głównym ekranie kliknij ikonę "..." w prawym górnym rogu.
- Pojawi się menu ustawień, w którym masz dwie podstawowe opcje wyświetlania i udostępniania wyników:

- A) **Udostępnianie danych**
- B) **Porównywanie danych**

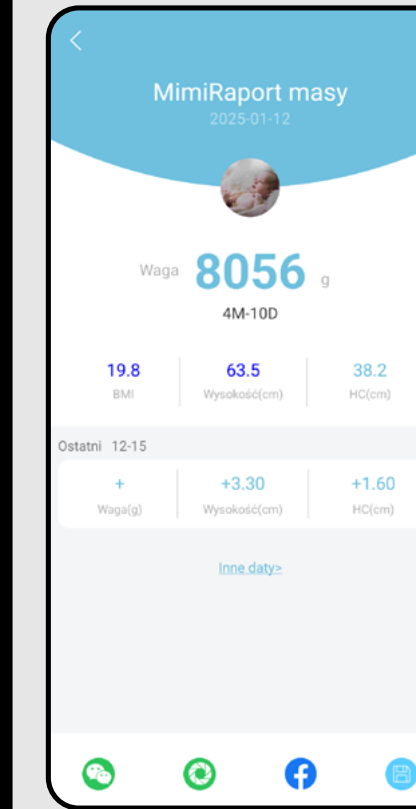2




- Jest to prosty zapis konkretnego pomiaru. Klikając na „Inne daty”, przechodzisz do listy pomiarów posortowanych według daty. Kliknięcie na konkretny pomiar wyświetli raport.
- Raport można udostępnić za pomocą aplikacji Facebook lub klikając ikonę dyskietki, aby zapisać go w pamięci urządzenia, gdzie można go używać w różnych aplikacjach.

Uwaga

- Zielone ikony należą do aplikacji WeChat, której nie zalecamy używać w Europie.

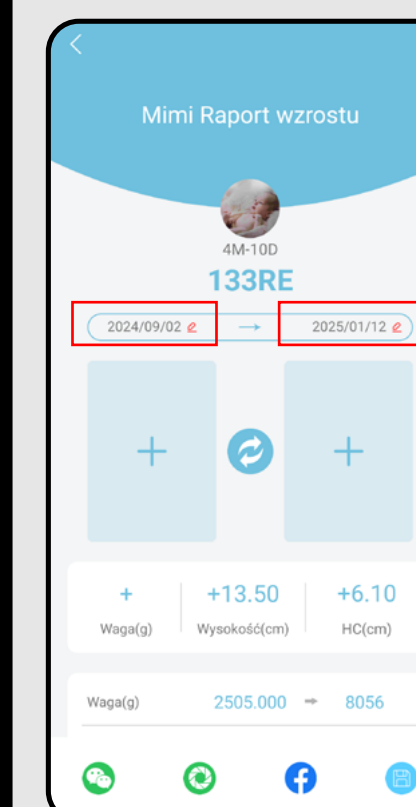3




- Jest to prosty zapis konkretnego pomiaru. Klikając na ikony dat pomiarów, przechodzisz do listy pomiarów posortowanych według daty. Kliknij wybrany pomiar. Zrób to dla daty po lewej i prawej stronie.
- Po lewej wybierz starszy pomiar, po prawej nowszy. Raport stworzy porównanie tych dwóch pomiarów i pokaże różnice.

- Pod polami z datami można dodać zdjęcia z tego okresu dla lepszego wizualnego kontrastu zmiany.
- Sposób udostępniania jest taki sam jak w powyższym punkcie.


8. PRZYJACIEL - WSPÓŁUŻYTKOWANIE MIERZENIA

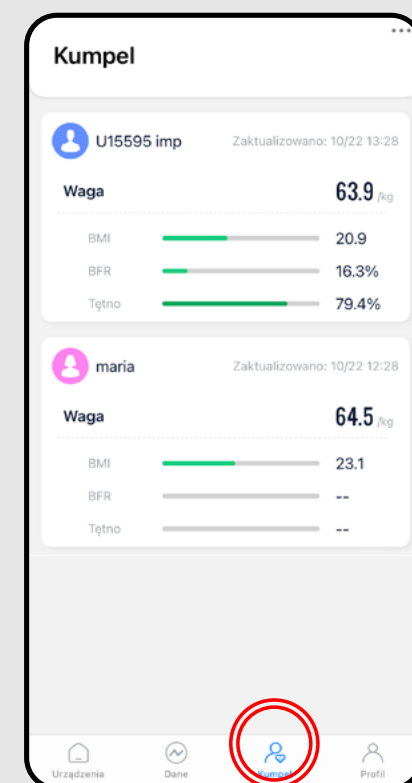1



- Oprócz możliwości współużytkowania własnych wyników aplikacja umożliwia też wzajemne połączenie kont użytkowników AiLink.
- W ten sposób uzyskasz wgląd do wyników osoby, z którą jesteś połączony i na odwrót - ta osoba widzi Twoje wyniki.
- Przykład:** na ilustracji po lewej stronie widzisz, że aktualny profil współużytkuje swoje wyniki z użytkownikiem „imp”. Użytkownik IMP zawiera kilka profili, ale postanowił współużytkować tylko swój główny profil i profil użytkownika „maria”.

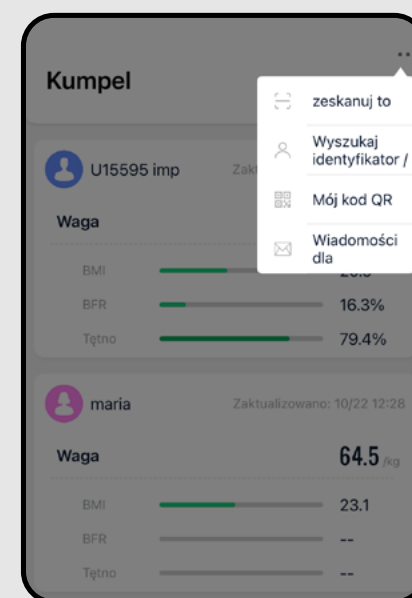2




- Dla dodania nowego przyjaciela jest konieczne, aby jedno z kont wstąpiło do części „Kumpel” i kliknęło w „...”. Następnie masz do dyspozycji 2 możliwości:
 - Z pomocą opcji „Zeskanuj to” można z Twojego telefonu zeskanować kod QR, który otrzymasz od drugiego konta, z którym chcesz współużytkować dane. Kod QR uzyskasz tak, że w telefonie drugiego konta klikniesz w opcję „Mój kod QR”, ten kod QR zeskanujesz i potwierdzisz współużytkowanie profili.
 - Z pomocą opcji „Wyszukaj ID / konto” zadaj e-mail drugiego konta i potwierdź.
- Jak tylko odeślesz drugiej stronie żądanie, pojawi się jej w aplikacji informacja w sekcji „Kumpel”, przy ikonie pojawi się jeden z wyobrażonych czerwonych znaków (👤/👤). Następnie wybierz „...”, przejdź na „Nowości przyjaciół” i potwierdź przyjęcie żądania.

Uwaga

Konto, które wysyła żądanie, wysyłając/ przyjmując żądanie może wybrać, jakie swoje podprofile udostępni drugiej stronie.

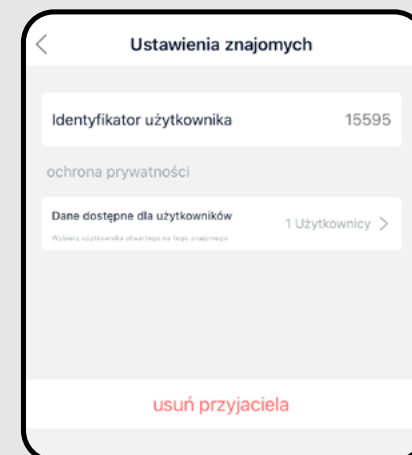3




- Jeżeli chcesz zmienić jakieś parametry współużytkowanego konta (np. nazwę konta, anulowanie współużytkowania, zmiana współużytkowanych podprofilu), kliknij w sekcji „Kumpel” w dany profil a następnie w ikonę nastawienia „⚙️”.

9A. NASTAWIENIE - CZĘŚĆ OGÓLNA


Aplikacja oferuje 2 podstawowe możliwości nastawienia. Nastawienie w ramach ogólnej części aplikacji (która jest wspólna dla zarządzania wszystkimi wyrobami, które są w aplikacji używane) i nastawienie w ramach części aplikacyjnej przeznaczonej dla wagi ETA. Niektóre nastawienia w obu przypadkach pokrywają się, niektóre są specyficzne.

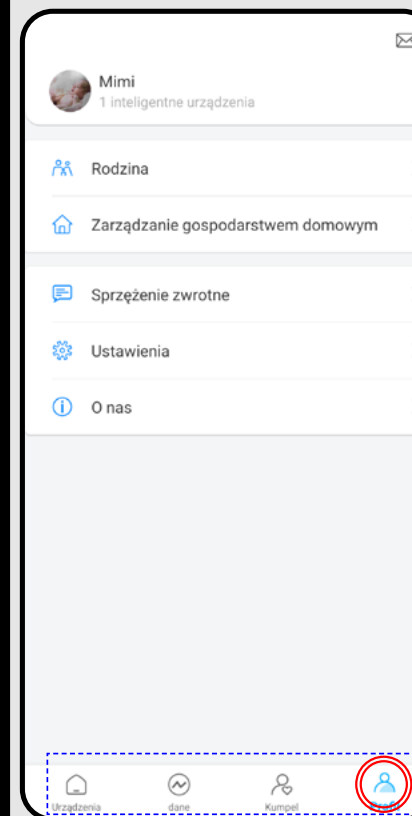1




- W części ogólnej można nastawić:**
 - Zmiana głównego profilu** (patrz poniżej 9A-2)
 - Zarządzanie profilami** (patrz poniżej 9A-3)
 - Zarządzanie gospodarstwem domowym** Zarządzanie gospodarstwem domowym, pomieszczeniami i związanymi z nimi produktami. Do celów używania tylko wagi ETA ta funkcja jest zbędna.
 - Sprzężenie zwrotne** - Można napisać do autorów aplikacji. **Tego pola raczej nie używaj.** Zalecamy skorzystanie z formularza bezpośrednio z części aplikacyjnej patrz 9B-2!
 - Ustawienia** - Możliwość przełączenia języka aplikacji i wyświetlania podłączonych urządzeń.
 - O nas** - Wyświetli wersję aplikacji i możliwość wglądu do warunków umownych aplikacji.

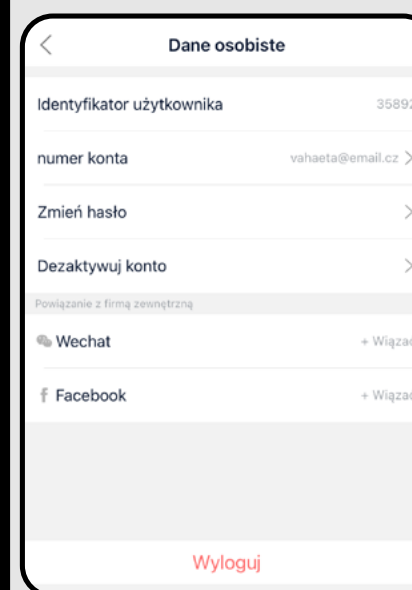2



- Po kliknięciu w ikonę profilu (👤) przejdziesz do nastawienia profilu.
- Tu można uzyskać ID konta, zmienić hasło, lub deaktywować konto.
- Możliwości aplikacji trzecich stron (WeChat, Facebook) w tej części aplikacji służą tylko dla informacji, czy jesteś zalogowany do konta z pomocą tych usług.

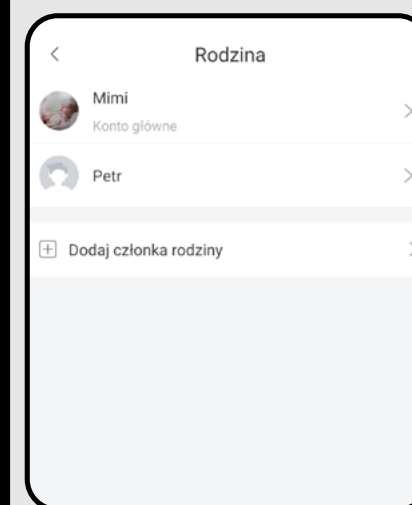
3



- Sekcja „Rodzina” umożliwia łatwe zarządzanie profilami. W menu widzisz zarówno główny profil, jak też wszystkie wytworzone podprofile.
- Po kliknięciu w dany profil możesz zmieniać podstawowe informacje (fotografia, pseudonim, urodziny, płeć) ewentualnie możesz usunąć profil.
- W celu wytworzenia nowego podprofilu kliknij w „Dodaj członka rodziny”.


9B. NASTAWIENIE - CZĘŚĆ APLIKACYJNA

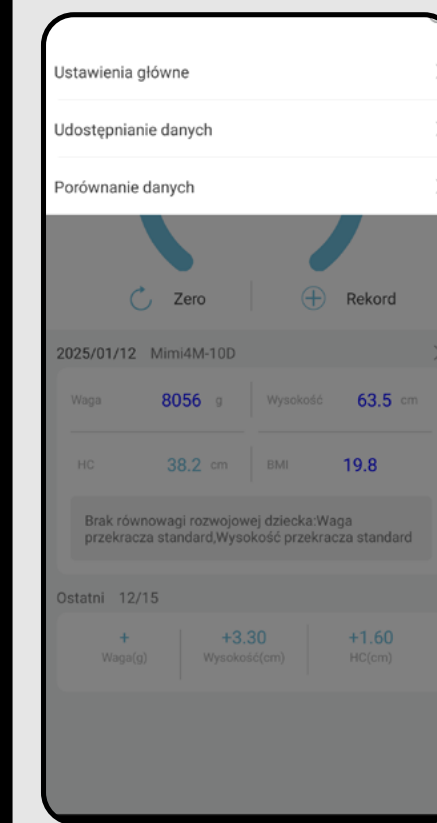1




- Na głównym ekranie kliknij ikonę „...” w prawym górnym rogu.
- Kliknij „Ustawienia główne”.

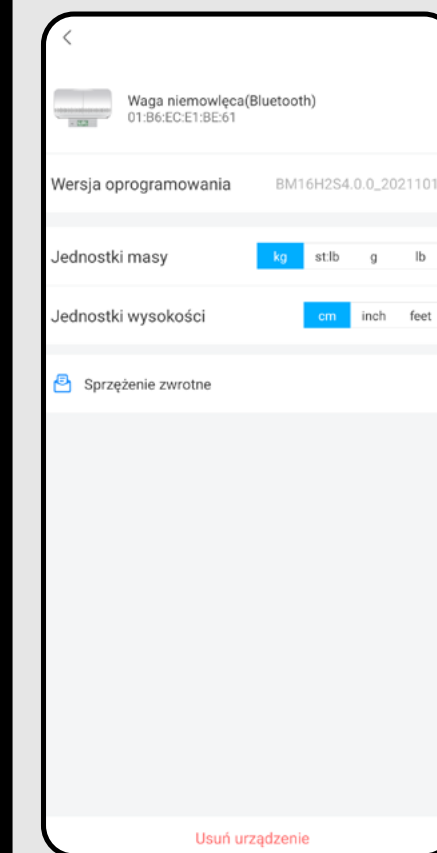
2



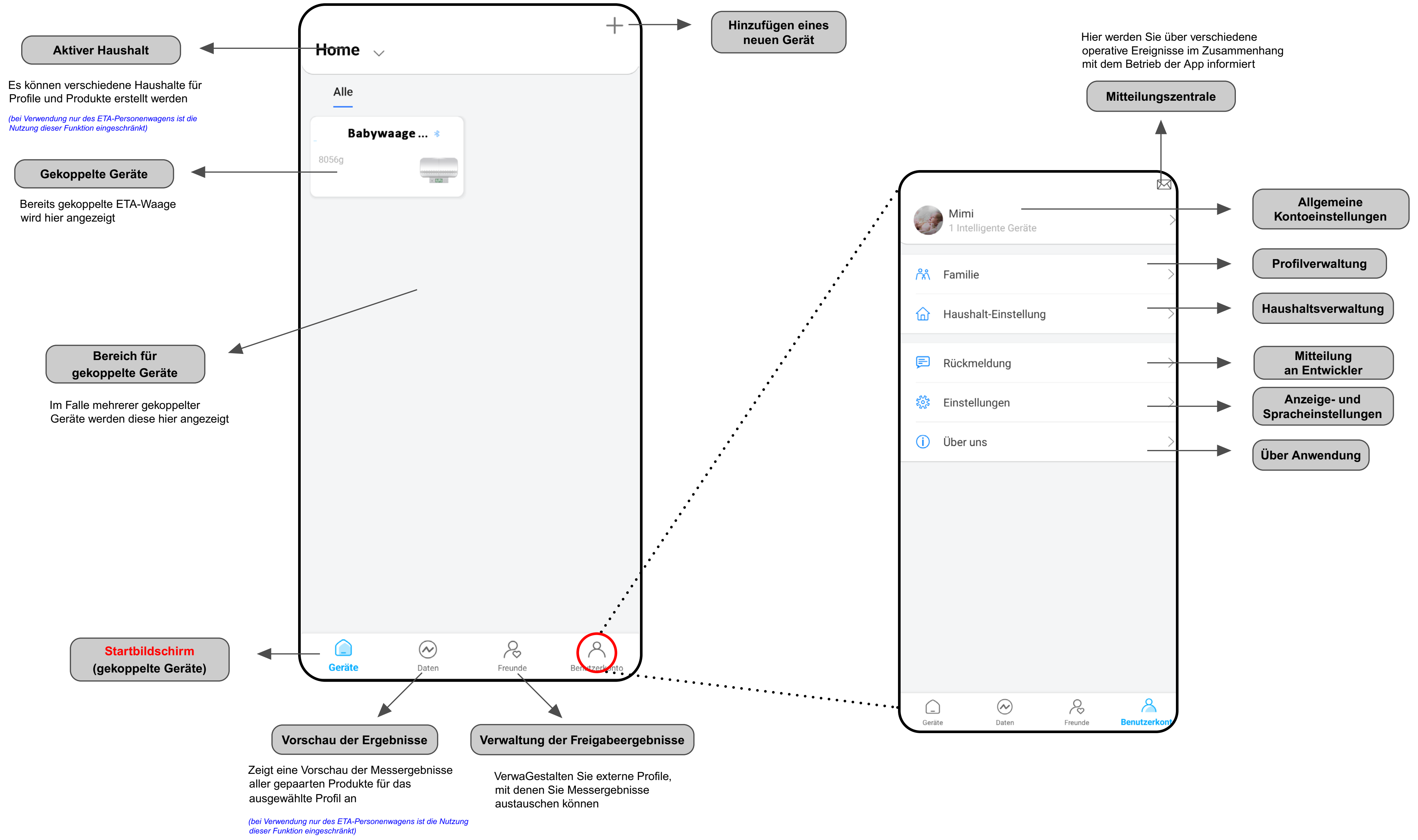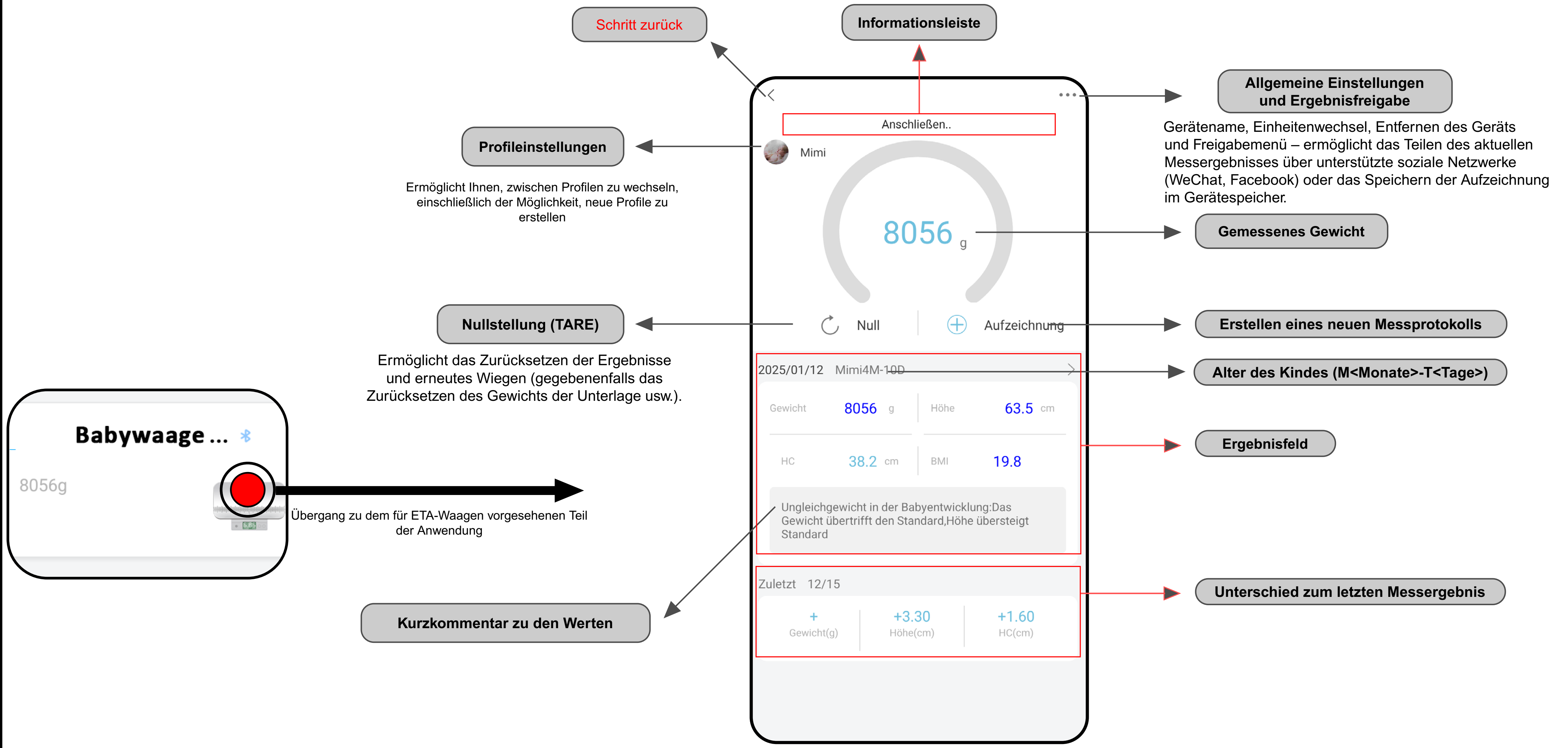- W części aplikacyjnej można ustawić jednostki wagi i wzrostu. Sprawdzić wersję oprogramowania, zmienić nazwę wagi i wysłać opinię do programisty. Najlepiej korzystać z tej opcji (zamiast pola w ogólnej sekcji ustawień).
- Na dole ekranu znajdziesz opcję „Usuń urządzenie”, która usuwa urządzenie (anuluje parowanie).







Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in ETA-Produkte. Diese Anleitung richtet sich an alle ETA7306-Besitzer, die das volle Potenzial der AILINK-App nutzen möchten.

Weitere Informationen, Hinweise und Tipps zu Ihrer Waage finden Sie auch auf unserer Website:

www.eta-hausgeraete.de/produktunterstuetzung-korperplege

Wir aktualisieren diese Website ständig, um das neueste Produktwissen zu sammeln.

Wir aktualisieren diese Website ständig und sammeln die neuesten Informationen über das Produkt. Bei Fragen zur Funktion der Anwendung oder bei Problemen gehen Sie zunächst auf die oben genannte Website. Sollten auch die dortigen Informationen nicht zur Lösung Ihres Anliegen beitragen, können Sie uns unter der Informations-E-Mail kontaktieren:

info@eta-hausgeraete.de

1. INSTALLATION DER APP

Sie finden die App im Apple Store oder Google Play, oder Sie können den folgenden QR-Code verwenden, um den Vorgang zu beschleunigen:




Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobiltelefon (Tablet).

| KOMPATIBILITA | |
|--|---|
| Betriebssystem für Mobiltelefone (Tablets) | Android 8.0 und höher IOS 11.0 und höher |


2. KONTOREGISTRIERUNG UND ANMELDUNG

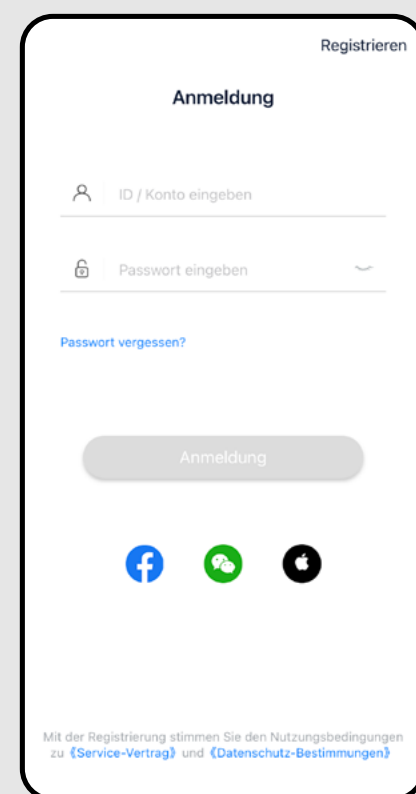1




- Nachdem Sie die Anwendung heruntergeladen haben, schalten Sie diese ein. Der grundlegende Anmeldebildschirm wird angezeigt.
- Auf dem Bildschirm können Sie auch zur Registrierung eines neuen Konto wechseln, Ihr Passwort zurücksetzen wenn Sie es verloren haben oder sich über eine Drittanbieter-App anmelden.
- Wenn Sie noch kein Konto haben, gehen Sie zu **"Registrieren"** (oder mit einer Drittanbieter-App anmelden).
- Geben Sie Ihren Kontonamen ein, um sich anzumelden (E-Mail) mit Passwort und klicken Sie dann auf **"Anmelden"**. Im Fall des Android-Betriebssystem müssen Sie das Kontrollkästchen für die Nutzungsbedingungen in der unteren linken Ecke deaktivieren, bevor Sie sich anmelden.

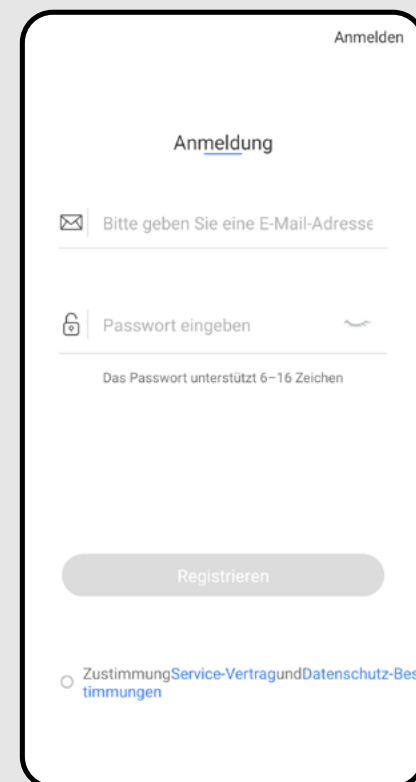2



- Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein und wählen Sie ein sicheres Passwort.
- Bestätigen Sie die Zustimmung zu den Servicebedingungen und Richtlinien und bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf **"Registrieren"** klicken.

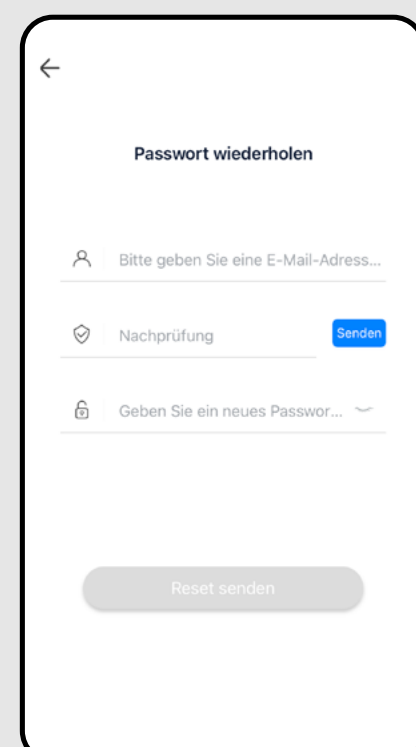
3



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es über die E-Mail-Adresse zurücksetzen, mit der Sie Ihr Konto erstellt haben.
 - Geben Sie die E-Mail ein, und wenn Sie den Bestätigungscode erhalten, geben Sie ihn in das vorgesehene Feld ein.
- Hinweis: Es kann einige Zeit dauern, bis der Verifizierungscode eintrifft. Bitte haben Sie Geduld. Stellen Sie gleichzeitig sicher, dass der Code nicht den Spamkorb/Filter Ihres E-Mail-Clients blockiert. Verwenden Sie idealerweise eine gängige E-Mail-Adressen/Kunden (z.B. gmail, u.ä.).**


3. GERÄTEKOPPLUNG

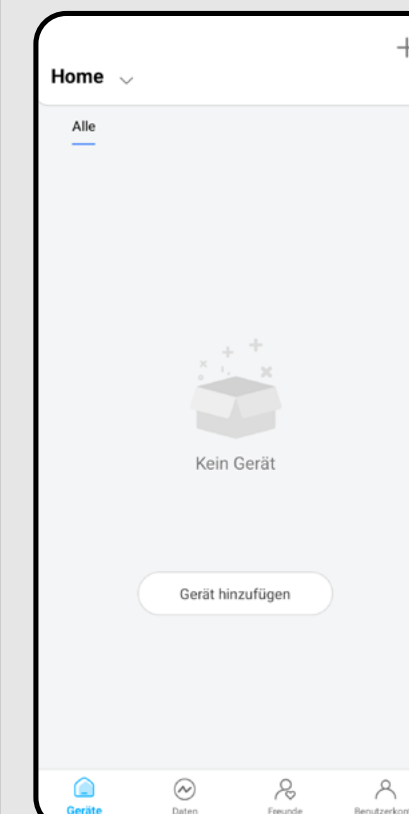1




- Sobald Sie sich erfolgreich angemeldet haben, sehen Sie den Startbildschirm, in diesem Fall ohne das gekoppelte Gerät.
- Um die App mit der Waage zu koppeln, klicken Sie auf **"Gerät hinzufügen"**.

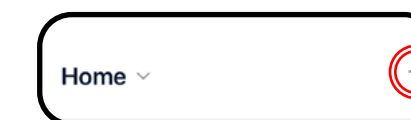* Wenn Sie bereits ein Gerät gekoppelt haben, verwenden Sie das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke, mit dem Sie auf die gleiche Weise ein weiteres Gerät hinzufügen können.




2

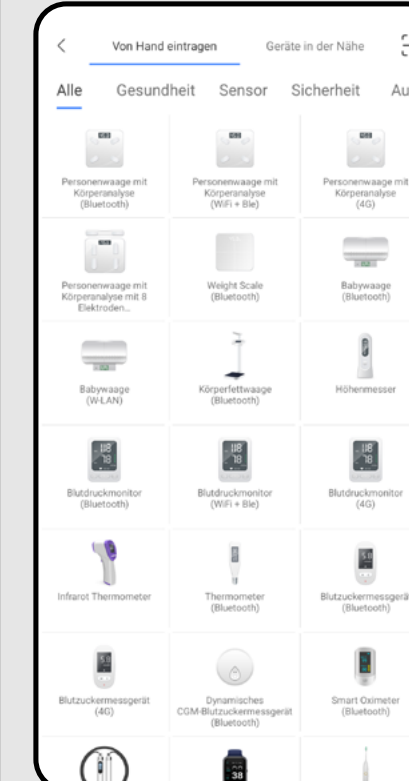

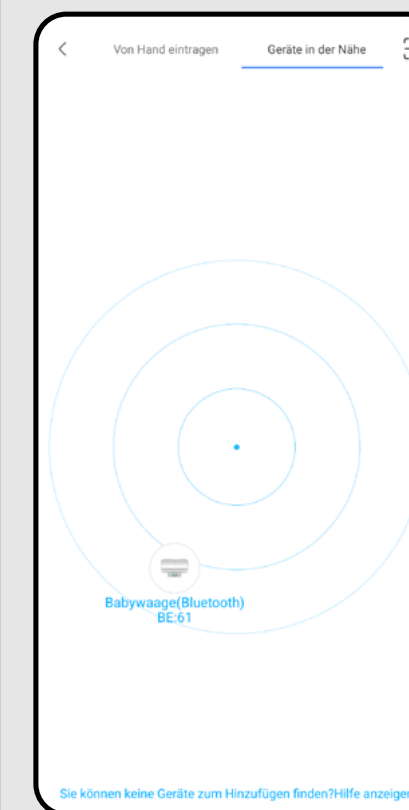
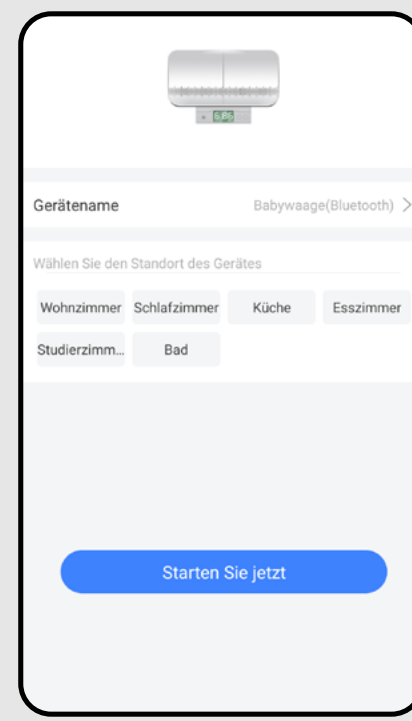
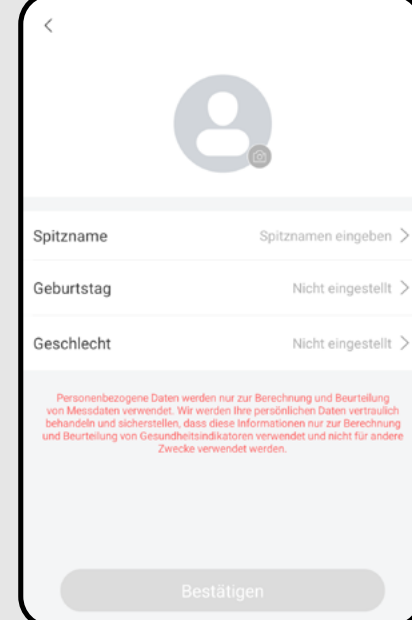
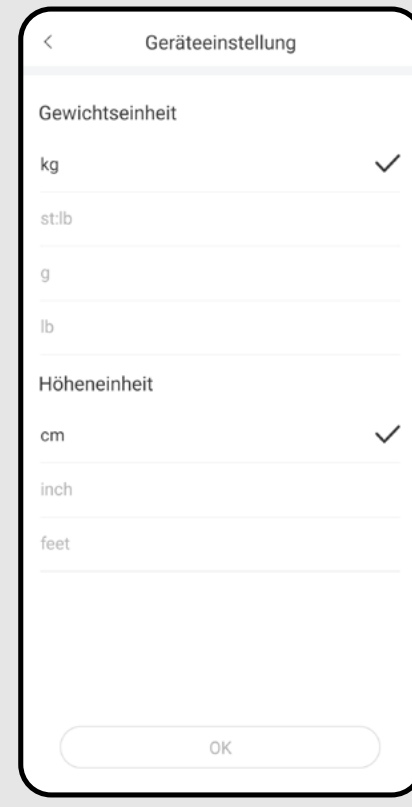
- Es wird eine Liste der verschiedenen Gerätetypen angezeigt, für die die App bestimmt ist.




Anmerkung:
ETA verwendet die App nur für die ETA7306 und ETA8781. Andere Geräte, die in der App aufgeführt sind, werden derzeit nicht unterstützt.

3



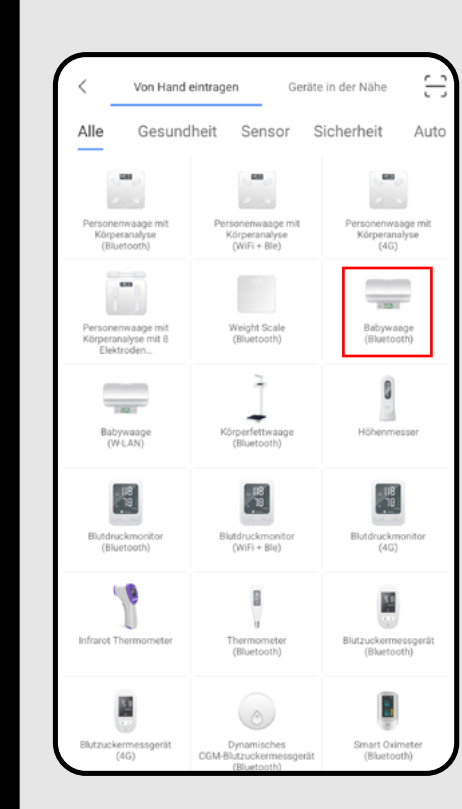- Am besten finden Sie das Gerät automatisch, indem Sie auf **"Geräte in der Nähe"** klicken.
- Die Suche nach Geräten in der Nähe startet automatisch.
- Schalten Sie die Waage ein, indem Sie die Einschalttaste drücken.
- Sobald die Waage in der App erscheint, klicken Sie auf ihre Icon/ Datei.

| | | |
|---|---|---|
| 4 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Der Kopplungsvorgang wird gestartet. |
| 5 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Im nächsten Schritt bietet die App die Möglichkeit, einen eigenen Name für Ihre Waage hinzuzufügen. Ebenfalls können Sie den Raum, in dem diese verwendet werden soll, zuzuordnen und kategorisieren. • Zur Bestätigung klicken Sie auf "Starten Sie jetzt". <p style="text-align: center;">Hinweis Die Funktion, Produkte nach Räumen zu kategorisieren, macht mehr Sinn, wenn mehrere Produkte verwendet werden, die die App unterstützt. In unserem Fall (wir verwenden nur ETA-Waagen) brauchen Sie diese Funktion nicht zu verwenden.</p> |
| 6 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn dies Ihre erste Anmeldung ist, fordert die App Sie auf, ein Profil zu erstellen. • Für die Nutzung der Babywaage muss das Profil auf das Kind erstellt werden – also mit seinem Geburtsdatum und Geschlecht. • Wenn das Profil ein Geburtsdatum weit in der Vergangenheit aufweisen würde, würde die App nicht korrekt funktionieren und nicht alle Optionen anzeigen. |
| 7 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Im letzten Schritt der Geräteeinrichtung wird Ihnen die Möglichkeit angeboten, die Einheiten für Gewicht und Größe festzulegen. • Klicken Sie auf „OK“, um zu bestätigen. <p style="text-align: center;">Notiz Um das Koppeln/Löschen des Geräts abubrechen, tun Sie dies im Einstellungsbereich, siehe 9B-2</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 8 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Die zweite Methode ist die manuelle Kopplung. • Wählen Sie in der Geräteliste "Babywaage (Bluetooth)" aus. |
| 9 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie auf "Weiter". |
| 10 |  | <ul style="list-style-type: none"> • Schalten Sie die Waage ein, sie beginnt automatisch ein Signal zu senden, das von Ihrem Mobiltelefon empfangen wird und das gefundene Gerät in der App anzeigt. • Bestätigen Sie durch Klicken auf das gefundene Gerät. • Die weiteren Schritte sind identisch mit der automatischen Kopplung (ab Schritt 3.5). |

4. GRUNDLEGENDE HINWEISE UND TIPPS ZUR VERWENDUNG

Die Verwendung der ETA-Waage mit AiLink ist intuitiv und wir haben während unserer Test keine signifikanten Probleme oder Schwierigkeiten festgestellt, die bei der Verwendung auftreten könnten. Dennoch bergen hochwertige Produkte im Allgemeinen ein erhöhtes Risiko im Zusammenhang mit der Inkompatibilität von Mobilgeräten oder Problemen mit der drahtlosen Konnektivität. Daher bringen wir eine Reihe grundlegender Ratschläge und Empfehlungen zur Lösung von Problemen mit, die für das Segment der hochwertigen Produkte charakteristisch sind.

1. Smart-Gerät (Handy oder Tablet):

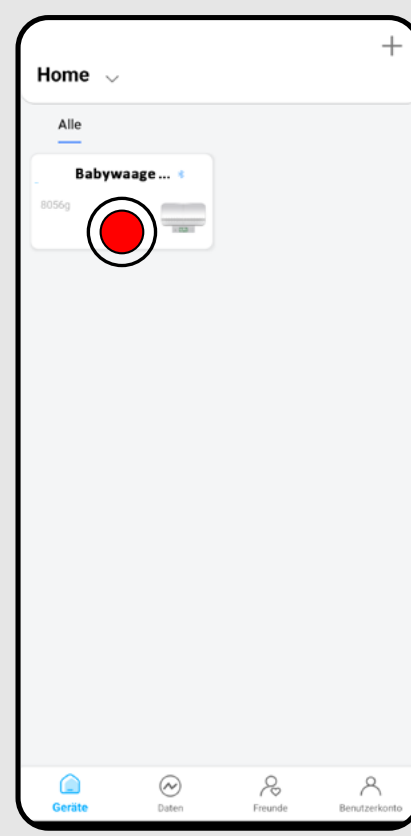
- a) Verwenden Sie immer die neueste Version der App, die von offiziellen Quellen heruntergeladen wurde.
- b) Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte unterstützte Versionen von Android und iOS enthalten.
- c) Lassen Sie die Bluetooth-Funktion aktiv.
- d) Stellen Sie sicher, dass Sie eine aktive Internetverbindung für eine ordnungsgemäße Kommunikation der App mit dem Cloud-Server haben.
- e) Erteilen Sie der App die erforderlichen Berechtigungen, die in einigen Fällen von der Art des Betriebssystems des Telefon abhängen. Stellen Sie bei Problemen sicher, dass Sie beispielsweise keine übergeordneten Systemeinstellungen in Ihrem Telefon haben, die die App daran hindern, bestimmte Berechtigungen zu verwenden. In diesem Fall müssen Sie der App eine Ausnahme erteilen.
- f) Die Kommunikation zwischen der Waage und Ihrem Telefon kann durch einige Programme (z.B. VPN, Firewall u.a.), die Sie auf Ihrem Telefon verwenden, gestört werden. Bei Problemen mit dem Koppeln oder dem normalen Betrieb sollten Sie diese Programme deaktivieren.
- g) Versuchen Sie bei Problemen, die Kopplung mit einem anderen Handy durchzuführen, um ein Problem mit dem Handy auszuschließen.

2. Gewichtseinheit


Stellen Sie sicher, dass Sie immer ausreichend geladene Batterien verwenden. Schwache Batterien können die Funktion der Bluetooth-Verbindung oder den Messvorgang selbst, negativ beeinflussen. In einigen Fällen können die mitgelieferten Batterien aufgrund von Lagerung und Transport eine geringere Kapazität aufweisen. Es ist daher ratsam, neue Batterien zu verwenden, wenn Probleme auftreten.

- Versuchen Sie, ein neues Konto zu erstellen, um das Problem einer falschen Kontoaktivierung zu vermeiden.
- Halten Sie Ihr Smart-Gerät während des Koppeln und der Verwendung in der Nähe der Waage (idealerweise im Abstand von ca. 2 m).


5. WIEGEN

1

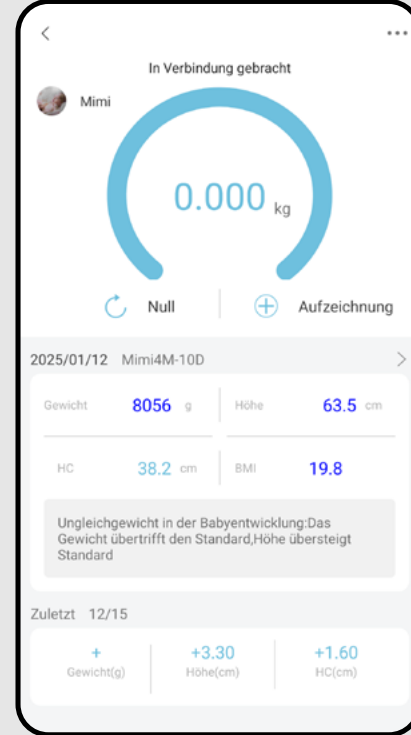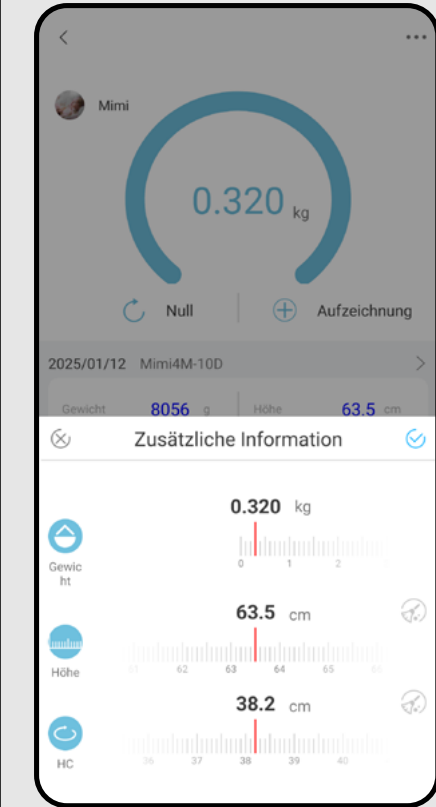
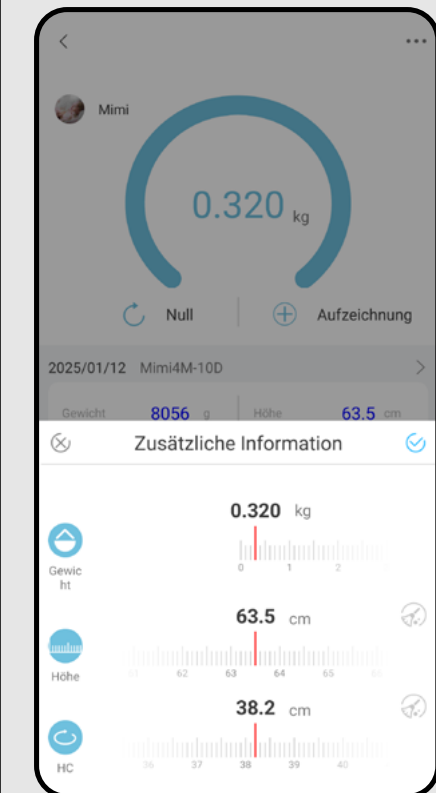
- Klicken Sie nach dem Einschalten der App und erfolgreicher Kopplung auf das Feld / Symbol der gekoppelten Waage.
- Dies führt Sie vom allgemeinen Teil der App zum Kontroll- und Verwaltungsteil der Waage selbst.

2


- Schalten Sie die Waage ein und warten Sie, bis die Waage mit der App verbunden ist – die Informationsleiste zeigt die Meldung „Verbunden“ an.
- Nach dem Einschalten verbindet sich das Gerät automatisch. Sollte die Informationsleiste die Meldung „Verbindung fehlgeschlagen...“ anzeigen, klicken Sie einfach auf diese Meldung, um die Verbindung wiederherzustellen. Die Waage muss jedoch eingeschaltet sein.
- Messen Sie vor dem Wiegen die aktuelle Größe des Kindes und den Kopfumfang – diese Werte können optional zum Gewicht hinzugefügt werden.

3


- Jetzt können Sie mit dem praktischen Wiegen beginnen – folgen Sie der Bedienungsanleitung, die der Waage beigelegt war.
- Nach dem Wiegen werden die Daten automatisch in die App übertragen, und es wird ein Bildschirm angezeigt, auf dem Sie die Größe und den Kopfumfang des Kindes ergänzen können. Messen Sie diese Parameter vor dem Wiegen und fügen Sie sie in diesem Schritt hinzu.
- Wenn Sie die Größe oder den Kopfumfang nicht eingeben möchten, klicken Sie auf das Symbol "🔄" auf der rechten Seite des jeweiligen Parameters.
- Den Datensatz erstellen Sie, indem Sie auf "📌" klicken.

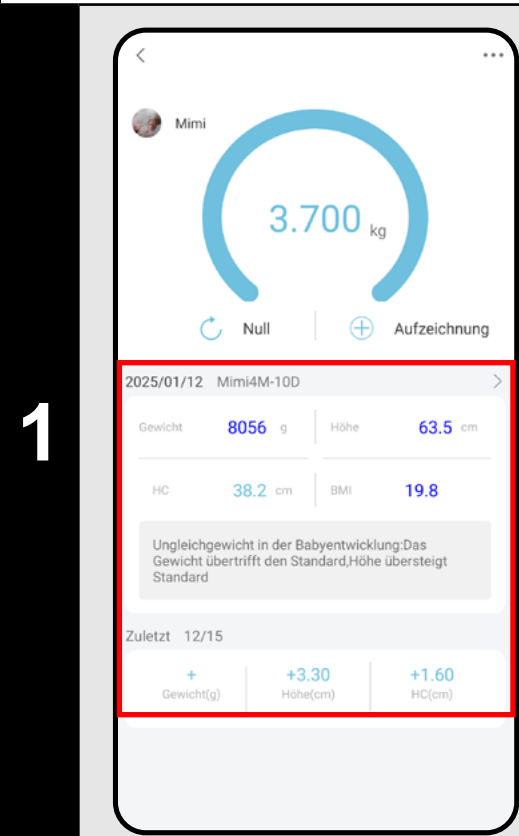
4


- Die Messergebnisse können auch manuell eingegeben werden. Wenn Sie einen Messdatensatz erstellen möchten, ohne aktuell zu wiegen, drücken Sie auf dem Hauptbildschirm „Aufzeichnung“ und geben Sie die Werte manuell ein, einschließlich des Datums, auf das sich die Werte beziehen.
- Auf diese Weise können auch nachträglich Werte hinzugefügt werden.


ANMERKUNGEN

- Wenn die Verbindung zur Waage fehlschlägt, vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Handy aktiviert ist, und klicken Sie dann auf den Text in der Infoleiste, um die Verbindung wiederherzustellen. Alternativ können Sie auch die Anweisungen in Kapitel 3 lesen.
- Wenn die Messung oder Analyse fehlgeschlagen ist, versuchen Sie, den gesamten Wiege-/Messvorgang zu wiederholen. Alternativ können Sie auch die Anweisungen in Kapitel 4 lesen.
- Sobald ein Datensatz erstellt wurde, können die erfassten Parameter nicht mehr nachträglich bearbeitet/hinzugefügt werden. Es ist jedoch möglich, manuell einen neuen Datensatz einzufügen, um eine unvollständige Messung zu ersetzen (einschließlich der Wahl eines rückwirkenden Datums).
- Wenn sich das Kind ständig bewegt und der Wert nicht stabil ist, versuchen Sie, in der App (in dem Moment, in dem die Bewegung am geringsten ist) „Aufzeichnung“ zu drücken, um das Messergebnis manuell zu stabilisieren.
- Die Aufzeichnungen enthalten eine kurze verbale Bewertung der Kindesentwicklung gemäß den Wachstumsstandards der WHO. Diese Bewertungen und Standards sind lediglich Richtlinien und sollten nicht als Grundlage für medizinische Schlussfolgerungen verwendet werden.


6. ANZEIGE DER ERGEBNISSE



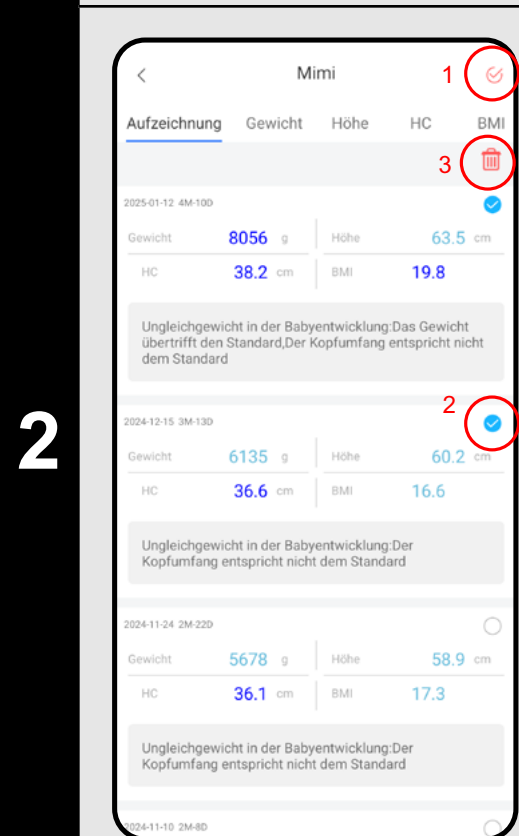
- Klicken Sie auf einen der Einträge auf dem Hauptbildschirm. Dadurch gelangen Sie in den Bereich zur Eintragung von Messdaten und zur grafischen Darstellung der Messergebnisse.
- Durch Scrollen können Sie die einzelnen Einträge anschauen.
- Die Einträge enthalten auch einen kurzen Textkommentar zur Entwicklung des Kindes.



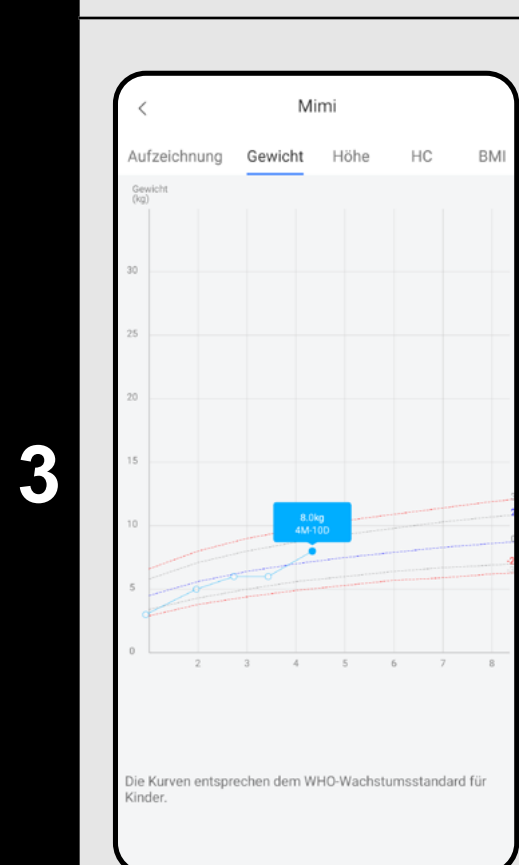
- Wenn Sie einen Eintrag löschen möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke (1).
- Wählen Sie dann durch Klicken den Eintrag oder mehrere Einträge aus (2), die Sie löschen möchten.
- Bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl, indem Sie auf das Mülleimersymbol in der oberen rechten Ecke klicken (3).
- Abschließend bestätigen Sie den Vorgang, indem Sie auf „OK“ klicken.



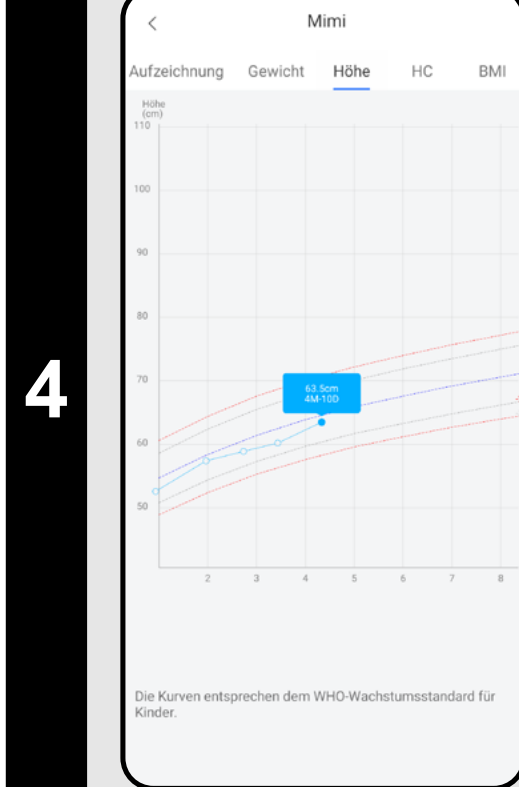
- Durch Klicken auf die einzelnen Parameter der überwachten Messungen in der oberen Leiste gelangen Sie zu deren grafischer Darstellung.
- Im Diagramm sind auch die WHO-Wachstumskurven dargestellt – so können Sie die ungefähre Entwicklung im Rahmen dieser Standards sehen.
- Zuerst steht das „Gewicht“ zur Verfügung.



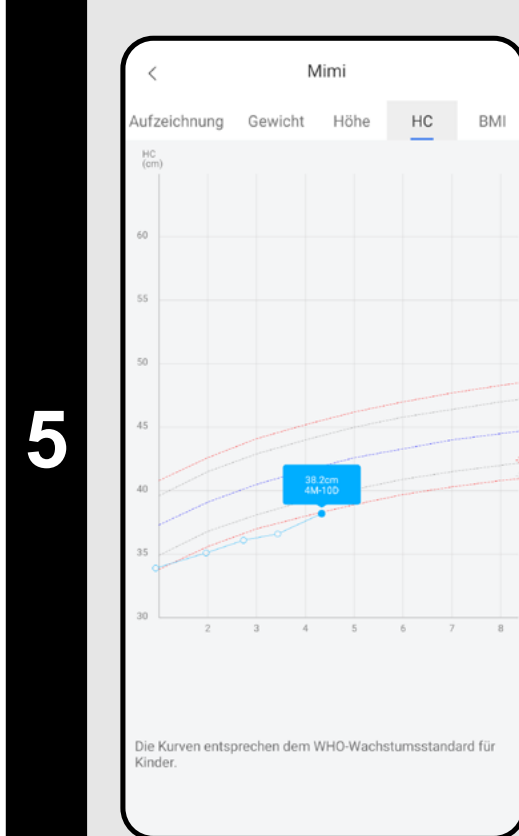- Ein weiterer beobachteter Parameter ist die „Höhe“.




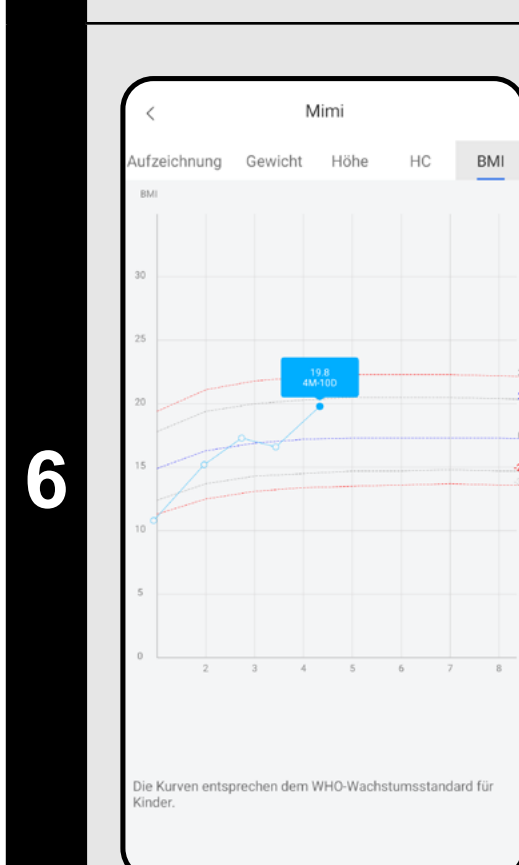- Ein weiterer beobachteter Parameter ist der „Kopfumfang (HC)“.




- Ein weiterer beobachteter Parameter ist der „BMI“.

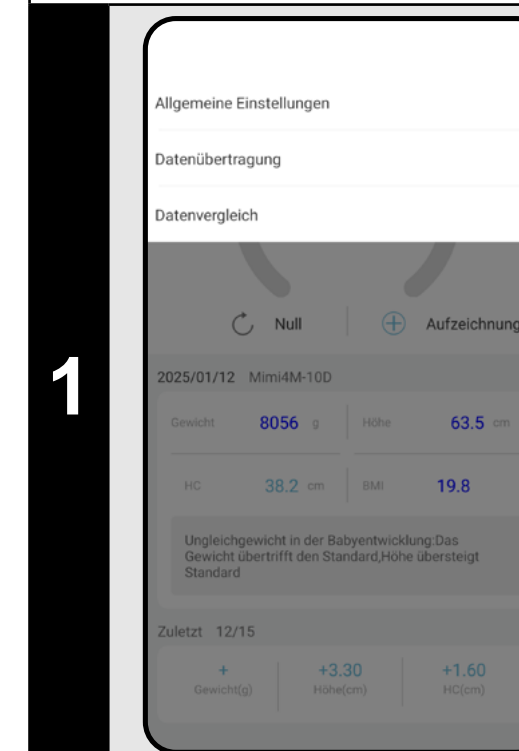
7. TEILEN DER ERGEBNISSE



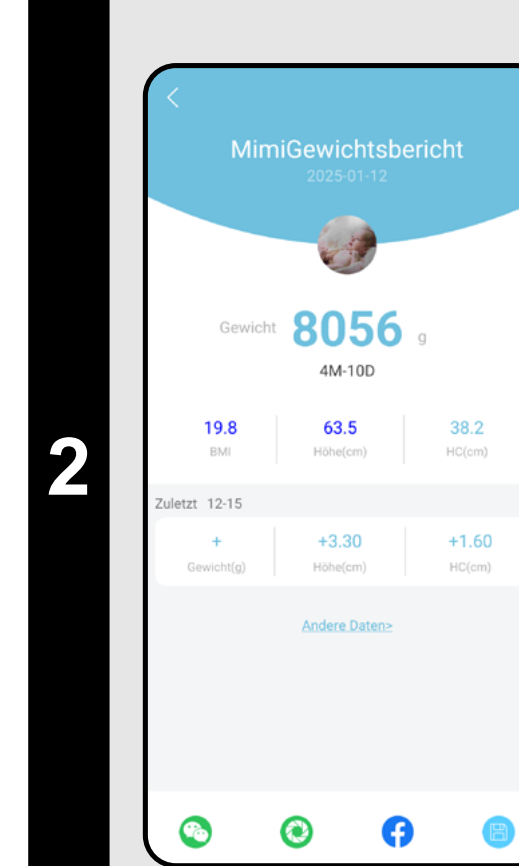- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Symbol „...“ in der oberen rechten Ecke.
- Es wird ein Einstellungsmenü angezeigt, in dem Sie zwei grundlegende Optionen zur Anzeige und zum Teilen der Ergebnisse haben:
A) **Datenübertragung**
B) **Daten vergleichen**




- Datenübertragung**
- Es handelt sich um eine einfache Aufzeichnung einer bestimmten Messung. Durch Klicken auf „Andere Daten“ gelangen Sie zu einer Liste von Messungen, die nach Datum sortiert sind. Durch Klicken auf eine bestimmte Messung wird der Bericht angezeigt.
 - Der Report kann weiter über die Anwendung Facebook geteilt oder durch Klicken auf das Diskettensymbol auf dem Gerätespeicher heruntergeladen werden, um das Bild in verschiedenen anderen Anwendungen weiter zu verwenden.
- Hinweis**
- Die grünen Symbole gehören zur WeChat-App, deren Nutzung in Europa nicht empfohlen wird.

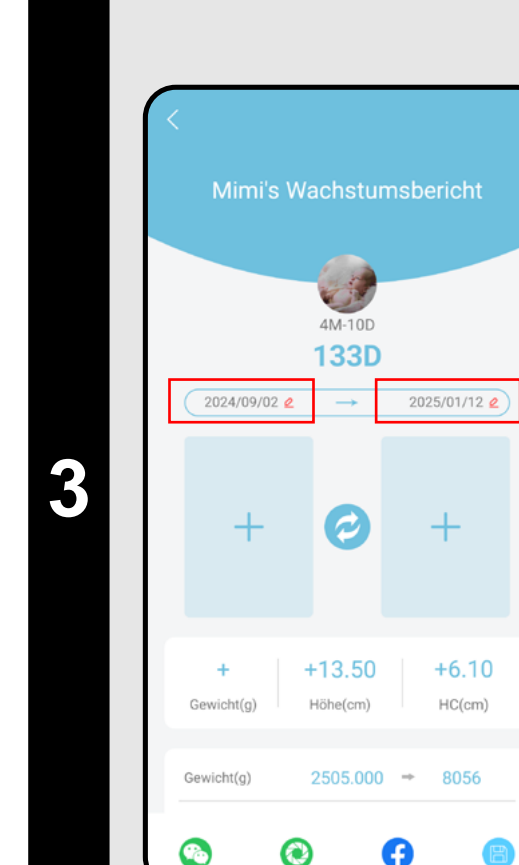

- Datenvergleich**
- Es handelt sich um eine einfache Aufzeichnung einer bestimmten Messung. Durch Klicken auf die Datumssymbole der Messungen gelangen Sie zu einer Liste von Messungen, die nach Datum sortiert sind. Durch Klicken auf eine bestimmte Messung wählen Sie diese aus. Dies tun Sie sowohl für das Datum auf der linken als auch auf der rechten Seite.
 - Wählen Sie links eine ältere Messung und rechts eine neuere. Der Bericht erstellt einen Vergleich dieser beiden Messungen und zeigt die Unterschiede an.
 - Unter den Datumfeldern können Fotos aus dem jeweiligen Zeitraum hinzugefügt werden, um den visuellen Kontrast der Veränderung zu verbessern.
 - Die Methode des Teilens ist identisch mit dem oben genannten Punkt.


8. FREUNDE - MESSUNGEN TEILEN

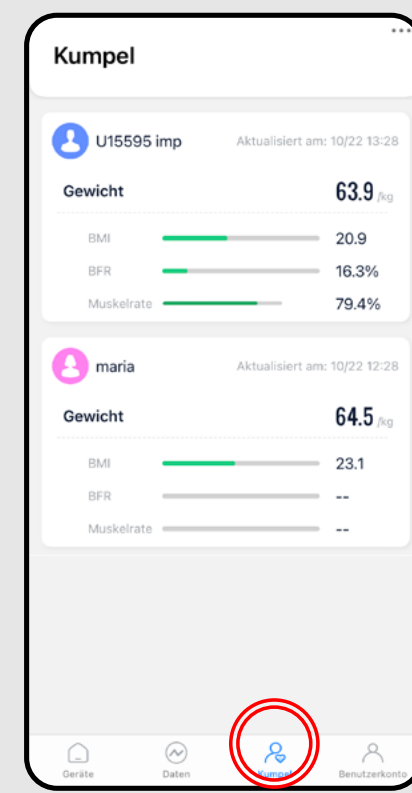1




- Neben der Möglichkeit, die eigenen Ergebnisse zu teilen, bietet die App auch die Möglichkeit, AiLink-Benutzerkonten miteinander zu verknüpfen.
- Auf diese Weise können Sie die Ergebnisse der Person einsehen, mit der Sie verbunden sind und umgekehrt. Diese Person wird Ihre Ergebnisse sehen.
- Beispiel:** In der Abbildung links können Sie sehen, dass das aktuelle Profil seine Ergebnisse mit dem Benutzer "imp" teilt. Benutzer IMP hat mehrere Profile, möchte aber nur sein Hauptprofil und das Profil des Benutzer "maria" freigeben.

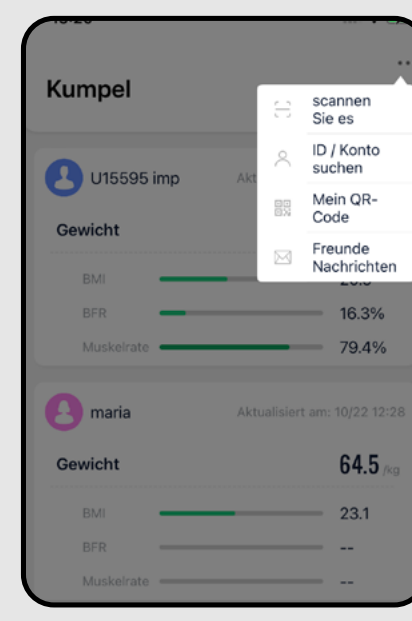2



- Um einen neuen Freund hinzuzufügen, muss eines der Konten in den Bereich „Kumpel“ gehen und auf „...“ klicken. Sie haben dann 2 Möglichkeiten:
 - Mit der Option "**Scannen Sie es**" können Sie den QR-Code von Ihrem Telefon scannen, den Sie von dem anderen Konto erhalten, mit dem Sie Daten teilen möchten. Den QR-Code erhalten Sie, indem Sie auf dem Telefon des anderen Konto auf „**Mein QR-Code**“ klicken, diesen QR-Code scannen und das Teilen des Profil bestätigen.
 - Über die Option „**ID / Konto suchen**“ die E-Mail-Adresse des anderen Account eingeben und bestätigen.
 - Wenn Sie eine Anfrage an einen anderen Benutzer senden, wird dieser im Abschnitt "**Kumpel**" der App eine Benachrichtigung sehen und eine der angezeigten roten Markierungen (👤/👤). wird neben dem Symbol angezeigt. Wählen Sie dann "...", gehen Sie zu "**Freunde Nachrichten**" und bestätigen Sie Ihre Anfrage.
- Hinweis**
Das Konto, das die Anfrage sendet und das Konto, das die Anfrage empfängt, können auswählen welche Unterprofile beim Senden / Empfangen der Anfrage mit der anderen Partei geteilt werden.

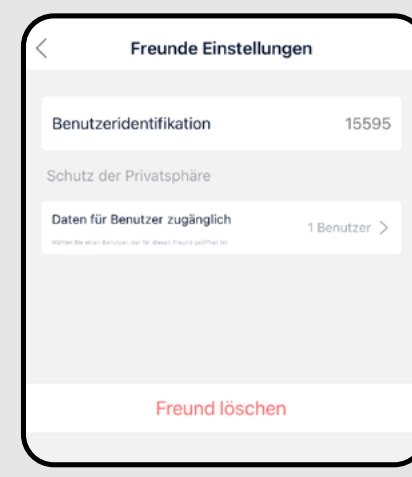3




- Wenn Sie einige Parameter eines gemeinsam genutzten Konto ändern möchten (z.B. Kontoname, Freigabe löschen, gemeinsam genutzte Unterprofile ändern), klicken Sie auf das Profil im Abschnitt "**Kumpel**" und dann auf das Einstellungssymbol „⚙️“.

9A. EINSTELLUNGEN - ALLGEMEINER Teil


Die App ermöglicht Ihnen 2 Grundeinstellungen. Einstellungen im allgemeinen Teil der App (der für die Verwaltung aller in der App verwendeten Produkte gilt) und Einstellungen im Teil der App, der für die ETA-Waage bestimmt ist. Einige Einstellungen überschneiden sich in beiden Fällen, einige sind spezifisch.

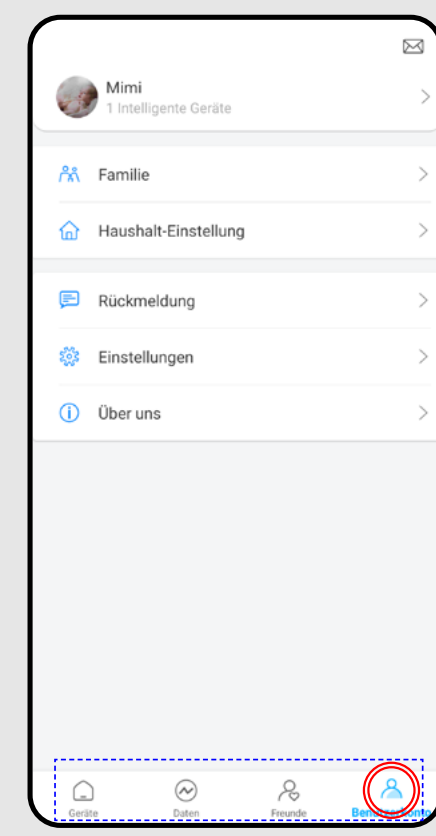1




- Im Bereich Allgemein können Sie Folgendes einstellen:**
 - Bearbeiten Sie das Hauptprofil** (siehe 9A-2 unten)
 - Profilverwaltung** (siehe 9A-3 unten)
 - Haushaltverwaltung** - Verwaltung von Haushalten, Räumen und zugehörigen Produkten. Wenn Sie nur die ETA-Waage verwenden wollen, ist diese Funktion nicht erforderlich.
 - Feedback/ Rückmeldung** - kann an die Applikationsentwickler geschrieben werden. **Verwenden Sie dieses Feld lieber nicht.** Wir empfehlen die Verwendung des Formular direkt, aus dem Anwendungsteil (siehe 9B-2)!
 - Einstellung** - Option zum Umschalten der Anwendungssprache und zum Anzeigen der angeschlossenen Geräte.
 - Über uns** - Zeigt die Version der App und die Möglichkeit, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der App einzusehen.

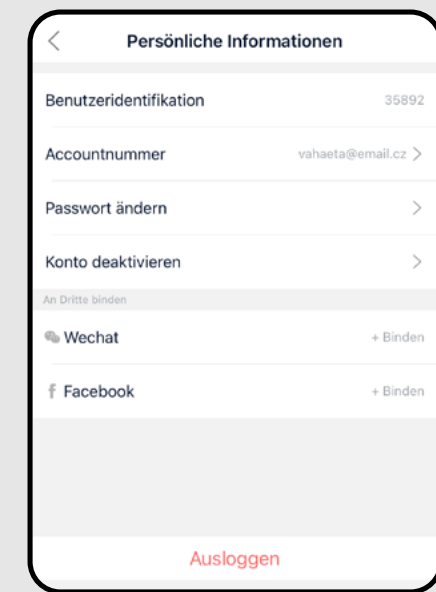2



- Klicken Sie auf das Profil-Icon/ Datei (👤), um zu den Profileinstellungen zu gelangen.
- Hier können Sie Ihre Konto-ID überprüfen, Ihr Passwort ändern oder Ihr Konto deaktivieren.
- Die Optionen für die App von Drittanbietern (WeChat, Facebook u.a.), in diesem Abschnitt der App werden nur verwendet, um Sie darüber zu informieren, ob Sie über diese Dienste in Ihrem Konto eingeloggt sind.

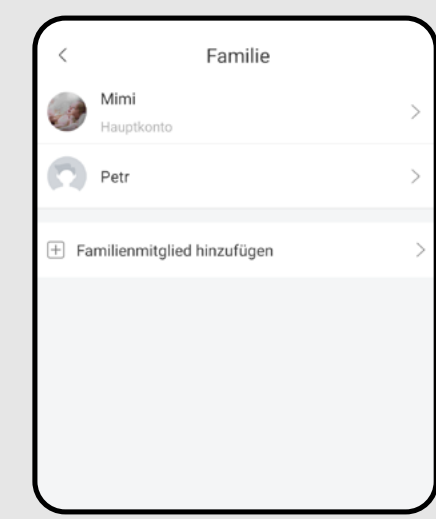
3



- Sektion „**Familie**“ ermöglicht eine einfache Verwaltung der Profile. Im Menü können Sie sowohl das Hauptprofil als auch alle erstellten Unterprofile sehen.
- Nachdem Sie auf das Profil geklickt haben, können Sie die grundlegenden Informationen (Foto, Spitzname, z.B. Geburtstag, Geschlecht u.ä.) oder auch das Profil löschen.
- Um ein neues Unterprofil zu erstellen, klicken Sie auf "**Familienmitglied hinzufügen**".


9B. EINSTELLUNGEN - ANWENDUNGSTEIL

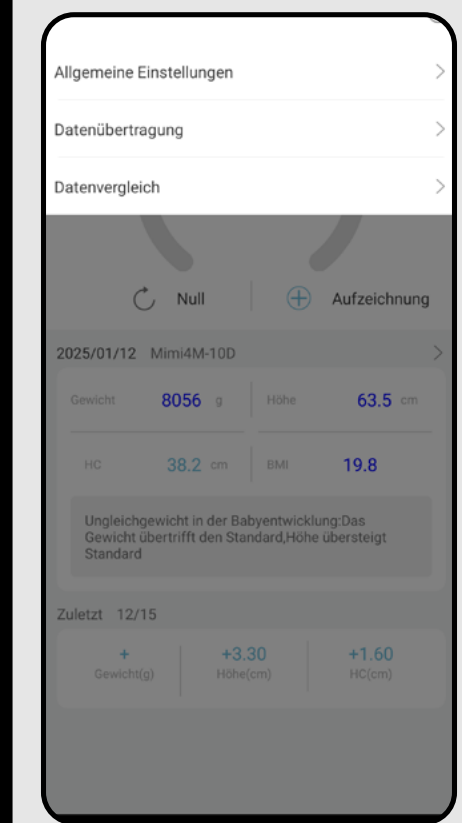1



- Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Symbol "... in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf "**Allgemeine Einstellungen**".

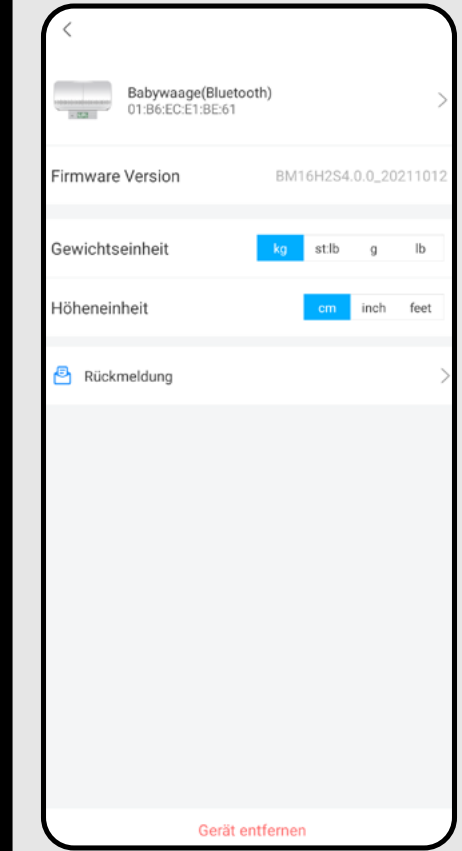2



- Im Anwendungsbereich können Sie die Einheiten für Gewicht und Höhe einstellen.** Sie können die Firmware-Version überprüfen, die Waage umbenennen und Feedback an den Entwickler senden. **Nutzen Sie am besten diese Option** (statt des Feldes im allgemeinen Einstellungsbereich).
- Am unteren Rand des Bildschirms finden Sie dann die Option "**Gerät entfernen**", mit der Sie das Gerät löschen (die Kopplung aufheben) können.

eta